

Gebruikershandleiding



MIRI® TL Viewer Software

Rev. 8.0
Herzieningsdatum 31/07/2026
Alleen Rx

CE
0123



Esco Medical Technologies, UAB

Gamybos g. 2 • Ramučiai, Kauno r., 54468 Lithuania

Tel +370 37 470 000

www.esco-medical.com • support-medical@escolifesciences.com

Neem voor technische service contact op met:

Europa

Esco Medical Technologies, UAB

Gamybos g. 2 • Ramučiai, Kauno r., 54468 Lithuania

Tel +370 37 470 000

www.esco-medical.com • support-medical@escolifesciences.com

Noord-Amerika

Esco Technologies, Inc.

903 Sheehy Drive, Suite F, Horsham, PA 19044, VS

Tel 215-441-9661 • Fax 484-698-7757

www.escolifesciences.us • eti.admin@escoglobal.com

Rest van de wereld

Esco Micro Pte. Ltd.

19 Changi South Street 1 • Singapore 486 779

Tel +65 6542 0833 • Fax +65 6542 6920

www.escolifesciences.com • mail@escolifesciences.com

Informatie over copyright

© Copyright 2014 Esco Micro Pte Ltd. Alle rechten voorbehouden.

De informatie in deze handleiding en het bijbehorende product is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten zijn voorbehouden aan Esco.

Esco behoudt zich het recht voor om periodiek kleine ontwerpwijzigingen aan te brengen zonder de verplichting om een persoon of entiteit van een dergelijke wijziging op de hoogte te stellen.

Sentinel™ is een geregistreerd handelsmerk van Esco.

Let op: Volgens de federale wetgeving mag dit apparaat alleen door of op voorschrift van een bevoegde zorgverlener worden verkocht.

Alleen te gebruiken door een opgeleide en gekwalificeerde professional. Het apparaat wordt verkocht onder vrijstelling 21 CFR 801 subdeel D.

"Het materiaal in deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud en het product beschreven in deze handleiding (inclusief appendix, addendum, bijlage of insluitel), kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Esco geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie in deze handleiding. Esco kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze handleiding".

Het uitpakken en de inspectie

Volg de standaard ontvangstprocedures na ontvangst van het medisch hulpmiddel. Controleer de transportdoos op beschadigingen. Stop met het uitpakken van het medisch hulpmiddel als er schade wordt aangetroffen. Breng de vrachtvervoerder op de hoogte en vraag een vertegenwoordiger om aanwezig te zijn terwijl het medisch hulpmiddel wordt uitgepakt. Er zijn geen speciale instructies voor het uitpakken, maar pas op dat u het medisch hulpmiddel niet beschadigt tijdens het uitpakken. Inspecteer het medisch hulpmiddel op fysieke schade, zoals verbogen of gebroken onderdelen, deuken of krassen.

Claims

Onze routinematige manier van transport is via een gewone koerier. Als er fysieke schade wordt geconstateerd, bewaar dan bij levering alle verpakkingsmaterialen in hun originele staat en neem onmiddellijk contact op met de koerier om een claim in te dienen.

Als het hulpmiddel in goede fysieke staat wordt geleverd, maar niet binnen de specificaties werkt, of als er andere problemen zijn die niet door transportschade zijn veroorzaakt, neem dan onmiddellijk contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger of met Esco Medical Technologies, UAB.

Algemene voorwaarden

Restituties & creditering

Houd er rekening mee dat alleen producten en accessoires die voorzien zijn van een serienummer (producten met een apart serienummer) in aanmerking komen voor een gedeeltelijke terugbetaling en/of creditering. Onderdelen en accessoires zonder serienummer (kabels, draagtassen, hulpmodule, enz.) komen niet in aanmerking voor retournering of restitutie. Om een gedeeltelijke restitutie/creditering te ontvangen, mag het product niet beschadigd zijn. Het moet compleet worden geretourneerd (d.w.z. alle handleidingen, kabels, accessoires, enz.) binnen 30 dagen na de oorspronkelijke aankoop, in "als nieuw" en verkoopbare staat. De *retourneringsprocedure* moet worden gevolgd.

Retourneringsprocedure

Elk product dat voor restitutie/creditering wordt geretourneerd, moet vergezeld gaan van een Return Material Authorization (RMA)-nummer, verkregen van de klantenservice van Esco Medical Technologies, UAB. Alle items die worden geretourneerd, moeten *vooruitbetaald* (vrachtkosten, invoerrechten, provisie en belastingen) naar onze fabriekslocatie worden verzonden.

Kosten herbevoorrading

Voor producten die binnen 30 dagen na de oorspronkelijke aankoop worden geretourneerd, wordt een minimumvergoeding voor herbevoorrading van 20% van de catalogusprijs in rekening gebracht. Op alle retourzendingen worden extra kosten in rekening gebracht voor schade en/of

ontbrekende onderdelen en accessoires. Producten die niet in "als nieuw" en verkoopbare staat verkeren, komen niet in aanmerking voor retourneringscreditering en zullen op eigen kosten aan de klant worden geretourneerd.

Certificering

Dit hulpmiddel is grondig getest/geïnspecteerd en voldoet aan de productiespecificaties van Esco Medical Technologies, UAB bij verzending vanuit de fabriek. Kalibratiemetingen en testen zijn traceerbaar en worden uitgevoerd volgens de ISO-certificering van Esco Medical Technologies, UAB.

Garantie en productondersteuning

Esco Medical Technologies, UAB garandeert dat dit hulpmiddel vrij van defecten is in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik en onderhoud gedurende twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, op voorwaarde dat het medisch hulpmiddel wordt gekalibreerd en onderhouden volgens deze handleiding. Tijdens de garantieperiode zal Esco Medical Technologies, UAB, naar onze keuze, een product dat defect blijkt te zijn kosteloos repareren of vervangen, op voorwaarde dat u het product retourneert (vrachtkosten, invoerrechten, provisie en belastingen vooruitbetaald) naar Esco Medical Technologies, UAB. Eventuele gemaakte transportkosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper en vallen niet onder deze garantie. Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper. De garantie dekt geen schade als gevolg van misbruik, verwaarlozing, ongeval of verkeerd gebruik, of als gevolg van service of wijziging door andere partijen dan Esco Medical Technologies, UAB

IN GEEN GEVAL ZAL ESCO MEDICAL TECHNOLOGIES, UAB. AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEVOLGSCHADE.

Er is geen garantie van toepassing als een van de volgende zaken schade veroorzaakt:

- Stroomstoring, overspanning of stroompieken.
- Schade tijdens het transit of bij het verplaatsen van het hulpmiddel.
- Een onjuiste voeding zoals lage spanning, onjuiste spanning, defecte bedrading of onvoldoende zekeringen.
- Ongeval, wijziging, oneigenlijk gebruik of misbruik van het hulpmiddel.
- Brand, waterschade, diefstal, oorlog, oproer, vijandigheid, overmacht zoals orkanen, overstromingen, enz.

Alleen CultureCoin®-producten (die items met een duidelijk serienummerlabel) en hun bijbehorende accessoires vallen onder deze garantie.

FYSIEKE SCHADE VEROORZAAKT DOOR VERKEERD GEBRUIK OF FYSIEK MISBRUIK WORDT NIET GEDEKT ONDER DE GARANTIE. Items zoals kabels en niet-seriële modules vallen niet onder deze garantie.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en het is mogelijk dat u nog andere rechten hebt, die van provincie tot provincie, van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen. Deze garantie is beperkt tot het repareren van het hulpmiddel volgens de specificaties van Esco Medical Technologies, UAB.

Wanneer u een medisch hulpmiddel naar Esco Medical Technologies, UAB retourneert voor service, reparatie of kalibratie, raden wij u aan het hulpmiddel te verzenden met het originele transportschuim en de originele verpakking.

Als het originele verpakkingsmateriaal niet beschikbaar is, raden we de volgende leidraad aan voor het opnieuw verpakken:

- Gebruik een dubbelwandige doos die sterk genoeg is voor het te verzenden gewicht.
- Gebruik zwaar papier of karton om alle oppervlakken van het hulpmiddel te beschermen. Gebruik niet-schurende materialen rond alle uitstekende delen.
- Gebruik ten minste 10 cm stevig verpakt, industrieel goedgekeurd, schokabsorberend materiaal rondom het hulpmiddel.

Esco Medical Technologies, UAB is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte zendingen of medische hulpmiddelen die in beschadigde staat zijn ontvangen als gevolg van onjuiste verpakking of behandeling. Alle zendingen met garantieclaims moeten op vooruitbetaalde basis worden gedaan (vrachtkosten, invoerrechten, provisie en belastingen). Er worden geen retourzendingen geaccepteerd zonder een Return Materials Authorization ("RMA")-nummer. Neem contact op met Esco Medical Technologies, UAB om een RMA-nummer te verkrijgen en hulp te krijgen met verzend-/douanedocumentatie.

Opnieuw kalibreren van het medisch hulpmiddel, dat een aanbevolen jaarlijkse kalibratiefrequentie heeft, valt niet onder de garantie.

Garantieverklaring

Als uw medisch hulpmiddel is onderhouden en/of gekalibreerd door iemand anders dan Esco Medical Technologies, UAB en zijn vertegenwoordigers, houd er dan rekening mee dat de oorspronkelijke garantie die uw product dekt, vervalt wanneer het fraudebestendige kwaliteitszegel wordt verwijderd of verbroken zonder de juiste fabrieksautorisatie.

In alle gevallen moet het breken van het fraudebestendige kwaliteitszegel ten koste van alles worden vermeden, aangezien dit zegel de sleutel is tot uw originele garantie voor medische hulpmiddelen. In het geval dat de verzegeling moet worden verbroken om interne toegang tot

het medisch hulpmiddel te krijgen, moet u eerst contact opnemen met Esco Medical Technologies, UAB.

U moet ons het serienummer van uw medisch hulpmiddel verstrekken, evenals een geldige reden voor het verbreken van het kwaliteitszegel. U mag deze verzegeling pas verbreken nadat u fabrieksautorisatie heeft ontvangen. Verbreek het kwaliteitszegel niet voordat u contact met ons heeft opgenomen! Als u deze stappen volgt, zorgt u ervoor dat u zonder onderbreking de originele garantie op uw medisch hulpmiddel behoudt.

WAARSCHUWING

Onbevoegde aanpassingen door de gebruiker of toepassingen die verder gaan dan de gepubliceerde specificaties, kunnen leiden tot gevaar voor elektrische schokken of onjuiste werking. Esco Medical Technologies, UAB is niet verantwoordelijk voor enig letsel dat wordt opgelopen als gevolg van ongeautoriseerde aanpassingen aan de apparatuur.

ESCO MEDICAL WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF TOEPASSING.

DIT PRODUCT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN.

ONGEAUTORISEERDE VERWIJDERING VAN DE AFDEKKING VAN HET MEDISCH HULPMIDDEL ZAL DEZE EN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES LATEN VERVALLEN.

Inhoudsopgave

1 Hoe deze handleiding te gebruiken	9
2 Veiligheidswaarschuwing.....	9
3 Beoogd doel/gebruik	9
4 Over het product	10
5 Over de Viewer-software	12
6 De software installeren.....	13
6.1 De software bijwerken.....	13
7 De Viewer gebruiken	13
7.1 Opstarten	13
7.2 Hoofdweergave.....	14
7.3 Time-lapses	15
7.3.1 Lijst time-lapse	15
7.3.2 Time-lapseweergave	18
7.3.2.1 Annotaties.....	23
7.3.2.2 Embryo-meting	28
7.3.2.3 Schaal-kaart	30
7.3.2.4 Ideale tijd	31
7.3.2.5 Embryovergelijking	33
7.3.2.6 Beeldmaximalisatie.....	35
7.3.2.7 Incubatiegegevens loggen	36
7.3.2.8 Overzichtswaergave.....	39
7.3.2.8.1 Overzichtswaergave embryoscoremodel	44
7.3.2.9 Exportfunctie	49
7.3.2.10 Beeldvoorinstellingen	58
7.3.2.10.1 Geavanceerde instellingen	60
7.3.2.10.2 Aanmaken van afbeeldingsvoorinstellingen.....	62
7.4 Patiënten.....	66

7.4.1 Patiëntenlijst	66
7.4.2 Patiëntweergave	69
7.4.3 Behandelingsweergave	73
7.4.4 Weergave time-lapse maken	80
7.5 Incubatorlijst	83
7.6 Instellingen.....	85
7.6.1 Annotatie wijzigen/aanmaken	86
7.6.2 Wijzigen/aanmaken Embryostatussen	88
7.6.3 Sneltoetsen	90
7.6.4 Aanmaken Scoremodellen	92
7.6.4.1 Hiërarchische scoremodellen	96
7.6.4.1.1 Aanmaken van voorwaardelijk knooppunt	97
7.6.4.1.2 Aanmaken resultaatknooppunt	99
7.6.4.1.3 De voorwaardelijke en resultaatknooppunten verwijderen	101
7.6.4.1.4 Extra functies	102
7.6.4.2 Gewogen scoremodellen	104
7.6.4.3 De scoremodellen verwijderen.....	106
7.6.5 Taal.....	107
8 Technische assistentie	111
9 Gegevensbeheer en back-up	111
9.1 Aanbevelingen	111
9.2 MIRI® TL API voor gegevensuitwisseling.....	112

1 Hoe deze handleiding te gebruiken

De handleiding is ontworpen om in secties te worden gelezen en niet idealiter van voor tot achter. Het betekent dat als de handleiding van begin tot eind wordt gelezen, er enige herhaling en overlapping zal zijn.

 **Digitale versie van de Engelse gebruikershandleiding en alle beschikbare vertaalde versies zijn beschikbaar op onze website www.esco-medical.com.**

Volg deze stappen om deze gebruikershandleiding te vinden:

1. Klik op het tabblad "Producten" in het navigatiemenu.
2. Scroll naar beneden en selecteer "MIRI® Time-Lapse incubator".
3. Scroll verder naar beneden om het gedeelte "Literatuur en bronnen" te vinden.
4. Klik op het tabblad "Informatie voor gebruikers".

2 Veiligheidswaarschuwing

- Iedereen die met, aan of in de buurt van deze apparatuur werkt, dient deze handleiding te lezen. Het niet lezen, begrijpen en opvolgen van de instructies in deze documentatie kan het apparaat beschadigen, leiden tot letsel bij het bedieningspersoneel en/of slechte prestaties van de apparatuur.
- Elke interne aanpassing, wijziging of onderhoud aan deze apparatuur moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- In deze handleiding worden belangrijke veiligheidsgerelateerde punten gemarkeerd met de volgende symbolen:



OPMERKING

Het wordt gebruikt om de aandacht op een specifiek item te vestigen.



WAARSCHUWING

Wees voorzichtig.

3 Beoogd doel/gebruik

De IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de Esco Medical MIRI® TL-familie zijn bedoeld om een omgeving te bieden met gecontroleerde temperatuur, CO₂ en andere gassen voor de ontwikkeling van embryo's. Dit model heeft een geïntegreerde omgekeerde microscoop en

beeldvormingssysteem voor het bekijken van embryo's. Het gebruik van het apparaat is beperkt tot zes dagen (199 uur), voor de tijd vanaf de bevruchting tot dag 6 van de ontwikkeling.

4 Over het product

De IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de MIRI® TL-familie van Esco Medical zijn CO₂/O₂-incubatoren met time-lapse-mogelijkheid. In de MIRI® TL6 is het mogelijk om tot 84 embryo's te incuberen, terwijl met de MIRI® TL12 tot 168 embryo's tegelijk kunnen worden geïncubeerd. De IVF-incubatoren met meerdere kamers kunnen time-lapse-beelden genereren en deze leveren om de ontwikkelingskwaliteit en stadia te identificeren.

De enige schaal die wordt gebruikt met MIRI® TL6 en MIRI® TL12 IVF-incubatoren met meerdere kamers is de CultureCoin®.

Directe verwarming van de schalen in de kamers zorgt voor superieure temperaturomstandigheden in vergelijking met conventionele IVF-incubatoren met meerdere kamers.

De temperatuur in de kamer blijft tot 1 °C stabiel (zelfs als een deksel 10 sec. open staat) en herstelt zich binnen 1 minuut na het sluiten van het deksel.*

De Esco Medical MIRI® TL6 IVF-incubator met meerdere kamers heeft 6 volledig gescheiden kweekwarmtekamers, terwijl de MIRI® TL12 12 kamers heeft. Elke kamer heeft zijn eigen verwarmde deksel en ruimte voor één CultureCoin®-schaal.

Om maximale prestaties te garanderen, heeft het systeem van de MIRI® TL6 IVF-incubator met meerdere kamers 12 volledig afzonderlijke PID-temperatuurregelaars, terwijl de MIRI® TL12 er 24 heeft. Ze controleren en regelen de temperatuur in kweekkamers en deksels. Kamers hebben op geen enkele manier invloed op elkaars temperatuur. De boven- en onderkant van elke kamer zijn gescheiden met een PET-laag zodat de temperatuur van het deksel de bodem niet zou beïnvloeden. Voor validatiedoeleinden heeft elke kamer een ingebouwde PT-1000. Het circuit is gescheiden van de elektronica van het apparaat, dus het blijft een wezenlijk apart validatiesysteem.

De IVF-incubator met meerdere kamers moet worden voorzien van 100% CO₂ en 100% N₂ om de CO₂- en O₂-gasconcentraties in de kweekkamers te kunnen regelen.

* Gebaseerd op interne testen. Prestaties kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren en omgevingsomstandigheden.

Een dual-beam infrarood CO₂-sensor met extreem lage driftsnelheden regelt de CO₂-concentratie. Een chemische zuurstofsensor van medische kwaliteit regelt de O₂-concentratie.

De hersteltijd van CO₂ bedraagt gemiddeld 3 minuten nadat het deksel maximaal 10 seconden geopend is geweest.* Om de gasconcentratie te valideren, is de MIRI® TL6 IVF-incubator met meerdere kamers uitgerust met 6 gasmonsterpoorten waarmee de gebruiker gas uit de individuele kamer kan bemonsteren, terwijl de MIRI® TL12 er 12 heeft.

De IVF-incubator met meerdere kamers is voorzien van een gerecirculeerd gassysteem waarbij gas continu in de kamer wordt gebracht en met dezelfde snelheid wordt afgevoerd. Gas wordt gereinigd via 254 nm UVC-licht met direct gascontact tussen de lamp en het gas, vervolgens door een VOS-filter/HEPA-filter. Het UVC-licht heeft filters die straling van 185 nm tegenhouden die gevaarlijke ozon zou produceren. Het VOS/HEPA-filter bevindt zich onder het UVC-licht.

Volledige gasaanvulling in het systeem duurt minder dan 5 minuten.

Het totale gasverbruik is zeer laag. Minder dan 2 l/u CO₂ en 5 l/u N₂ tijdens gebruik.

Om veiligheidsredenen heeft de IVF-incubator met meerdere kamers een gasregelsysteem dat bestaat uit: drukregelaar (voorkomt gevaarlijke gasdrukproblemen), doorstroom-printplaat (werkelijk verbruik kan worden geaccumuleerd), gasdruksensoren (zodat de gebruiker weet dat de druk en variatie kunnen worden gelogd om gevaarlijke omstandigheden te vermijden), gasfilters (om kleproblemen te voorkomen).

De locatie van de CultureCoin®-schaal in een kamer is gemakkelijk te bereiken en te vinden vanwege de nummering van de kamer en de mogelijkheid om met een pen op het witte deksel te schrijven.

De IVF-incubator met meerdere kamers is primair ontwikkeld en ontworpen voor incubatie van gameten en embryo's met een overlay van paraffine of minerale olie.

Het staande led-display is groot, duidelijk en vanaf een afstand goed afleesbaar. De gebruiker kan zien of de parameters correct zijn zonder in de buurt van het apparaat te komen.

De software draait op het ingebouwde touchscreen. De pc bestuurt een microscopiesysteem dat elke 5 minuten een beeld kan genereren. Wanneer ze zijn gecompileerd, kunnen deze afbeeldingen worden bekeken als een time-lapse-film.

De software bevat logfuncties voor langdurige datalogging en -opslag.

De gebruiker kan elke standaard BNC pH-sonde op het apparaat aansluiten en de pH in de monsters naar believen meten.

De IVF-incubatoren met meerdere kamers van de MIRI® TL-familie zijn stationaire apparaten. De term verwijst naar apparatuur die, eenmaal geïnstalleerd en in gebruik genomen, niet bedoeld is om van de ene plaats naar de andere te worden verplaatst.

Alleen personen met een formele opleiding in de gezondheidszorg of medische discipline mogen werken met de MIRI® IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de TL-familie.

De Esco Medical MIRI® IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de TL-familie worden gebruikt voor in-vitrofertilisatie (IVF) patiënten. Patiënten zijn vrouwen in hun voortplantingsjaren die vruchtbaarheidsproblemen hebben. De beoogde doelgroepindicatie is IVF-behandeling. Er zijn geen beoogde doelgroepcontra-indicaties.

Het apparaat is vervaardigd onder een volledig EU-gecertificeerd 13485 ISO-kwaliteitsmanagementsysteem.

Dit product voldoet aan de vereisten van EN60601-1 3e editie normen als een klasse I type B equivalent apparaat geschikt voor continu gebruik. Het voldoet ook aan de vereisten van de Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen en is geclassificeerd als IIa-apparaat volgens regel II.

De Richtlijnen voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (89/686/EEG) en de Machinerichtlijn (2006/42/EG) zijn niet van toepassing op MIRI® IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de TL-familie. Ook bevatten of omvatten de MIRI® IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de TL-familie geen: medische substantie, waaronder een menselijk bloed- of plasmaderivaat; weefsels of cellen, of derivaten daarvan, van menselijke oorsprong; of weefsels of cellen van dierlijke oorsprong, of derivaten daarvan, zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 722/2012.

5 Over de Viewer-software

De Viewer-software voor de IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de MIRI® TL-familie is een informatieverschaffend hulpmiddel dat de gebruikers van de MIRI® TL IVF-incubatoren met meerdere kamers kan helpen bij het verwerken van de gegevens die worden gegenereerd door de MIRI® TL6 en MIRI® TL12 IVF-incubatoren met meerdere kamers. De software bevat een complete patiëntendatabase. In de database kunnen verschillende gegevens over de patiënt en de behandeling worden ingevoerd als de gebruiker daarvoor kiest.

De software kan ook worden gebruikt zonder andere informatie dan de naam van de patiënt in te voeren. De software kent een unieke identificatiecode toe aan elke patiënt, zodat ze zich niet kunnen vergissen. Met de unieke identificatiecode en de gegenereerde time-lapse, maakt de software het mogelijk om de ontwikkeling van de gebruiker te annoteren en een snelle grafische vergelijkingstool waarmee embryo's kunnen worden vergeleken. De software functioneert ook als een videospeler die de time-lapse-video afspeelt.

De software toont ook de status van de incubator en alarmcondities, maar de gebruikerswaarschuwings- en interactiefuncties bevinden zich allemaal op het apparaat zelf.

De huidige softwareversie van de Viewer van de MIRI® TL is 1.22.2.0.

6 De software installeren

De software is voorgeïnstalleerd op de AIO-computer die bij de MIRI® TL-incubator wordt geleverd. De MIRI® TL Viewer-software mag niet opnieuw worden gedistribueerd.


6.1 De software bijwerken

De software die is geïnstalleerd op uw MIRI® TL6 en MIRI® TL12 IVF-incubator met meerdere kamers, de MIRI® TL Viewer All-in-One-computer of de minicomputer van het optionele MIRI® TL uitgebreide configuratiepakket, kan worden geüpgraded. Elke keer dat er een belangrijke update beschikbaar is, wordt deze aan onze distributeurs over de hele wereld verstrekt – zij zullen ervoor zorgen dat uw incubator met de nieuwste beschikbare software werkt. Een servicemonteur kan dit doen tijdens een gepland jaarlijks onderhoud

7 De Viewer gebruiken

7.1 Opstarten

Er staat een "MIRI® TL Viewer"-startpictogram op het bureaublad.

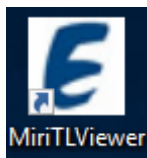

Afbeelding 7.1 "MIRI® TL Viewer"-pictogram op het bureaublad

Door te dubbelklikken op het pictogram, wordt de MIRI® TL Viewer-toepassing gestart en weergegeven op het hoofdscherm.


7.2 Hoofdweergave

De hoofdweergave toont 4 knoppen:

- Time-lapses (een lijst van de gegenereerde time-lapses).
- Patiënten (de database van de patiënten).
- Incubatoren (MIRI® TL6 en MIRI® TL12 IVF-incubatoren met meerdere kamers aangesloten op de Viewer)
- Instellingen (een module waarmee de gebruiker de parameters, annotatie en ideale tijden kan aanpassen).

Alle interactie met de software is intuïtief en eenvoudig. Navigeren tussen de menu's kan door op de relevante gekleurde pictogrammen of de pijl-terug in de linkerbovenhoek te drukken.

In de linkerbenedenhoek van het hoofdscherm van de MIRI® IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de TL-familie, wordt ook opslaginformatie aan de gebruiker verstrekt.

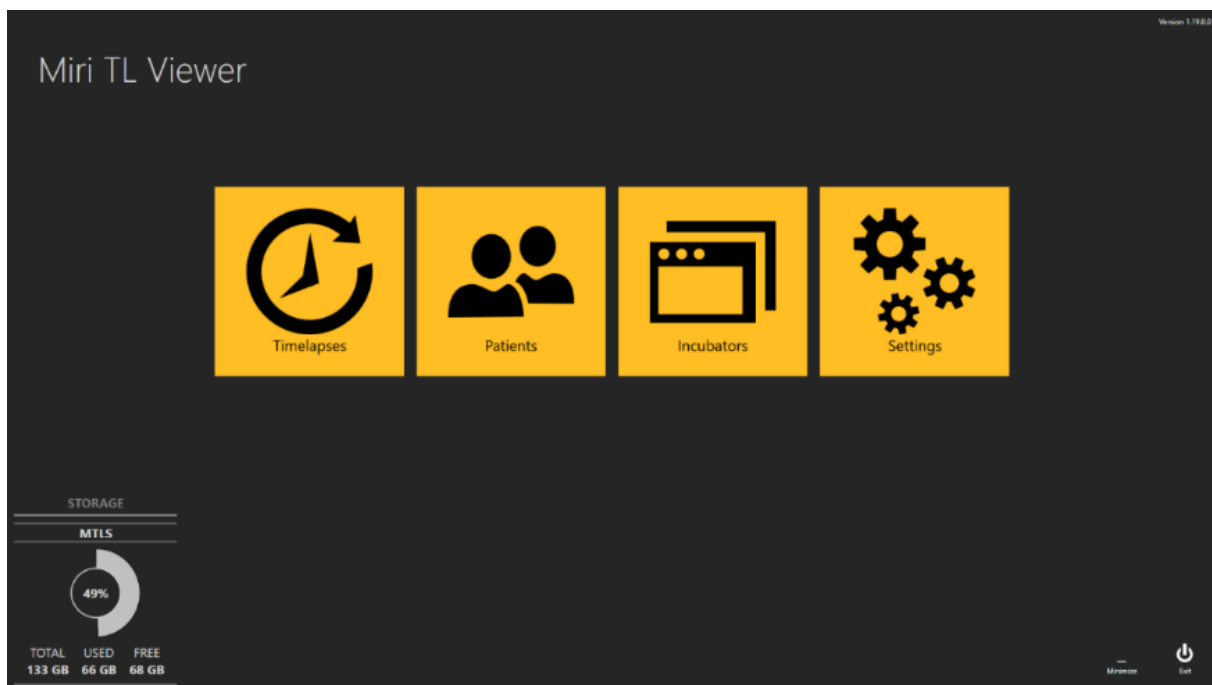


Afbeelding 7.2 Hoofdscherm Viewer van de MIRI® TL6 en MIRI® TL12 IVF-incubatoren met meerdere kamers

7.3 Time-lapses

7.3.1 Lijst time-lapse

Door op de knop "Time-lapses" te drukken, wordt de weergave gewijzigd in de lijst met time-lapses die zijn gegenereerd op de aangesloten MIRI® IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de TL-familie. Als er meer dan één MIRI® TL6 of MIRI® TL12 IVF-incubatoren met meerdere kamers op de server zijn aangesloten, zal de lijst bestaan uit gegevens van al deze apparaten.

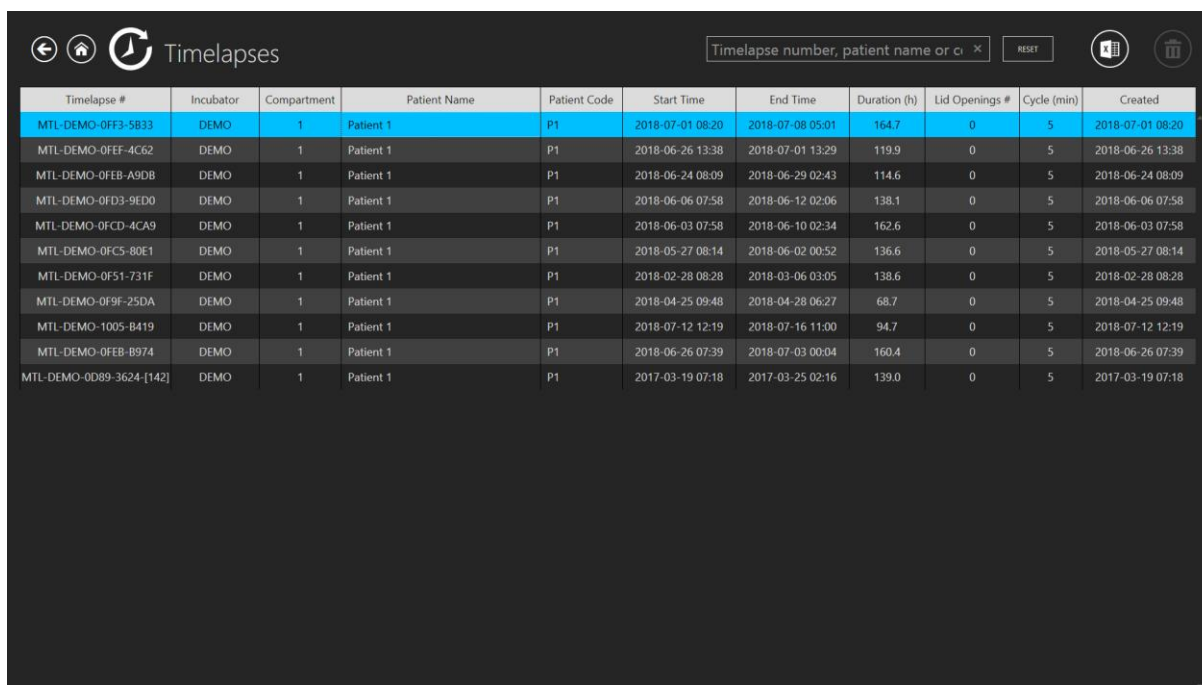

The screenshot shows the 'Timelapses' interface with a search bar and a table of data. The table has the following columns: Timelapse #, Incubator, Compartment, Patient Name, Patient Code, Start Time, End Time, Duration (h), Lid Openings #, Cycle (min), and Created. The first row is highlighted in blue.

Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09
MTL-DEMO-0FD3-9ED0	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-06 07:58	2018-06-12 02:06	138.1	0	5	2018-06-06 07:58
MTL-DEMO-0FCD-4CA9	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-03 07:58	2018-06-10 02:34	162.6	0	5	2018-06-03 07:58
MTL-DEMO-0FC5-80E1	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-05-27 08:14	2018-06-02 00:52	136.6	0	5	2018-05-27 08:14
MTL-DEMO-0FS1-731F	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-28 08:28	2018-03-06 03:05	138.6	0	5	2018-02-28 08:28
MTL-DEMO-0F9F-25DA	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-04-25 09:48	2018-04-28 06:27	68.7	0	5	2018-04-25 09:48
MTL-DEMO-1005-8419	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-12 12:19	2018-07-16 11:00	94.7	0	5	2018-07-12 12:19
MTL-DEMO-0FEB-B974	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 07:39	2018-07-03 00:04	160.4	0	5	2018-06-26 07:39
MTL-DEMO-0D89-3624-[142]	DEMO	1	Patient 1	P1	2017-03-19 07:18	2017-03-25 02:16	139.0	0	5	2017-03-19 07:18

Afbeelding 7.3 Lijst met uitgevoerde time-lapses

Een **filterfunctie** voor de IVF-incubator met meerdere kamers bevindt zich in de linkerbovenhoek van het hoofdscherm, waar de gebruiker de time-lapse-zoekopdracht kan verfijnen door de specifieke incubator te selecteren. De gebruiker kan ook de time-lapses filteren door de gewenste time-lapse-status te selecteren: "Alle", "Actief" of "Voltooid".



The screenshot shows two dropdown menus. The first is labeled 'Incubator : All' and the second is labeled 'State : All'.

Afbeelding 7.4 Opties filterfuncties

Er is een **zoekfunctie** in de rechterbovenhoek, waar het time-lapse-nummer, de incubator, de patiëntnaam of de patiëntcode kan worden ingevoerd om de zoekopdracht uit te voeren.




The screenshot shows a search bar with the placeholder text 'Timelapse number, patient name or c' and a close button (X).

Afbeelding 7.5 Zoekfunctie

Standaard toont de weergave alle time-lapses gerangschikt volgens het behandelingsnummer (een teller die telt van de oudste naar de nieuwste time-lapse en de nieuwe time-lapse altijd bovenaan de lijst zet).


Met de knop "Reset" worden alle geselecteerde filters gereset.

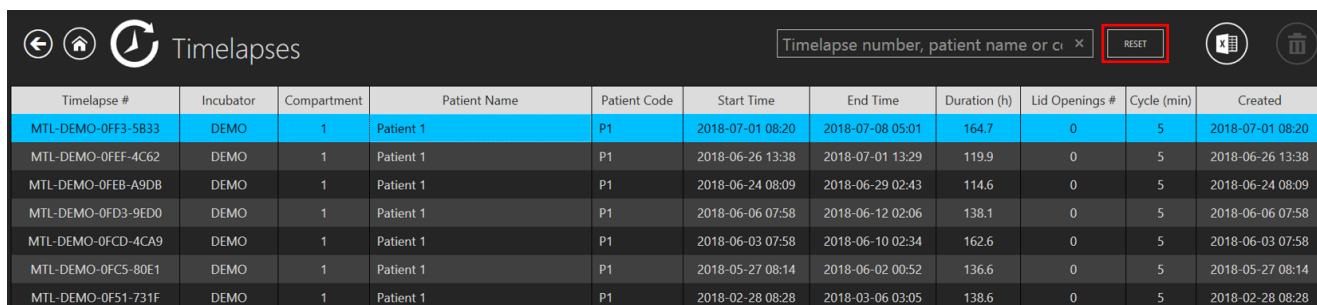

Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09
MTL-DEMO-0FD3-9ED0	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-06 07:58	2018-06-12 02:06	138.1	0	5	2018-06-06 07:58
MTL-DEMO-0FCD-4CA9	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-03 07:58	2018-06-10 02:34	162.6	0	5	2018-06-03 07:58
MTL-DEMO-0FC5-80E1	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-05-27 08:14	2018-06-02 00:52	136.6	0	5	2018-05-27 08:14
MTL-DEMO-0FS1-731F	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-28 08:28	2018-03-06 03:05	138.6	0	5	2018-02-28 08:28

Afbeelding 7.6 "Reset"-knop

Door op een "Rapport"-knop in de rechterbovenhoek van de Viewermenu van de MIRI® IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de TL-familie te drukken, kan de gebruiker een time-lapse-annotatiebestand genereren, dat ook uit gekoppelde scoremodelresultaten zal bestaan.

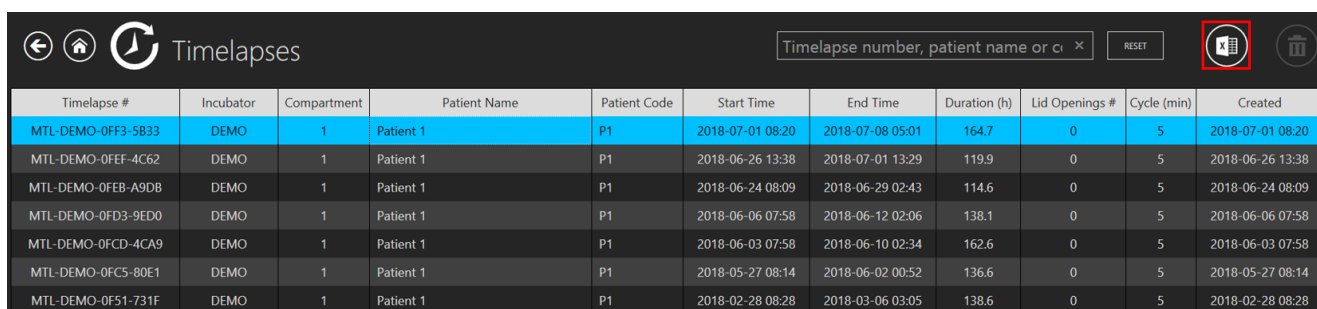

Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09
MTL-DEMO-0FD3-9ED0	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-06 07:58	2018-06-12 02:06	138.1	0	5	2018-06-06 07:58
MTL-DEMO-0FCD-4CA9	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-03 07:58	2018-06-10 02:34	162.6	0	5	2018-06-03 07:58
MTL-DEMO-0FC5-80E1	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-05-27 08:14	2018-06-02 00:52	136.6	0	5	2018-05-27 08:14
MTL-DEMO-0FS1-731F	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-28 08:28	2018-03-06 03:05	138.6	0	5	2018-02-28 08:28


Afbeelding 7.7 "Rapport"-knop

In het geëxporteerde bestand staan de resultaten van het embryoscoremodel in de laatste kolom van het Excel-bestand.

AV	AW
Models	
Hierarchical test model	Weighted test model
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
Acceptable	6.334
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

Afbeelding 7.8 Locatie van scoremodellen in het geëxporteerde Excel-bestand


Met de knop "Verwijderen" wordt de geselecteerde time-lapse verwijderd. De gebruiker kan de time-lapse-invoer **alleen verwijderen als deze niet in de incubator is gestart**. Met deze functie kan de gebruiker een andere incubator selecteren als hij een fout heeft gemaakt bij het kiezen van de incubator bij het maken van een time-lapse.

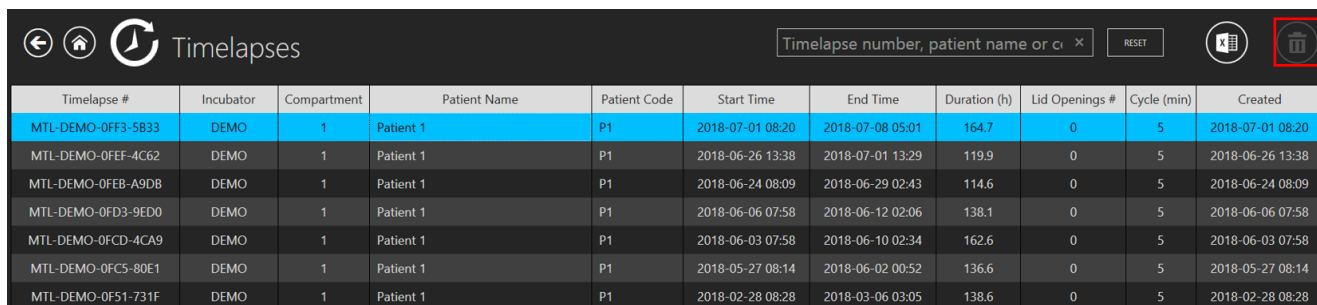

Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09
MTL-DEMO-0FD3-9ED0	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-06 07:58	2018-06-12 02:06	138.1	0	5	2018-06-06 07:58
MTL-DEMO-0FCD-4CA9	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-03 07:58	2018-06-10 02:34	162.6	0	5	2018-06-03 07:58
MTL-DEMO-0FC5-80E1	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-05-27 08:14	2018-06-02 00:52	136.6	0	5	2018-05-27 08:14
MTL-DEMO-0F51-731F	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-28 08:28	2018-03-06 03:05	138.6	0	5	2018-02-28 08:28

Afbeelding 7.9 "Verwijderen"-knop

De knop "Home" brengt de gebruiker naar de hoofdweergave. Deze knop is beschikbaar in **alle menu's** om de navigatie te vergemakkelijken en de gebruikerservaring te verbeteren.

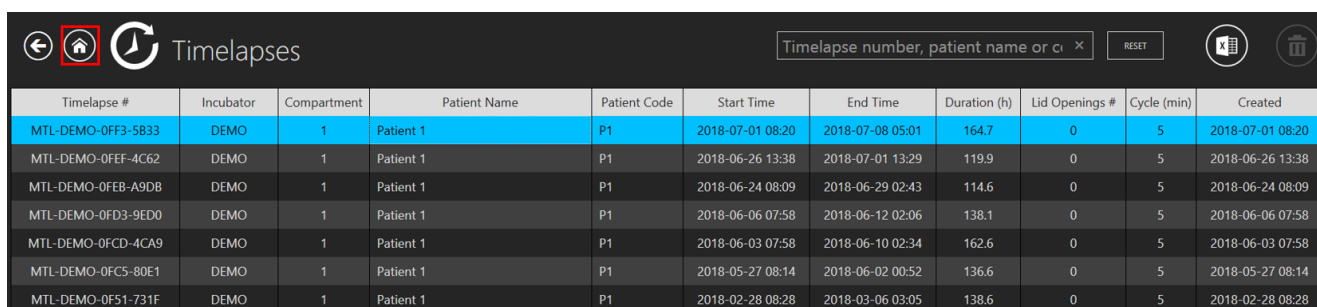

Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09
MTL-DEMO-0FD3-9ED0	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-06 07:58	2018-06-12 02:06	138.1	0	5	2018-06-06 07:58
MTL-DEMO-0FCD-4CA9	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-03 07:58	2018-06-10 02:34	162.6	0	5	2018-06-03 07:58
MTL-DEMO-0FC5-80E1	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-05-27 08:14	2018-06-02 00:52	136.6	0	5	2018-05-27 08:14
MTL-DEMO-0F51-731F	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-28 08:28	2018-03-06 03:05	138.6	0	5	2018-02-28 08:28

Afbeelding 7.10 "Home"-knop

De time-lapse-weergave toont:

- Time-lapsenummer (unieke time-lapse-identificatie).
- Incubator-ID (waarin de MIRI® TL IVF-incubator met meerdere kamers de specifieke time-lapse werd gegenereerd).
- Kamer (waarin de kamer van de MIRI® TL6 of MIRI® TL12 IVF-incubator met meerdere kamers de specifieke time-lapse werd gegenereerd)
- Patiëntnaam.
- Patiëntcode.
- Starttijd (in behandeling indien nog actief).
- Eindtijd (in behandeling indien nog actief).
- Duur (u) (in behandeling indien nog actief).

- Aantal dekselopeningen (teller die dekselopeningen in de specifieke kamer telt tijdens de time-lapse).
- Cyclus (min) (de ingestelde cyclustijd tussen elke afbeeldingsstapel).
- Gemaakt (de datum en tijd waarop het time-lapse-bestand is gemaakt).

Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09


Afbeelding 7.11 Time-lapse-menu

De time-lapse film kan hier worden ingevoerd door te dubbelklikken op de specifieke time-lapse die de gebruiker wil openen.

7.3.2 Time-lapseweergave

Een time-lapse-gegevensbestand wordt geopend vanuit de hoofdweergave van de time-lapse-lijst, (door te dubbelklikken op de gewenste time-lapse), vanuit de specifieke patiëntweergave of de specifieke patiëntbehandelingsweergave.

Bij het openen wordt een revolverweergave met de filmbestanden weergegeven.

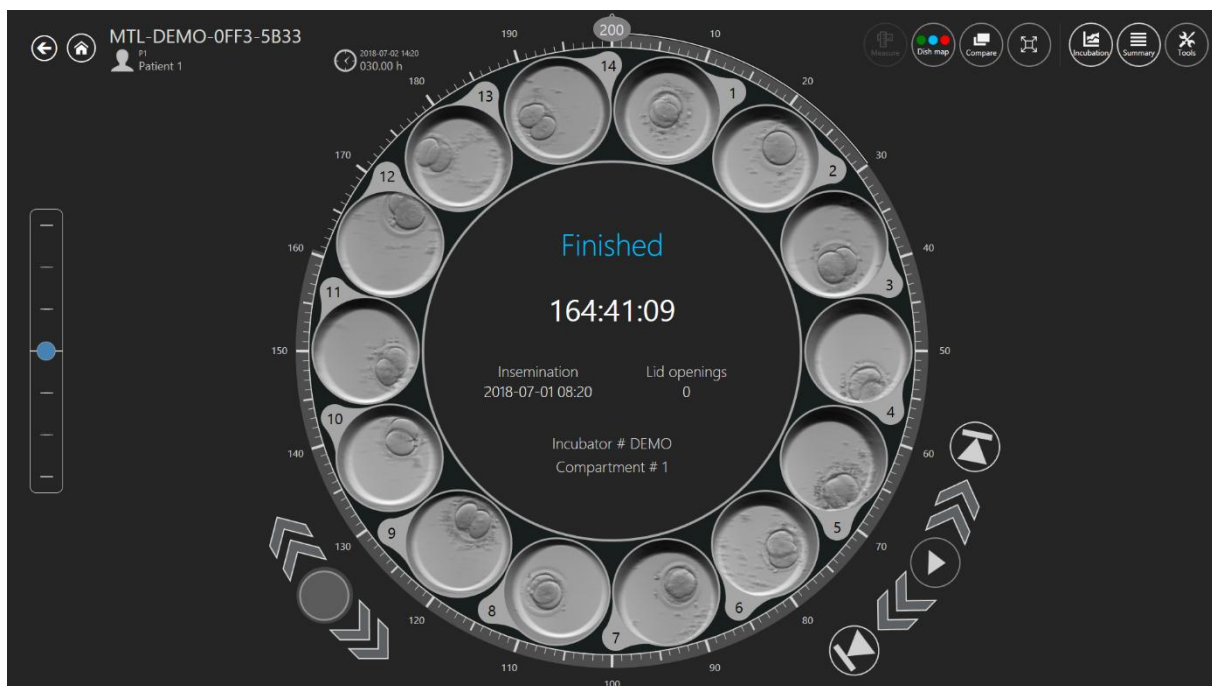

Afbeelding 7.12 De time-lapse weergave van een specifieke patiënt

De weergave bevat de 14 putjes van één enkele CultureCoin®-schaal. Soms wordt het putje als inactief weergegeven (zie Afbeelding 7.13) en kan de gebruiker het putje niet selecteren. Om een specifiek putje te activeren of inactiveren, raadpleegt u de "Gebruikershandleiding van de MIRI IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de TL-familie".



Afbeelding 7.13 Aanwijzing inactief putje


Wanneer het putje actief is, kan de gebruiker deze selecteren en wordt deze weergegeven in het midden van de revolverweergave. Als u op de actieve put klikt, kunt u annotaties, metingen, vergelijkingen en nog veel meer maken terwijl u ook de weergave van het putje vergroot.

In het midden van de weergave is er een gebied waar de nodige informatie wordt verstrekt, zoals:

- Incubatornummer.
- Kamernummer.
- Inseminatietijd.
- Dekselopeningen tijdens de time-lapse.
- De time-lapse-status: "In behandeling" of "Voltooid".

In de linkerbovenhoek van de time-lapse-weergave worden het time-lapse-ID-nummer en patiëntinformatie weergegeven.


Links van de revolverweergave bevindt zich de brandpuntsvlakverschuiver.

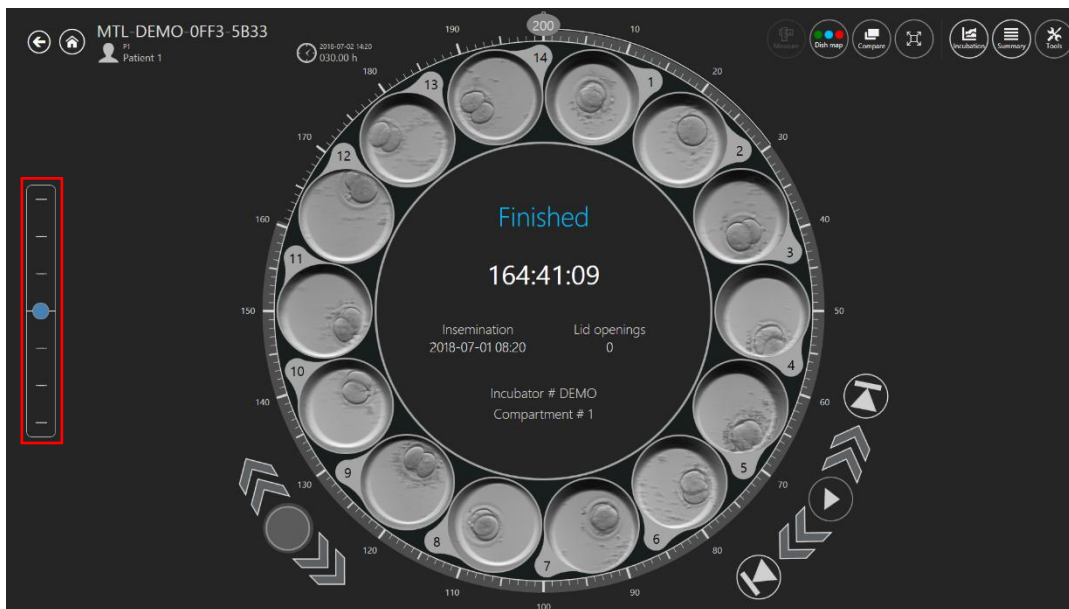

Afbeelding 7.14 Brandpuntsvlakverschuiver


Het heeft het aantal stappen waarin de time-lapse-film is gegenereerd (d.w.z. 3, 5 of 7). Met de vinger of de muis kan de gebruiker de blauwe marker op en neer bewegen om alle films tegelijkertijd door alle mogelijke brandpuntsvlakken te verschuiven. Brandpuntsvlakken kunnen niet afzonderlijk worden weergegeven voor verschillende putjes. Alle 14 putjes bevinden zich te allen tijde in hetzelfde brandpuntsvlak.

Rechtsonder, bij de hoofdweergave van de revolver, bevinden zich vijf bedieningselementen voor de videospeler. Ze stellen de gebruiker in staat om door de film te bladeren, deze te pauzeren, af te spelen of naar het begin of einde te springen.

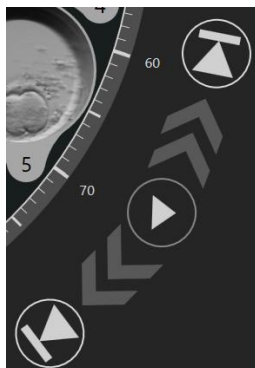

Afbeelding 7.15 Bedieningselementen videospeler

De cirkelvormige tijdsaanduiding rond de revolverweergave kan ook worden gebruikt om snel de gewenste tijd te selecteren. De geselecteerde tijd wordt weergegeven links boven de revolverweergave, in de buurt van het 13^e putje.

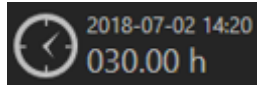

Afbeelding 7.16 Gekozen tijd


De bedieningselementen van de putnavigatie bevinden zich links onder de revolverweergave. Daar wordt een aantal van de momenteel geselecteerde put weergegeven, evenals pijlen waarmee de gebruiker naar het volgende/vorige putje van de CultureCoin® kan navigeren.



Afbeelding 7.17 Bedieningselementen putnavigatie

 **Het is ook mogelijk om een sneltoetscombinatie op het toetsenbord te gebruiken (linker Alt + pijl-links/rechts) om naar het volgende putje te springen.**

Wanneer het specifieke putje in de actieve time-lapse op een bepaald tijdstip wordt gestopt in de LiveView-modus van de MIRI® IVF-incubator met meerdere kamers uit de TL-familie, geeft de Viewer-software dit aan in de time-lapseweergave. De software toont het vierkante symbool en de specifieke tijd waarop de time-lapse werd gestopt.

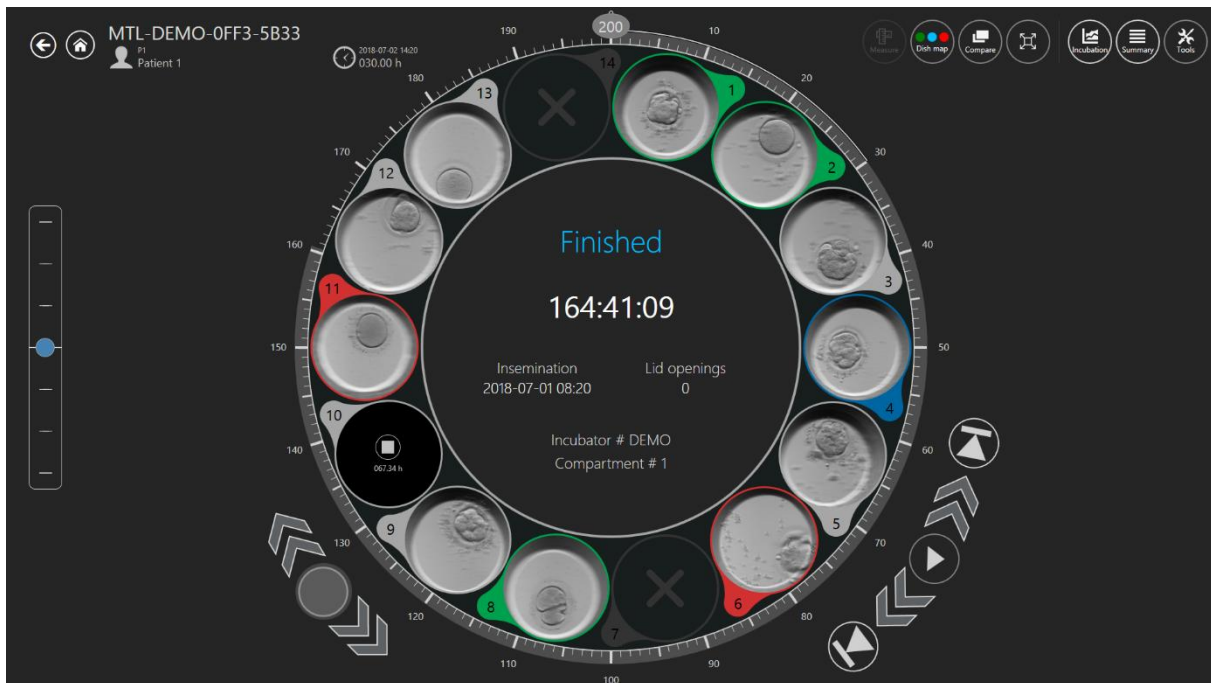


Afbeelding 7.18 De time-lapse-weergave van een specifieke patiënt met 1 gestopte time-lapse



Afbeelding 7.19 De weergave van de time-lapse, die werd gestopt om 67.34h

7.3.2.1 Annotaties

De gebruiker kan met de linkermuisknop klikken op een putje met een embryo erin om het putje te vergroten tot het midden van de revolver (verplaatsen naar het "actieve gebied"). Deze actie verandert de weergave van het menu een beetje waar de gebruiker het geïntegreerde annotatiesysteem kan gaan gebruiken. Het is opgebouwd rond "Gebeurtenissen" in het menu links van het revolverwiel.

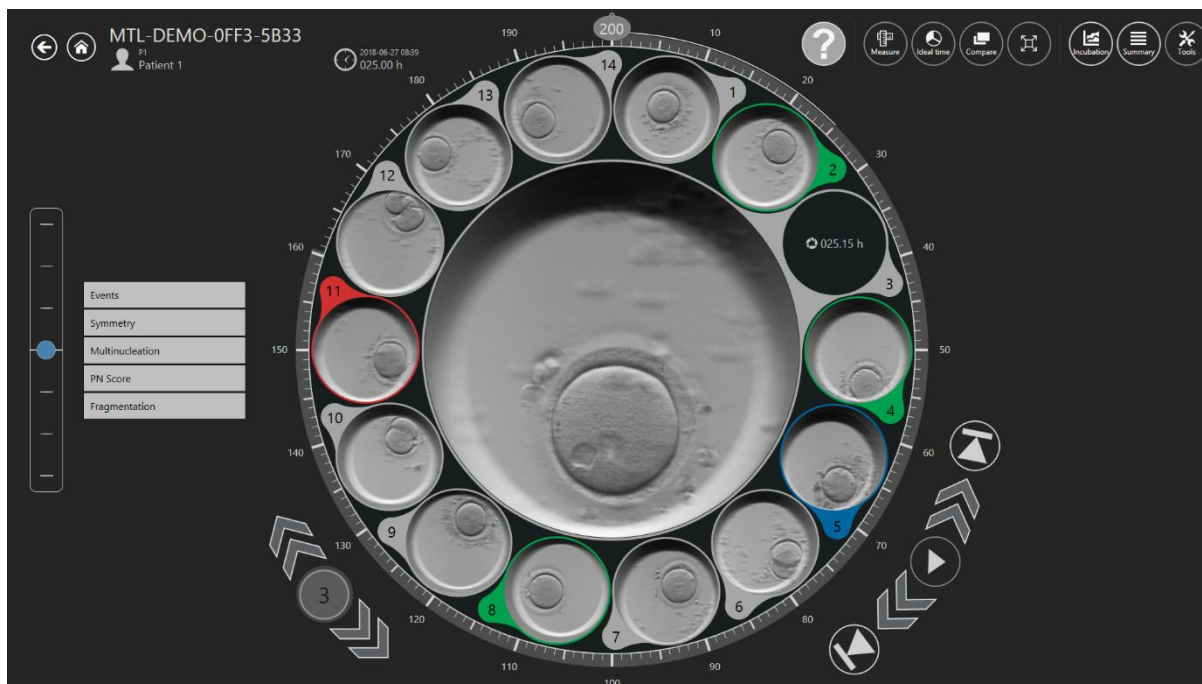


Afbeelding 7.20 Weergave time-lapse-annotatie

👉 Een putnummer van het momenteel geselecteerde CultureCoin®-putje wordt zichtbaar in de bedieningselementen van de putnavigatie.


Wanneer de gebruiker een gebeurtenis in de film waarneemt, bijvoorbeeld de deling naar een 2-cellig embryo ziet, dubbelklikt de gebruiker op de "t2" onder de lijst met gebeurtenissen.

👉 Het is mogelijk om een sneltoetscombinatie op het toetsenbord te gebruiken (linker Control + pijl-links/rechts) om naar de volgende annotatie te springen.

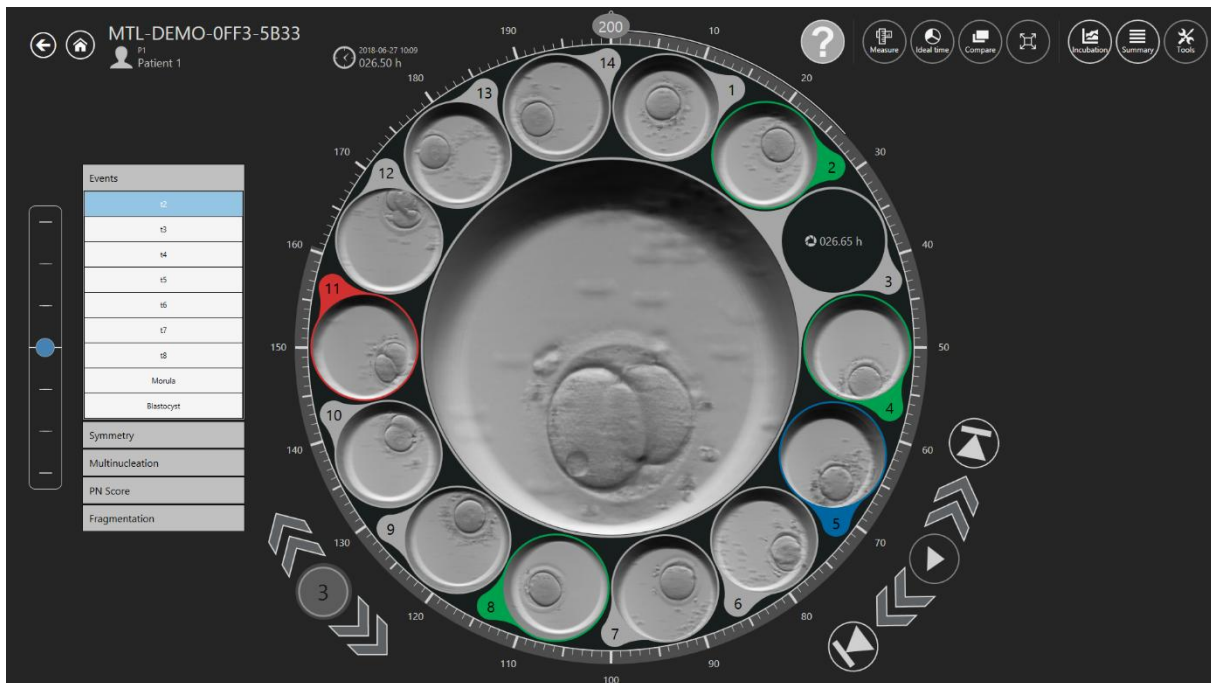

Afbeelding 7.21 De weergave vóór het toevoegen van de nieuwe gebeurtenis

Nu zal de t2 naar de rechterkant van de time-lapse-weergave gaan en de tijdlijn totdat de gebeurtenis wordt gekleurd met de juiste annotatiekleur.

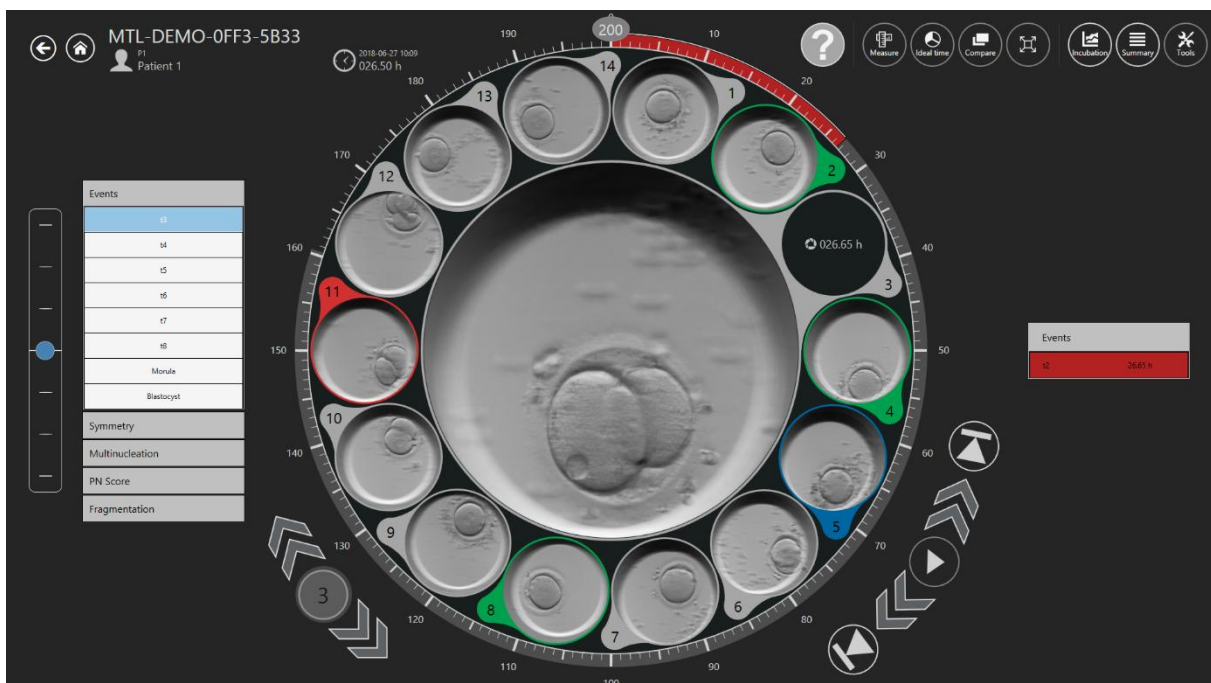

Afbeelding 7.22 De weergave na het toevoegen van de nieuwe gebeurtenis


Wanneer aan alle gebeurtenissen een tijd is toegewezen, is het embryo geannoteerd. Hoeveel gebeurtenissen de gebruiker wil gebruiken (annotatieniveau) is geheel naar eigen goeddunken en afhankelijk van de selectiecriteria die de kliniek hanteert. Elke onjuiste annotatie kan snel worden teruggezet (verwijderd) door erop te dubbelklikken aan de resultaatzijde.

Annotaties worden opgeslagen in de database.

Annotaties kunnen door de gebruiker worden aangepast (raadpleeg paragraaf "7.6.1 Annotatie wijzigen/aanmaken" in de gebruikershandleiding voor meer informatie).

In de standaardvorm bevat het annotatiemenu (zie Afbeelding 7.23):

- Gebeurtenissen (t2 – t8, morula, blastocyst)
- Symmetrie (even of oneven)
- Multinucleatie (MN 1c, MN 2c)
- PN-score (1PB, 2PB, 2PN, syngamie, PN-fading, 1PN, Z1, Z2, Z3, Z4, centraal, centraal zijde, zijde)
- Fragmentatie (5%, 10%, 15%, 20% of omkering)

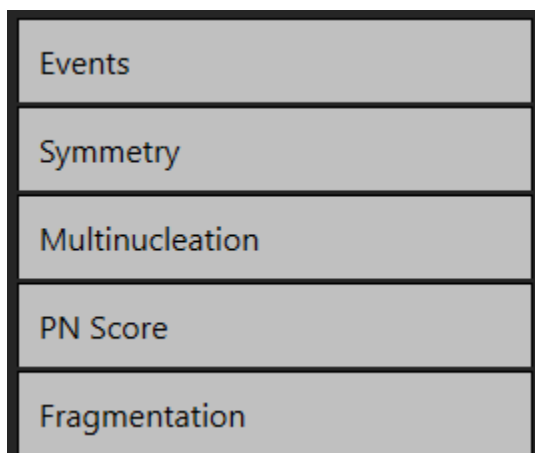

Afbeelding 7.23 Het annotatiemenu

De resultaten van de gebeurtenissen worden automatisch berekend en verschijnen in de resultatenlijst "Overzichtswaergave" en de tabel met de annotatiegroep "Rapport" zodra aan de gebeurtenissen een tijd is toegewezen. De annotatiegroeptabel "Rapport" kan bijvoorbeeld het tijdsverschil in de celcyclus tussen bepaalde celdelingen weergeven, d.w.z. $cc2 = t3 - t2$; $cc3 = t5 - t3$.

5

Events

two cells7.88 h

t333.21 h

t433.46 h

t550.21 h

t652.88 h

t754.63 h

t860.46 h

Measurement

Measurement0.15 h

Calculations

cc225.33 h

s20.25 h


cc317.00 h

s310.25 h

ANNOTATION GROUP	NAME	TIME
Events	two cells	7.88h
	t3	33.21h
	t4	33.46h
	t5	50.21h
	t6	52.88h
	t7	54.63h
	t8	60.46h
ANNOTATION GROUP	NAME	TIME
Measurement	Measurement	0.15h
ANNOTATION GROUP	NAME	TIME
Calculations	cc2	25.33h
	s2	0.25h
	cc3	17h
	s3	10.25h

Afbeelding 7.24 Berekeningen van celdelingstijd in de overzichtsweergave en het rapport

Op de onderstaande afbeelding bevindt het embryo zich in het actieve gebied. De gebeurtenissenlijst is geopend en t2 heeft een tijd toegewezen gekregen, daarom is het verplaatst naar het resultaat (d.w.z. geannoteerd).

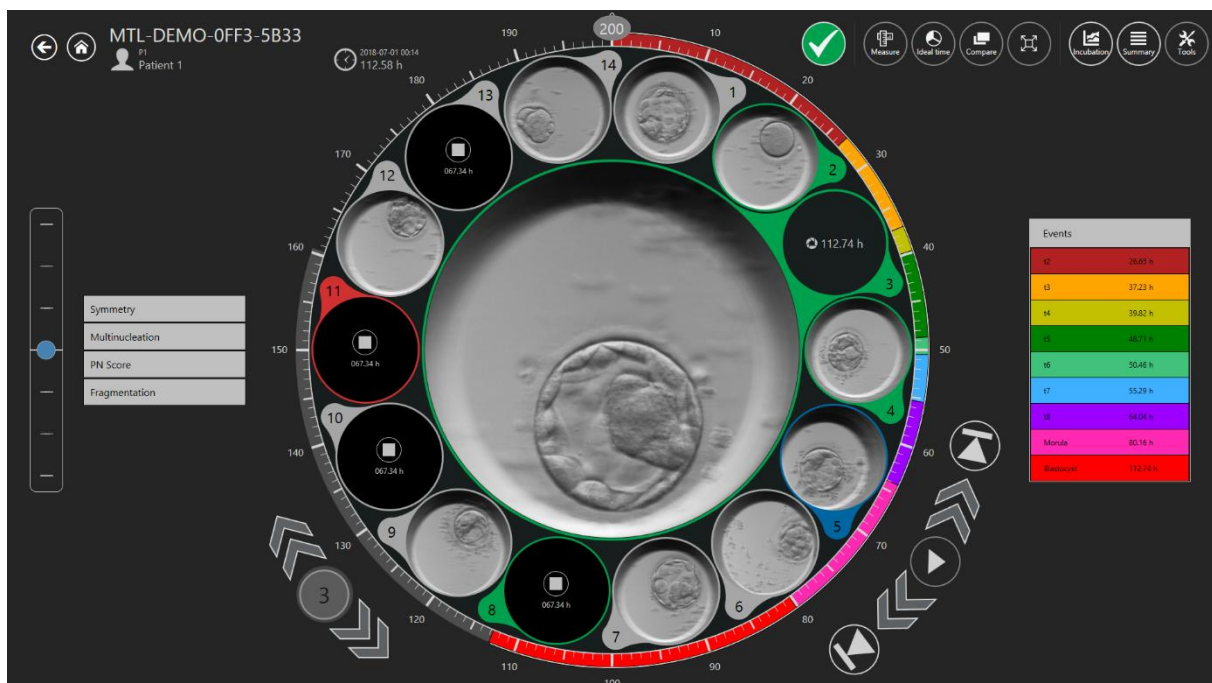


Afbeelding 7.25 Geselecteerde "twee cellen" gebeurtenisannotatie

Nadat het selectieproces is afgerond (of de procesresultaten in een vroeg stadium exact zijn), kunnen de embryo's worden toegewezen met kleuren die de beslissing aangeven.


Geen kleur betekent geen beslissing, groen betekent overdracht, rood betekent weggooien, blauw betekent bevriezen. De embryostaat "A" is inactief en wordt weergegeven in een donkerder lettertype; alle andere embryostaten zijn actief en worden normaal weergegeven in de onderstaande afbeelding.

De opdracht wordt gedaan op het pictogram rechtsboven (zie Afbeelding 7.26).

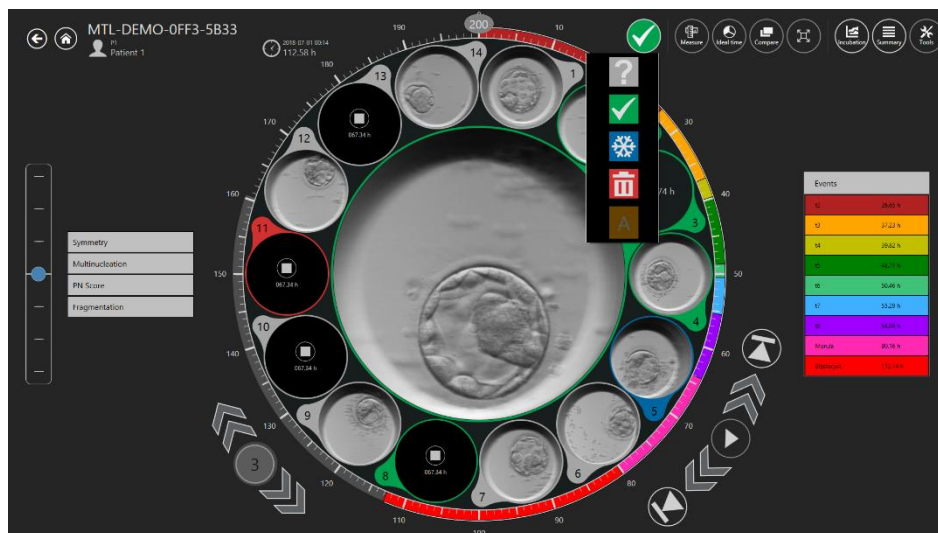

Afbeelding 7.26 De embryostatusselectie


Door erop te klikken ontstaat er een drop-down lijst waar de gewenste status gekozen kan worden. Er verschijnt een gekleurde ring om het embryopotje en ook de kleur van de positie op de schaalkaart verandert.

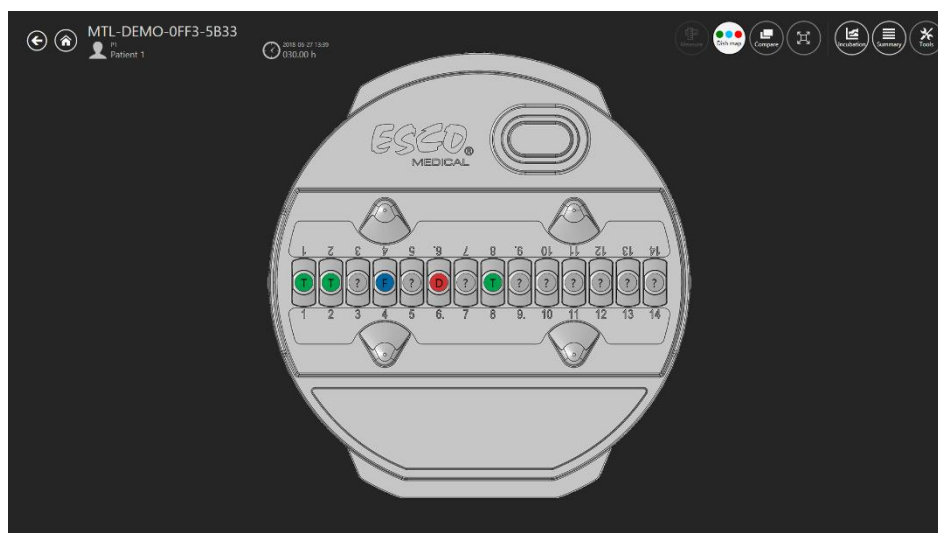

Afbeelding 7.27 De schaal-kaart

7.3.2.2 Embryo-meting

Er is een knop "Meten" in de rechterbovenhoek van de hoofdweergave van de time-lapse. Pas als de gewenste put zich in het "Actieve gebied" van de revolver bevindt, wordt de knop "Meten" geactiveerd. Anders is de knop inactief. Ook verandert de knop "Schotelkaart" in de knop "Ideale tijd".

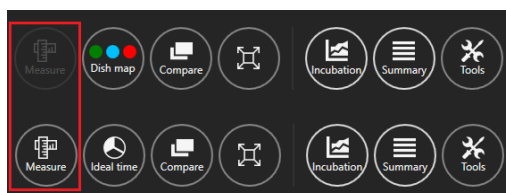

Afbeelding 7.28 Actieve en inactieve "Meten"-knop op de MIRI® TL Viewer


Nadat u op de knop "Meten" hebt gedrukt, verschijnen er drie nieuwe meetopties.



Afbeelding 7.29 Drie meetopties


Er is een mogelijkheid om te kiezen uit 2 type lijnen en 1 cirkelmeting. Het is ook mogelijk om de kleur voor de gewenste embryometing te selecteren voor eenvoudiger toewijzing.

 Wanneer de optie 3 metingen verschijnt, kan de gebruiker geen aantekeningen maken en zijn de vorige functies niet beschikbaar.

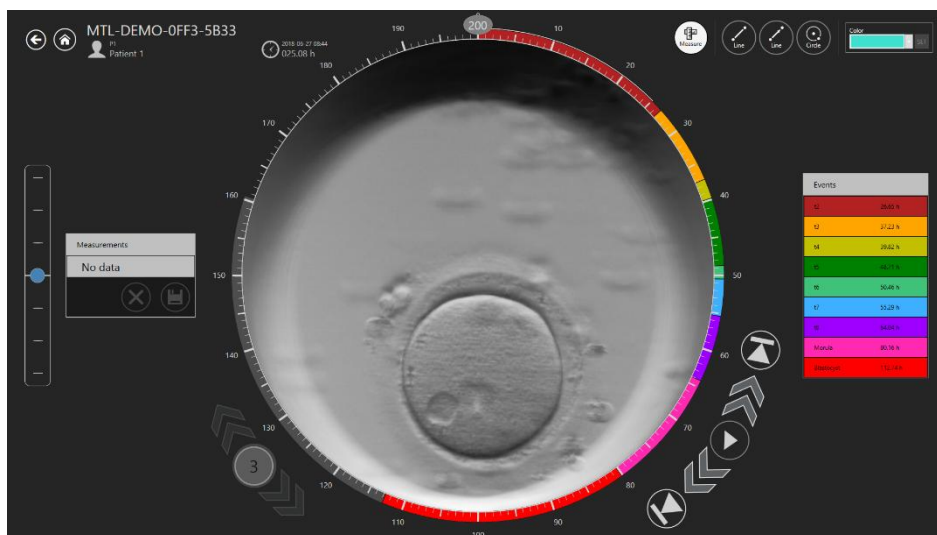


Afbeelding 7.30 Weergave volledige meting

In onderstaande afbeelding zijn 3 toegevoegde metingen te zien op het time-lapse beeld.

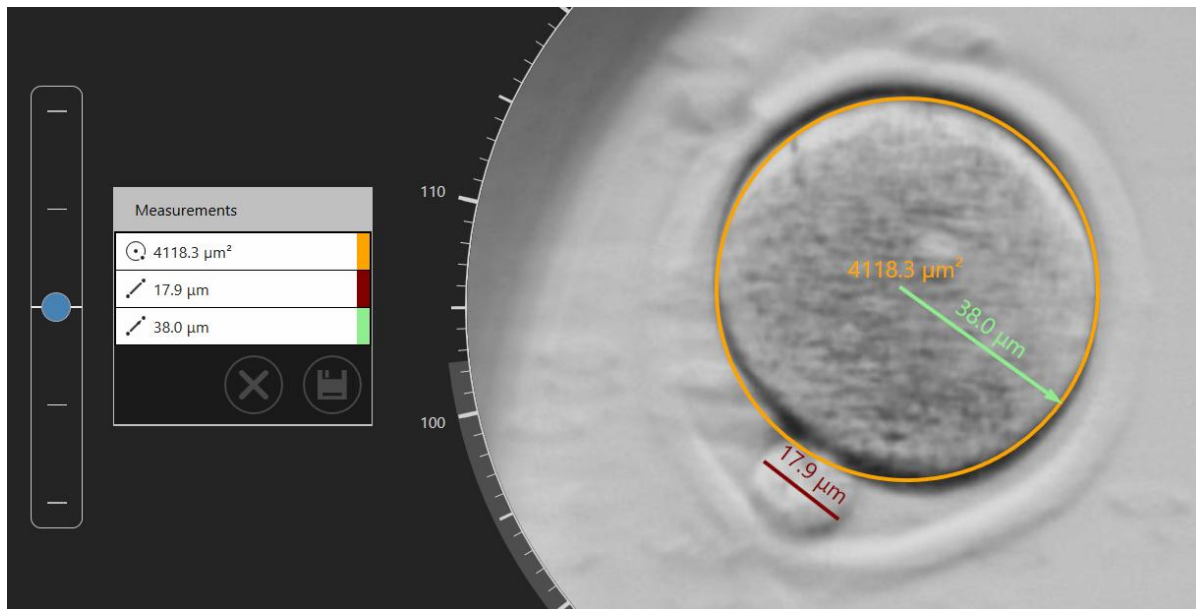

Afbeelding 7.31 Toegevoegde metingen op het time-lapse-beeld


Door te dubbelklikken op een ongewenste meting kan deze worden verwijderd. Door op de "x"-knop te drukken, worden **alle metingen** verwijderd.

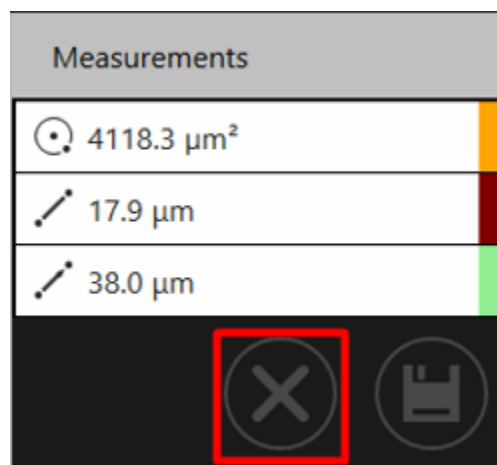

Afbeelding 7.32 De "x"-knop

Wanneer de metingen zijn opgeslagen, verschijnt "Metingen" aan de rechterkant van de hoofdtme-lapseweergave.

👉 Wanneer een meting wordt gemaakt of een bestaande wordt aangepast, kan de gebruiker de huidig weergegeven tijd niet wijzigen (d.w.z. de tijdschuifregelaar is inactief) totdat de meetwijzigingen zijn opgeslagen of geannuleerd.

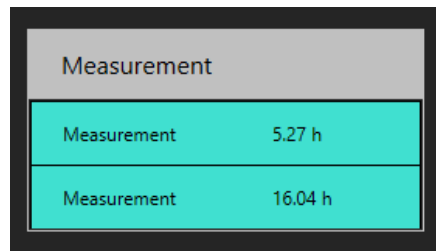


Measurement	
Measurement	5.27 h
Measurement	16.04 h

Afbeelding 7.33 Voorbeeld van metingen gedaan op een bepaald tijdstip


7.3.2.3 Schaal-kaart

De knop "Schaal-kaart" opent een weergave die de locatie van de embryo's in de CultureCoin®-schaal laat zien en de geselecteerde embryostatus. De schaal-kaart kan worden afgedrukt of gebruikt tijdens de overdracht of behandeling van de embryo's.

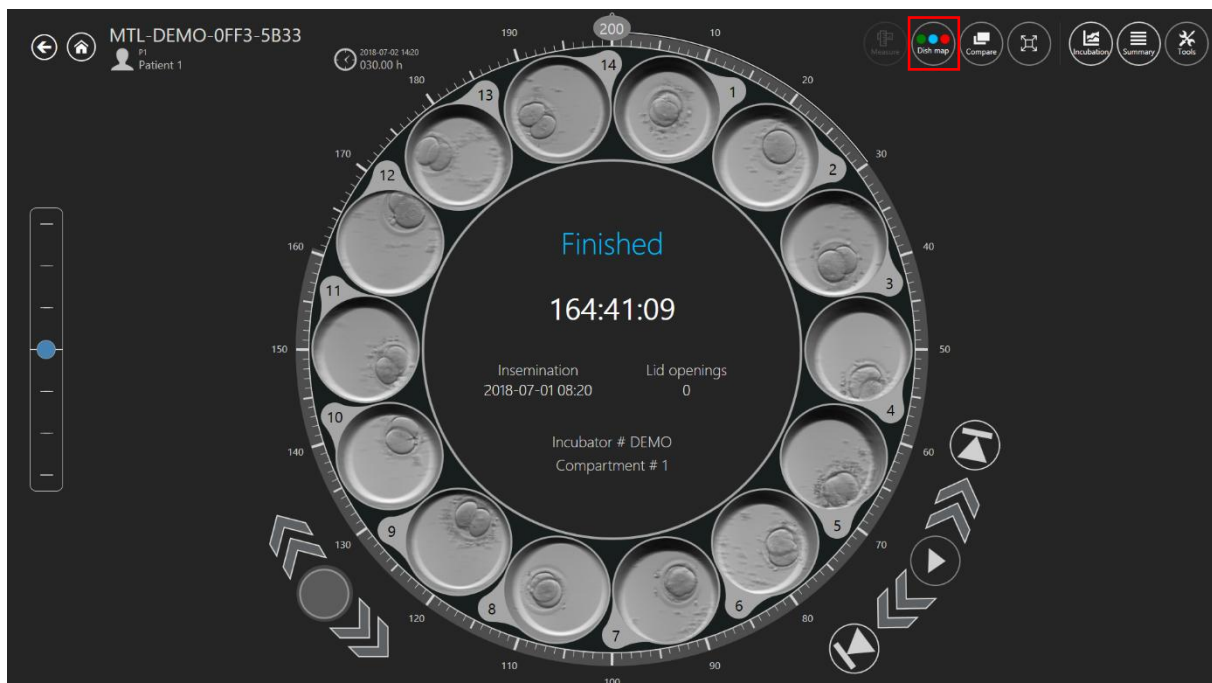


Afbeelding 7.34 "Schaal-kaart"-knop

👉 Zorg ervoor dat u de selectie van een put uit het "Actieve gebied" ongedaan maakt om de knop "Schaal-kaart" te zien.

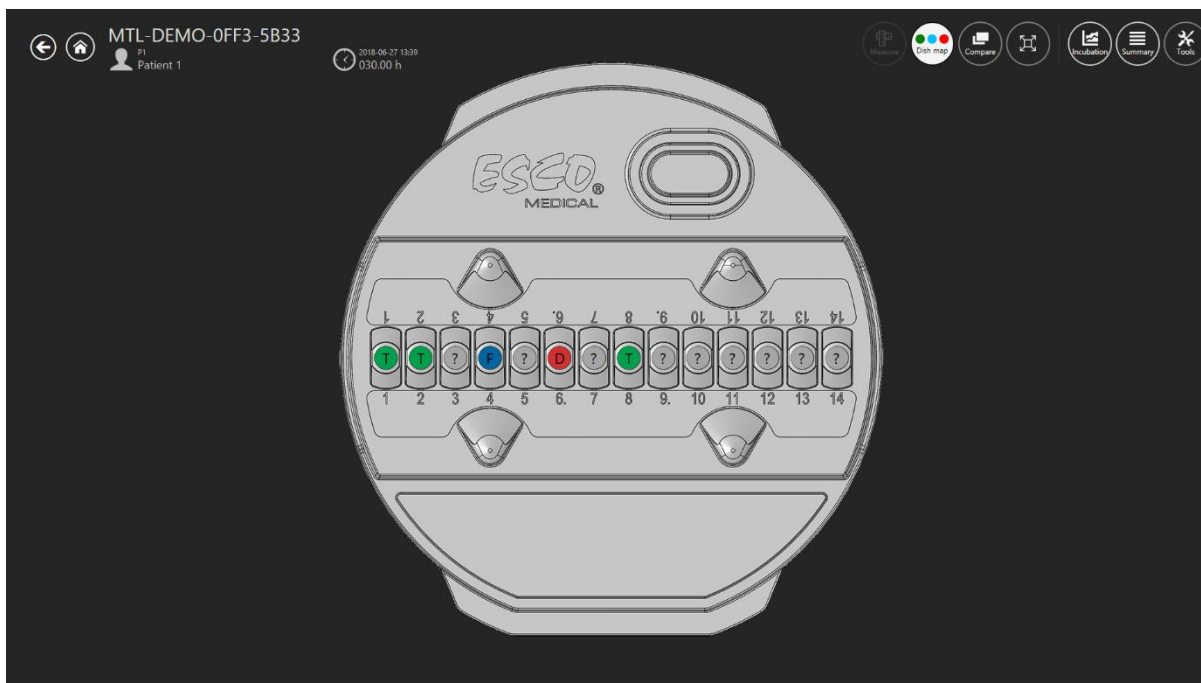

Afbeelding 7.35 De schaal-kaart

Groen (T) betekent dat het embryo geschikt is voor terugplaatsing, rood (D) voor weggooien, blauw (F) voor invriezen en het "?"-teken betekent dat de gebruiker de embryostaat niet heeft gekozen.

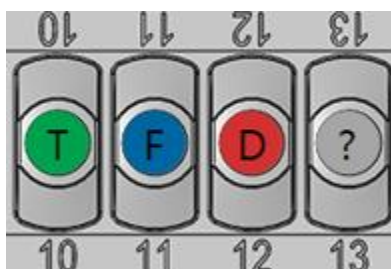


Afbeelding 7.36 Schaal-kaart annotatie-opties

7.3.2.4 Ideale tijd

De ideale tijdknop draait een ring rond het revolverwiel "AAN/UIT". Het kleurt de "Ideale" tijdsduur van een specifieke gebeurtenis (getoond in Afbeelding 7.37 hieronder).

Als de ideale tijd voor de t2-fase bijvoorbeeld 28 uur moet zijn, stopt de gekleurde lijn bij de tijdmарking voor 28 uur. Een snelle visuele vergelijking is nu mogelijk tussen de ideale en de geannoteerde parameter. Hoe beter de parameters overeenkomen, hoe idealer het embryo is.

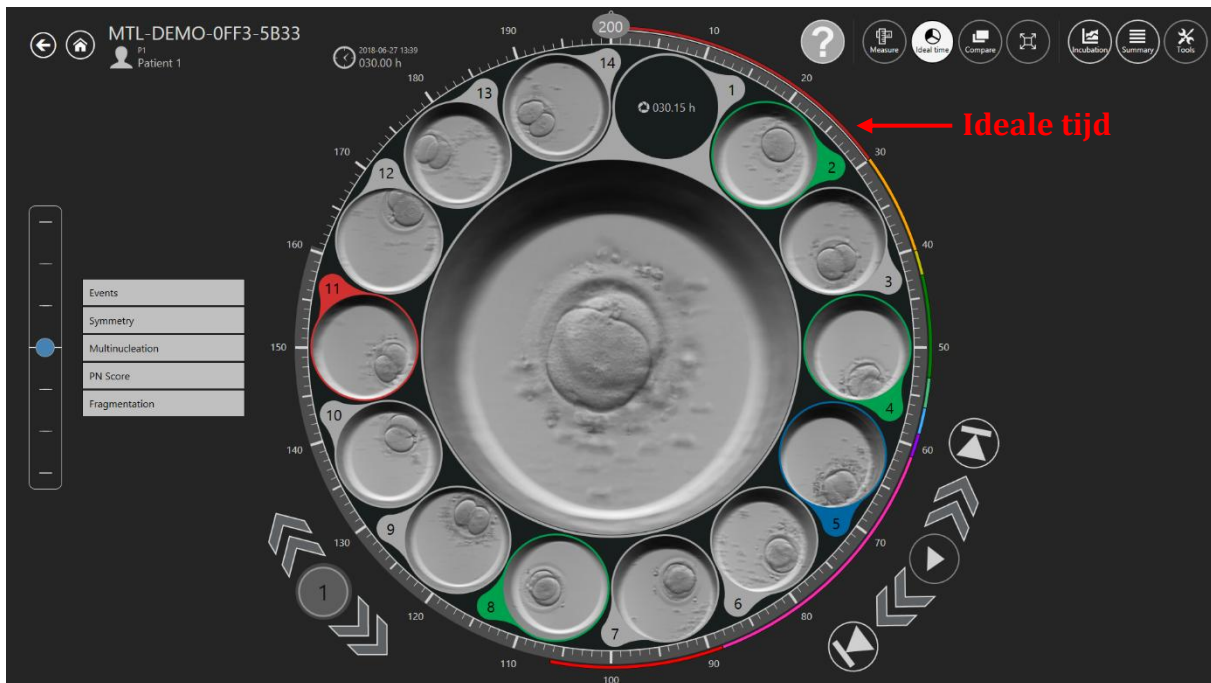


Afbeelding 7.37 De ideale tijden rond de revolver

De gebruiker kan zelf de ideale tijden instellen, omdat de parameters voor verschillende klinieken kunnen verschillen vanwege verschillende werkmethodologieën.

Raadpleeg paragraaf "7.6.1 Annotatie wijzigen/aanmaken" van de gebruikershandleiding voor meer informatie over het wijzigen van de ideale tijden van een specifieke gebeurtenis.

7.3.2.5 Embryovergelijking

De knop "Vergelijken" maakt het mogelijk om tot zes embryo's naast elkaar te maximaliseren voor een meer gedetailleerde vergelijking als het moeilijk is om een selectiebeslissing te nemen.

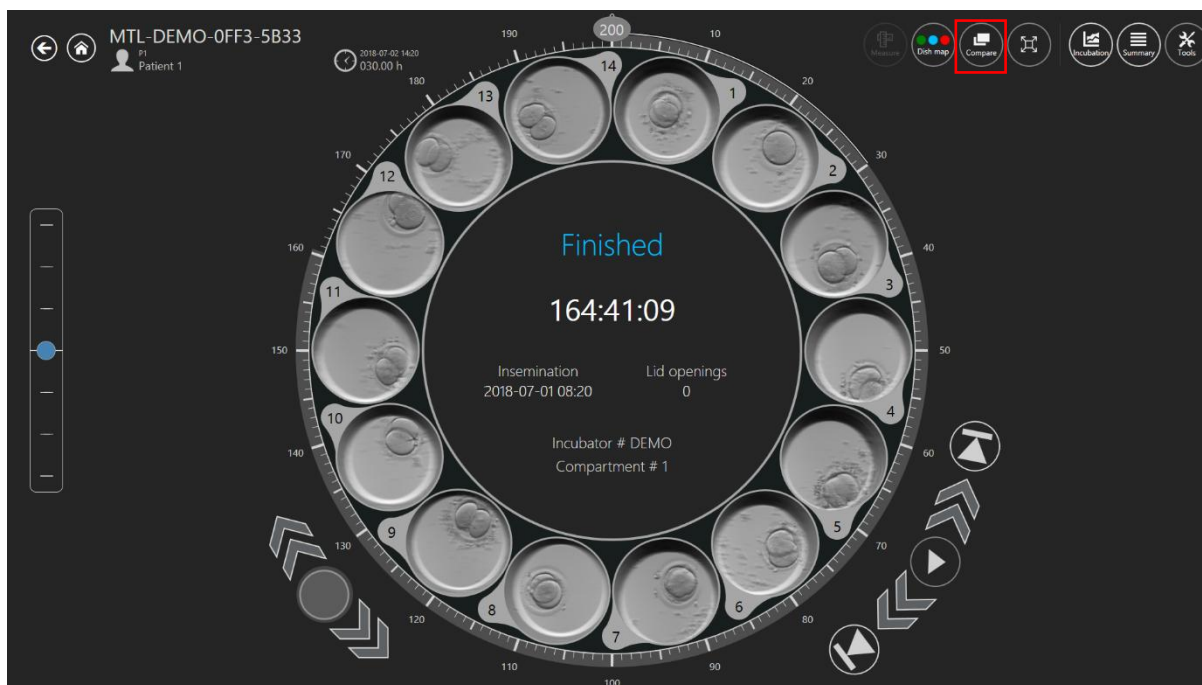

Afbeelding 7.38 "Vergelijken"-knop

Klik op de knop "Vergelijken" en selecteer vervolgens een put (als de put nog niet is geselecteerd). Het zal in het midden worden weergegeven. Kies dan een andere put waarin u geïnteresseerd bent uit de rest. Als u de tweede put selecteert, wordt de weergave Vergelijken weergegeven.

In de weergave Vergelijken is het mogelijk om extra putten te selecteren (maximaal 6 in totaal) om tegelijkertijd te vergelijken.

 Als u meer dan 2 putjes selecteert, wordt de totale grootte van de put kleiner.



Afbeelding 7.39 Vergelijkingsweergave van twee embryo's



Afbeelding 7.40 Vergelijkingsweergave van meerdere embryo's


De videospelers kunnen onafhankelijk van elkaar worden afgespeeld of worden gekoppeld door op de knop "Koppelen" rechtsonder in het scherm te drukken. Na het koppelen van de video's zijn de videocontroles alleen beschikbaar bij de 1e put.



Afbeelding 7.41 De gekoppelde weergave "Vergelijken"

7.3.2.6 Beeldmaximalisatie


De knop "Maximaliseren" plaatst de geselecteerde put in het midden van de revolver voor een duidelijkere weergave van een bepaalde put. Linksonder bevinden zich de navigatiebedieningselementen voor de put. Daar wordt een nummer van de momenteel geselecteerde put weergegeven, evenals pijlen waarmee de gebruiker naar de volgende/vorige put van de CultureCoin® kan navigeren.

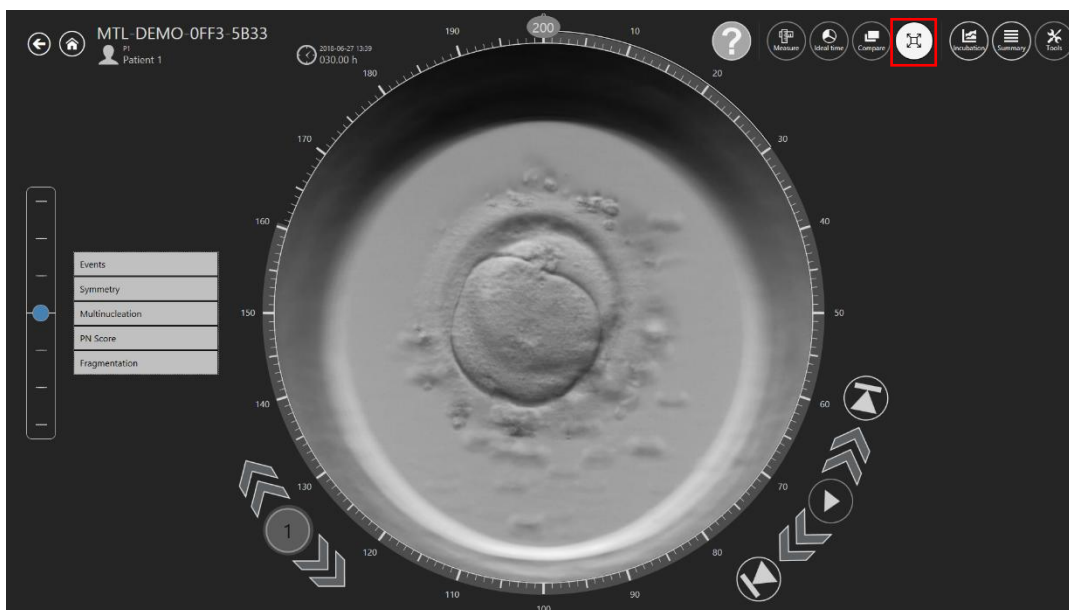

Afbeelding 7.42 De knop "Maximaliseren" en de daaropvolgende weergave

7.3.2.7 Incubatiegegevens loggen


De knop "Incubatie" toont de incubatiegegevens voor de MIRI® IVF-incubator met meerdere kamers uit de TL-familie waar de CultureCoin® was of is.

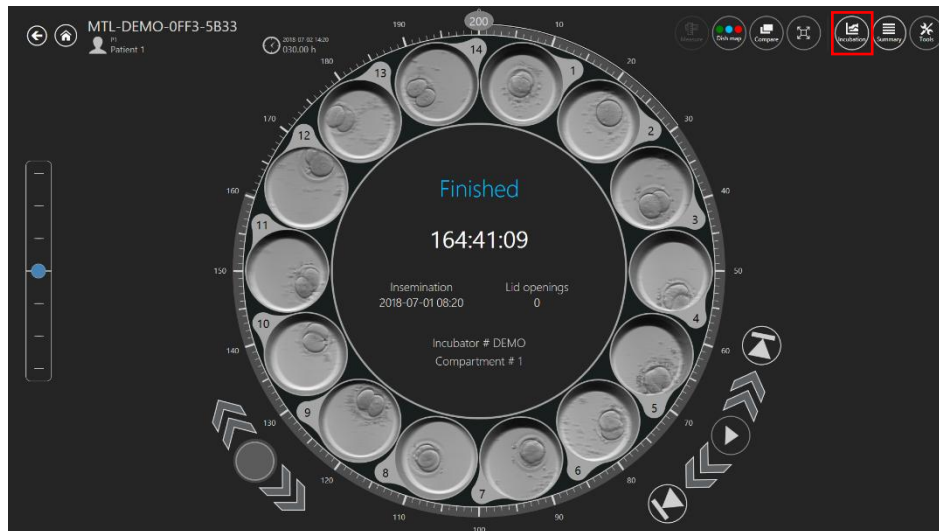

Afbeelding 7.43 Knop "Incubatie"

Incubatiegegevens worden hier weergegeven vanaf het moment dat de time-lapse werd uitgevoerd.


De gebruiker kan voor het incubatiegegevenslog kiezen tussen temperatuur, CO₂, O₂ en alarmen in de linker bovenhoek.

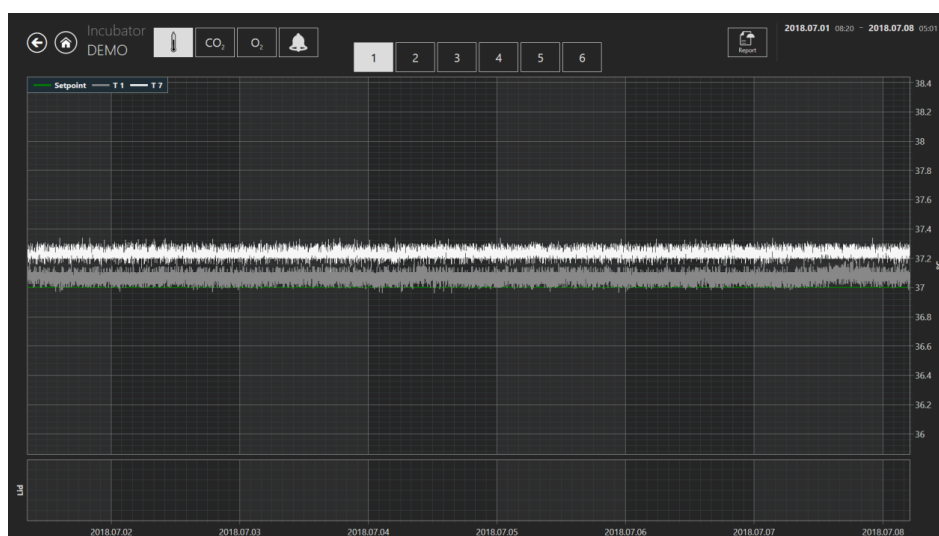

Afbeelding 7.44 Weergave temperatuurincubatie


Bovenaan staan knoppen van 1 tot en met 6, waarmee de gebruiker de gewenste kamer kan kiezen. In dit geval wordt kamernummer 1 geselecteerd. Het toont het instelpunt naast de temperatuurwaarden van de T1- en T7-zones.

Een zoomfunctie is beschikbaar door het scherm aan te raken en met de vinger (of met een computermuis) naar links over het gebied te vegen waarop moet worden ingezoomd. Door op de uitzoomknop te drukken (gemarkeerd met een rode rechthoek) springt u terug naar de volledige weergave.

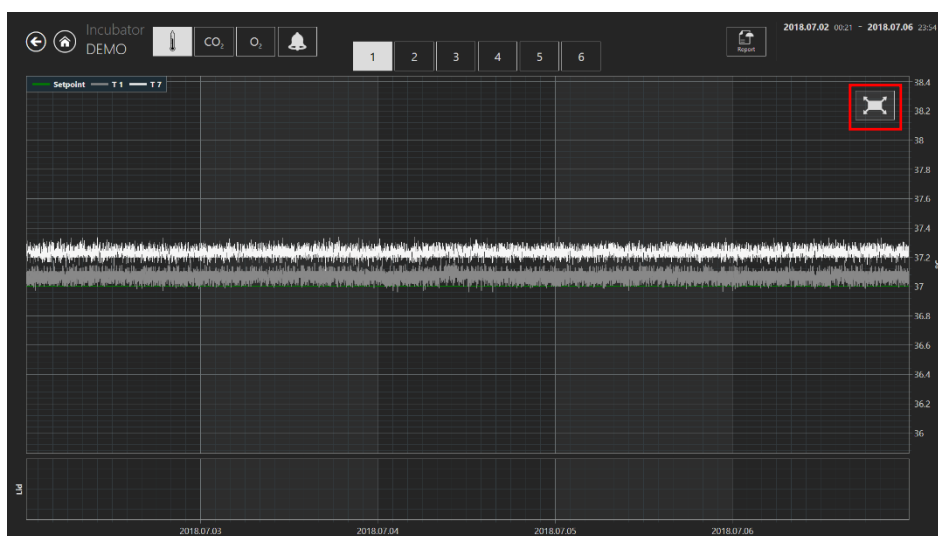

Afbeelding 7.45 "Reset"-knop

Door op de CO₂-knop te drukken, gaat u van de temperatuurgegevensweergave naar de CO₂-gasgegevensweergave.

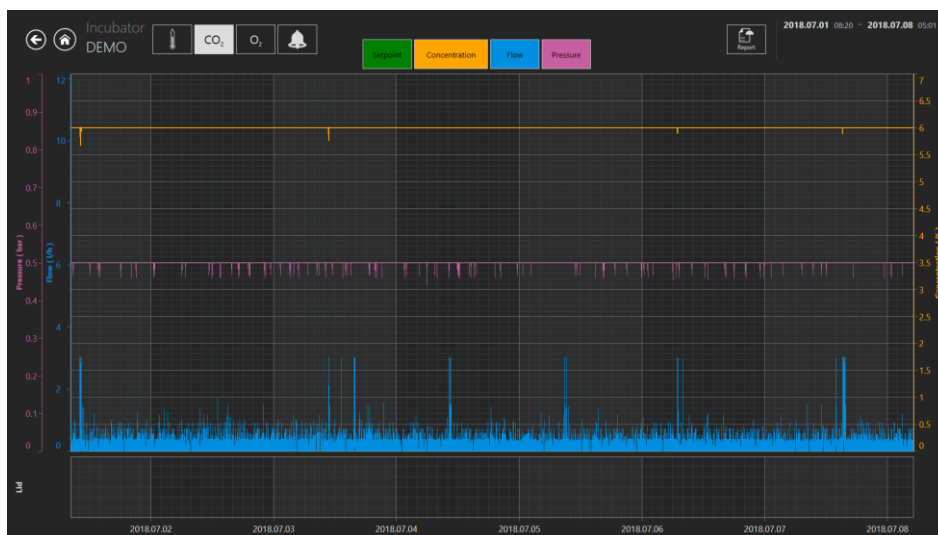

Afbeelding 7.46 De CO₂-gegevensweergave

De gebruiker kan de historische gegevens van het instelpunt, de concentratie, het debiet en de druk van de CO₂-gasconcentratie zien.

Door op de O₂-knop te drukken, gaat u van de weergave met CO₂-gasgegevens naar de weergave met O₂-gasgegevens.



Afbeelding 7.47 De O₂-gegevensweergave

De gebruiker kan historische gegevens zien van het instelpunt van de O₂-gasconcentratie, de concentratie, het N₂-gasdebiet en de gasdruk.

De knop "Alarm" zal de grafische alarmweergave oproepen.




Afbeelding 7.48 De grafische weergave "alarm"

Met de knop "Rapporteren" wordt de rapportmodus weergegeven. Alle lopende parameters

kunnen eenvoudig worden gedocumenteerd en afgedrukt als een rapport of worden geëxporteerd naar pdf, Excel of Word voor gemakkelijke naleving van ISO-kwaliteitsbeheer. (raadpleeg voor meer informatie paragraaf "7.3.2.9 Exportfunctie" in de gebruikershandleiding).


7.3.2.8 Overzichtswaergave

De overzichtswaergave bestaat uit twee verschillende grafische waergaven die de annotaties van de gebruiker in directe vergelijking tonen.

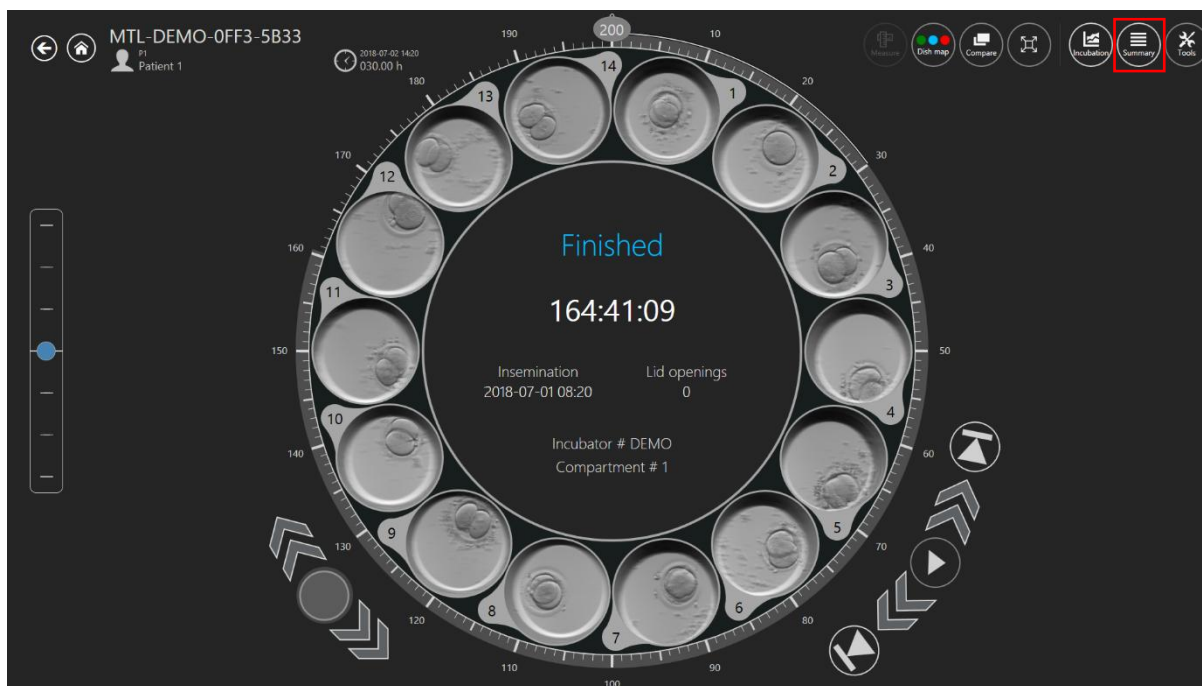


Afbeelding 7.49 "Overzicht"-knop

In de eerste waergave die wordt geopend, worden alle actieve putjes weergegeven als verschillende lijnen die van boven naar beneden zijn uitgelijnd in oplopende volgorde met hun nummers aan de linkerkant. In een voorbeeld (zie Afbeelding 7.50) is putje nummer 1 de eerste. Annotaties voor putje nummer 1 worden horizontaal afgebeeld en onderscheiden door verschillende kleuren. Na putje nummer 1 (die naar beneden gaat) komt putje nummer 2 en de annotaties voor dat putje zijn op dezelfde manier afgebeeld. Het principe is ook van toepassing op andere putjes.

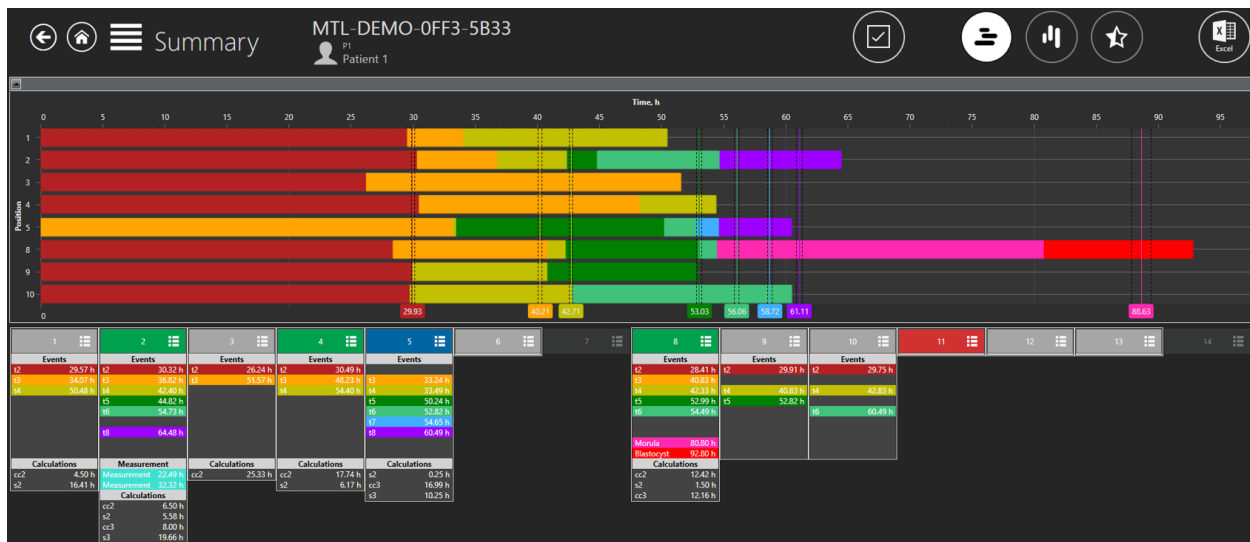

Afbeelding 7.50 Alle geselecteerde schaalposities in een overzichtswaergave


De ideale tijden worden weergegeven als verticale lijnen met een tag erop en in kleur die ze voorstelt.

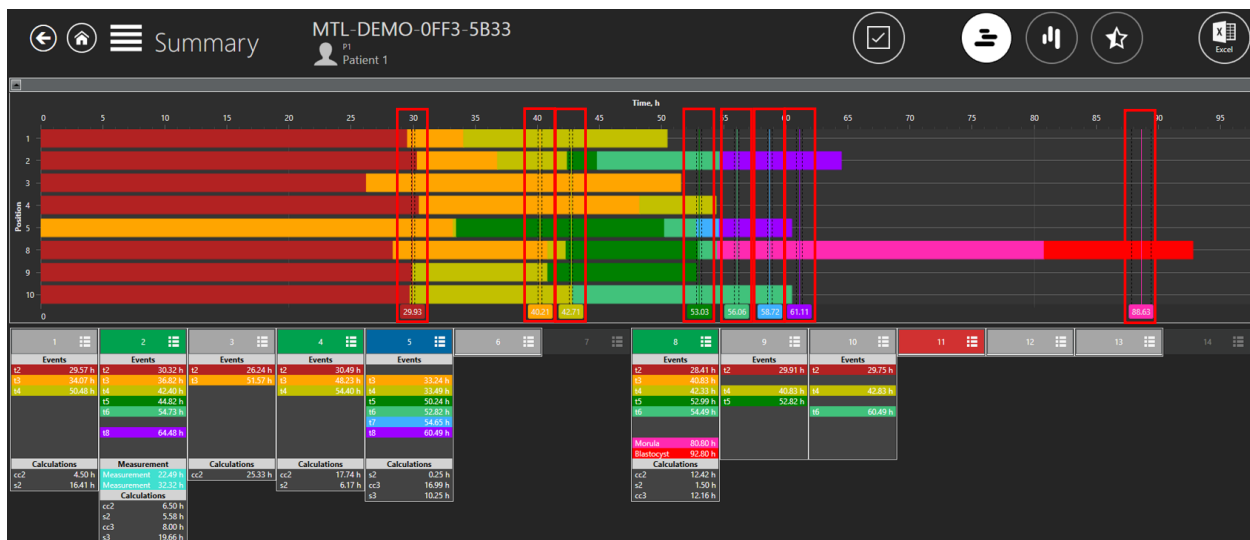


Afbeelding 7.51 Ideale tijden

De putnummers worden vermeld onder de grafische lijnen bovenaan de verschillende vakken waar de geannoteerde gebeurtenissen worden weergegeven in tekst en in verschillende kleuren verticaal gestapeld.

Het is mogelijk om alle schaalposities te selecteren/deselecteren door op een vinkje te klikken in een overzichtswaergave.

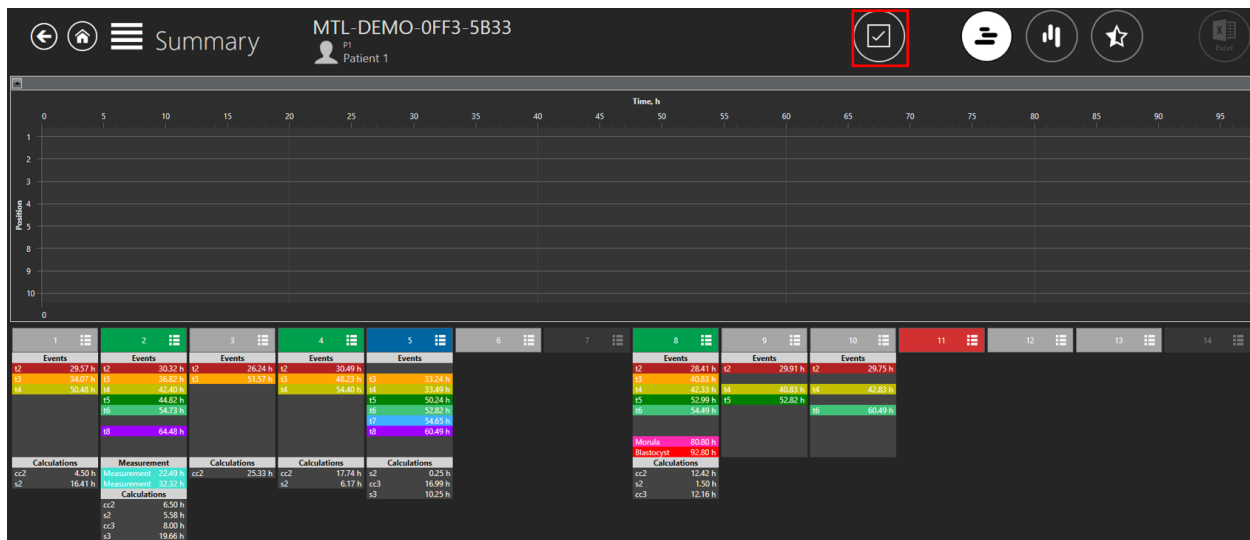

De weergave van de put op de grafische lijn kan worden in- of uitgeschakeld door ergens op de weergegeven annotatie-informatie van de gewenste put te drukken. Wanneer geselecteerd, heeft het schaalvak een witte omlijning. Informatie in vakken zonder witte omlijning wordt niet weergegeven in de horizontale weergave.

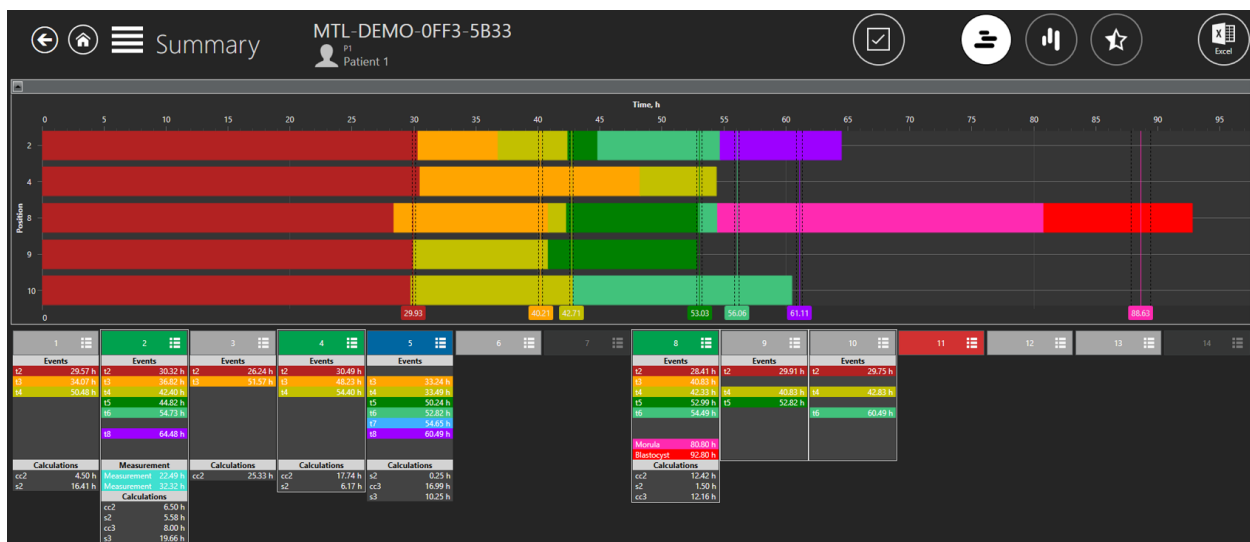


Annotaties van gebeurtenissen zijn uitgelijnd om vergelijking te vergemakkelijken, maar verschillende metingen en berekeningen afgeleid van annotaties worden normaal vermeld (d.w.z. niet uitgelijnd).

1	2	3	4	5
Events	Events	Events	Events	Events
t2 29.57 h	t2 30.32 h	t2 26.24 h	t2 30.49 h	t3 33.24 h
t3 34.07 h	t3 36.82 h	t3 51.57 h	t3 48.23 h	t4 33.49 h
t4 50.48 h	t4 42.40 h		t4 54.40 h	t5 50.24 h
	t5 44.82 h			t6 52.82 h
	t6 54.73 h			t7 54.65 h
	t8 64.48 h			t8 60.49 h
Calculations	Measurement	Calculations	Calculations	Calculations
cc2 4.50 h	Measurement 22.49 h	cc2 25.33 h	cc2 17.74 h	s2 0.25 h
s2 16.41 h	Measurement 32.32 h		s2 6.17 h	cc3 16.99 h
	Calculations			s3 10.25 h
	cc2 6.50 h			
	s2 5.58 h			
	cc3 8.00 h			
	s3 19.66 h			

Afbeelding 7.54 Gebeurtenisannotaties zijn uitgelijnd

Het is mogelijk om in deze weergave met de statusselectie te werken. Als er op putnummer 1 wordt geklikt, kan de gebruiker de selectiestatus voor het putje instellen in een lijst die wordt geopend (er moet op het veld met het putnummer worden geklikt, niet eronder waar de opgesomde annotatiegegevens te vinden zijn).

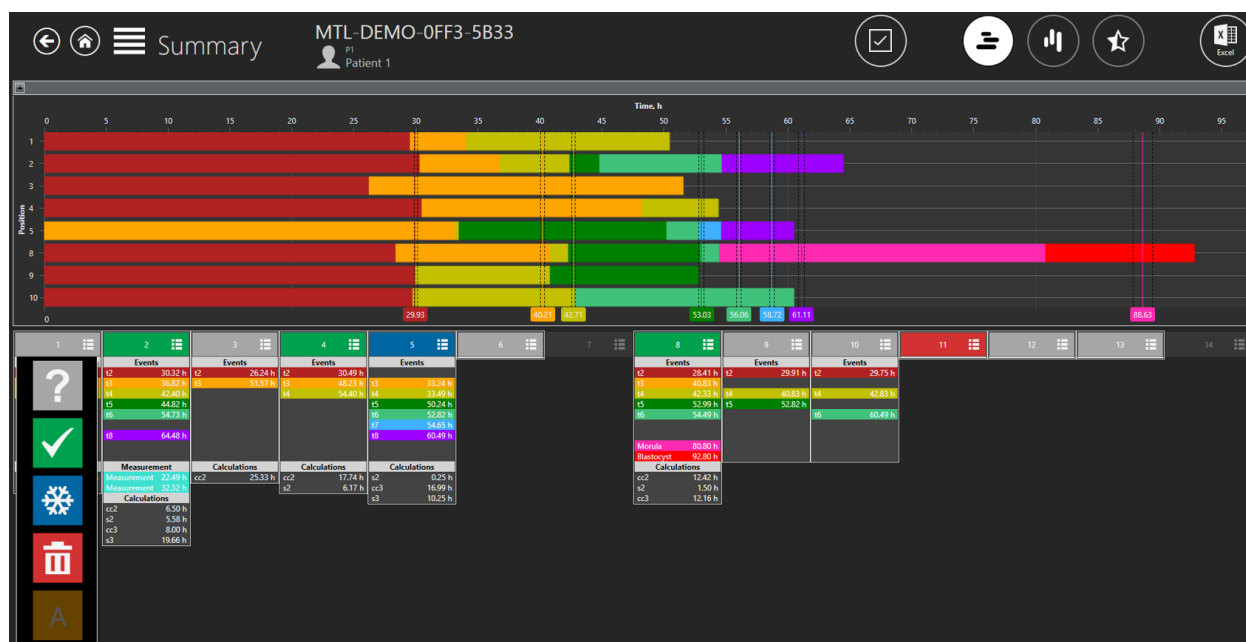


Afbeelding 7.55 Optie voor selectie van schaalstatus in een verticale overzichtswegave

Hier kan de status van de lijst worden ingesteld. Het verandert de kleur in de annotatiweergave en de schaal-kaart. De status "A" is in de instellingen gedeactiveerd, dus de afbeelding heeft een donkerder lettertype. De gebruiker kan het niet selecteren.

De tweede overzichtsweergave toont de gebeurtenissen verticaal in het bovenste gedeelte. Onder elke gebeurtenis wordt de afwijking van de ideale tijd weergegeven voor elk van de 14 putjes. Als de afwijking > 100% is, wordt de lijn rood.

 Op dit moment is het niet mogelijk om gemakkelijk te onderscheiden welke afwijkingen bij welke putjes horen. Over het algemeen worden afwijkingen voor elk van de 14 putjes van links naar rechts weergegeven.

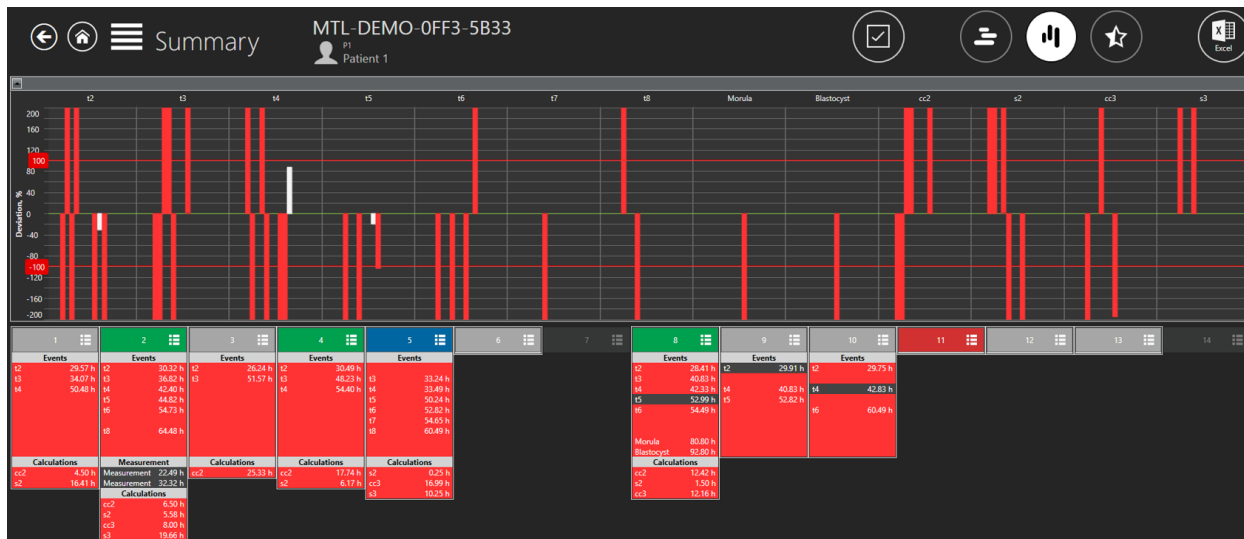


Afbeelding 7.56 Verticale overzichtsweergave

Nogmaals, de grafische weergave van de put kan "AAN/UIT" worden gezet door ergens op de vermelde annotatie-informatie te drukken.

In dit geval zijn er veel gevallen waarin de afwijking 200% bereikt, daarom is het verschil tussen de geannoteerde en de ideale tijd 200%.

Het is mogelijk om in deze weergave met de statusselectie te werken. Als er op putnummer 1 wordt geklikt, kan de gebruiker de selectiestatus voor het putje instellen in een lijst die wordt geopend (er moet op het veld met het putnummer worden geklikt, niet eronder waar de opgesomde annotatiegegevens te vinden zijn).

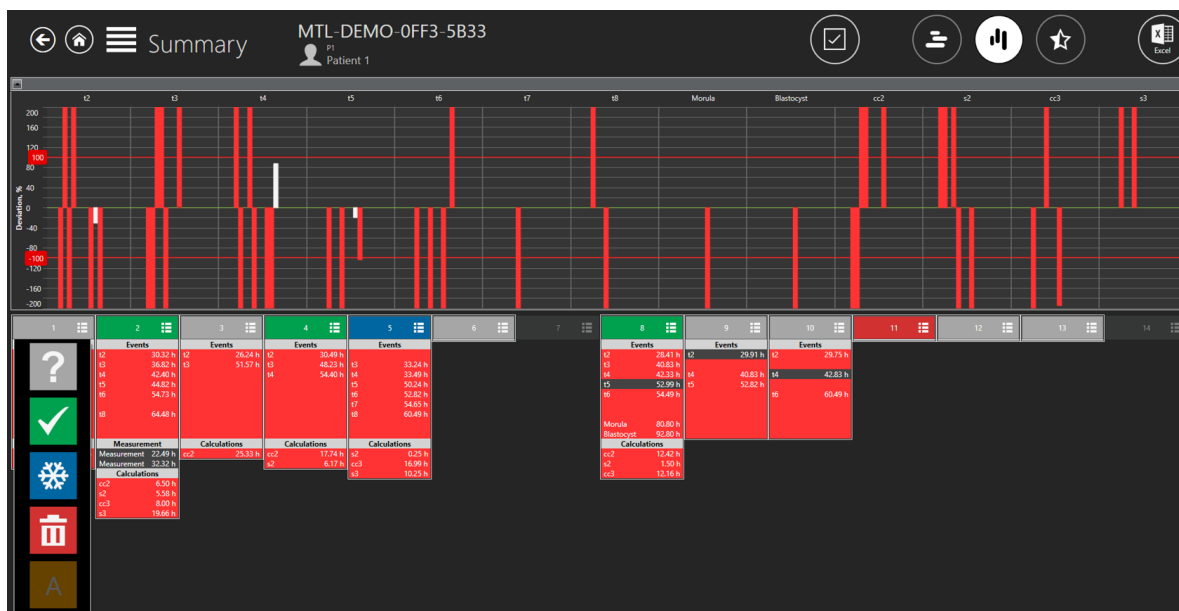


Afbeelding 7.57 Optie voor selectie van schaalstatus in een horizontale overzichtswaargave


Hier kan de status worden ingesteld. Het verandert de kleur in de annotatiweergave en de schaal-kaart. De status "A" is in de instellingen gekozen om inactief te zijn, dus de afbeelding heeft een donkerder lettertype. De gebruiker kan het niet selecteren.

7.3.2.8.1 Overzichtswaargave embryoscoringmodel

De gebruiker heeft toegang tot de overzichtswaargave van het embryoscoringmodel door op een "Ster"-knop bovenaan de overzichtswaargave te drukken.

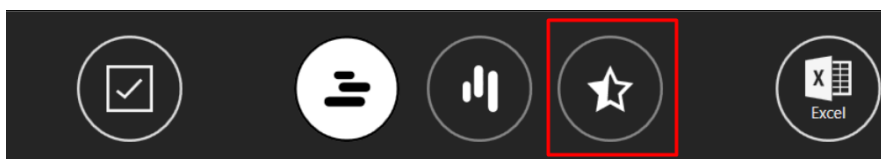


Afbeelding 7.58 "Ster"-knop in een overzichtswaargave

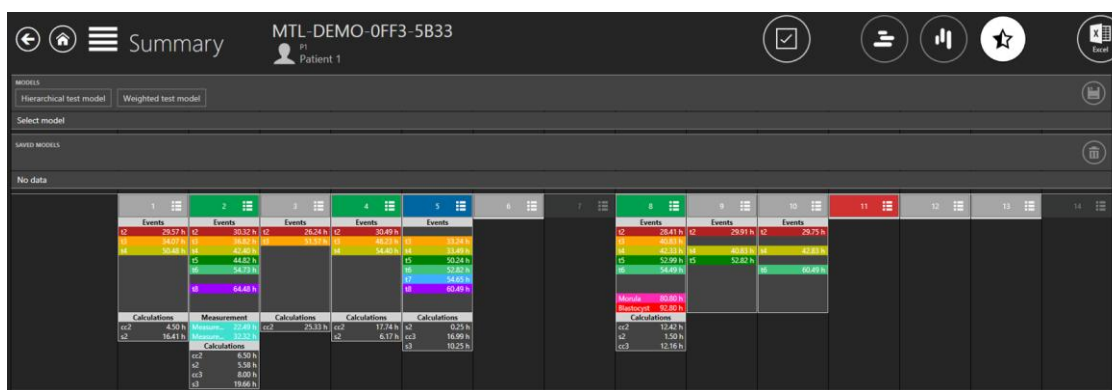

Afbeelding 7.59 Overzichtswaargave van embryoscoringmodel


Scoremodel koppelen aan een time-lapse

Boven aan het scherm kan de gebruiker alle actieve embryoscoremodellen zien die zijn gemaakt in het menu "Instellingen".

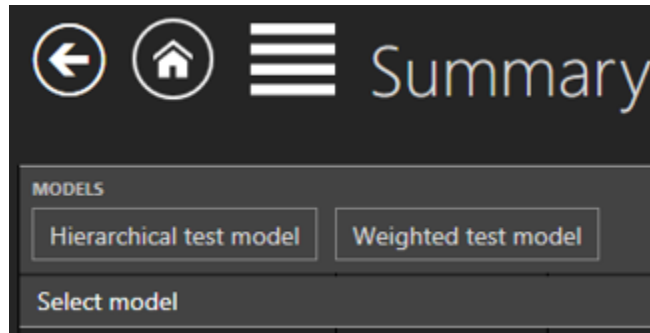


Afbeelding 7.60 Lijst van alle gecreëerde embryoscoremodellen

Het geselecteerde embryoscoremodel wordt wit wanneer het wordt geselecteerd.

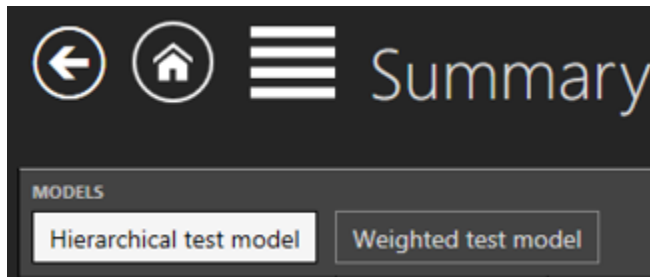

Afbeelding 7.61 Geselecteerd "Hiërarchisch testmodel"

Wanneer het gewenste embryoscoremodel is geselecteerd, wordt de evaluatie van het embryomodel weergegeven en wordt de knop "Opslaan" actief.

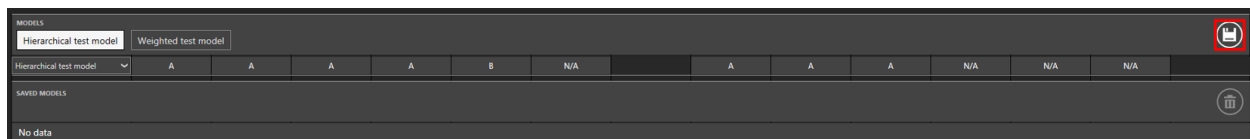

Afbeelding 7.62 "Opslaan"-knop

Als hierop gedrukt wordt, wordt het embryoscoremodel gekoppeld aan een time-lapse en wordt het onder de lijst met modellen geplaatst.

 De wijzigingen zijn niet van toepassing op een opgeslagen scoremodel als het scoremodel is gewijzigd in de weergave "Instellingen".

Gewogen scoremodel

Als er geen annotaties voor de putjes zijn, wordt "n.v.t." geschreven volgens het putnummer.

SAVED MODELS [2022-04-21 14:29]									
Weighted test model	N/A	N/A	N/A	N/A	6.33416666666667	N/A	N/A	N/A	2.16694444444445

Afbeelding 7.65 Resultaten van alle annotaties met het gekoppelde gewogen scoremodel

Zoals te zien is in de afbeelding hierboven, zijn er enkele irrationele resultaten. De gebruiker kan de formule van het gewogen scoremodel in de weergave "Instellingen" wijzigen om het resultaat af te ronden (fig. 7.66 laat zien hoe het resultaat wordt afgerond op 3 getallen na de komma).

Model

Variables

Active

☐



Name

Weighted test model

Model type

Hierarchical

Weighted

Score

roundn(events_t4 - events_t3, 3)

Afbeelding 7.66 Gewijzigd gewogen scoremodel om 3 getallen na de komma weer te geven

Zoals te zien is in de onderstaande afbeelding, is het opgeslagen model niet gewijzigd, maar de lijst "MODELLEN" toont gewijzigde resultaten met 3 getallen na de komma.

MODEL

Hierarchical test model

Weighted test model

Weighted test model	N/A	N/A	N/A	N/A	6.334
---------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SAVED MODELS

[2022-04-21 14:29]

Weighted test model	N/A	N/A	N/A	N/A	6.33416666666667
---------------------	-----	-----	-----	-----	------------------

Afbeelding 7.67 Resultaten van alle annotaties met het gekoppelde gewogen scoremodel



De wijzigingen zijn niet van toepassing op een opgeslagen scoremodel als het scoremodel is gewijzigd in de "Instellingen".

Er zijn wiskundige bewerkingen die het gewogen scoremodel ondersteunt:

1. Basisbewerkingen:

- Optellen: "+"
- Aftrekken: "-"
- Vermenigvuldigen: "*"
- Delen: "/"
- Modulo: "%"
- Machtsverheffing: "^"
- Negatie: "!"

2. Booleaanse bewerking:

- Minder dan: "<"
- Minder dan of gelijk aan: "<=" of "≤"
- Meer dan: ">"
- Meer dan of gelijk aan: ">=" of "≥"
- Gelijk aan: "=="
- Niet gelijk aan: "!=" of "≠"

Een lijst van alle standaardfuncties die het gewogen scoremodel ondersteunt, is te zien in tabel 7.1.

Tabel 7.1 Standaardfuncties

Functie	Argumenten	Beschrijving
sin	sin(A1)	Sinus
cos	cos(A1)	Cosinus
asin	asin(A1)	Arcsinus
acos	acos(A1)	Arccosinus
tan	tan(A1)	Tangens
cot	cot(A1)	Cotangens
atan	atan(A1)	Arctangens
acot	acot(A1)	Arcocotangens
loge	loge(A1)	Natuurlijk logaritme
log10	log10(A1)	Gemeenschappelijk logaritme
logn	logn(A1, A2)	Logaritme
sqrt	sqrt(A1)	Vierkantswortel
if	if(A1, A2, A3)	If-functie


Functie	Argumenten	Beschrijving
max	max(A1, ..., An)	Maximum
min	min(A1, ..., An)	Minimum
avg	avg(A1, ..., An)	Gemiddelde
mediaan	mediaan(A1, ..., An)	Mediaan
omtrek	omtrek(A1)	Omtrek
omtrekn	omtrek(A1,N)	Rond getal af op N cijfers na komma
willekeurig	willekeurig()	Willekeurig

7.3.2.9 Exportfunctie

Een video exporteren:

Wanneer op de knop "Exporteren" wordt geklikt, worden drie opties weergegeven. De gebruiker kan kiezen tussen het maken van de video, de afbeelding of het rapport. In dit geval moet de gebruiker op de knop "Video" drukken.

⚠️ Zorg ervoor dat eventueel toegepaste beeldvoorinstellingen worden uitgeschakeld voordat u beelden of video's van geselecteerde embryo's exporteert. Als een beeldvoorinstelling ingeschakeld blijft, bevat de geëxporteerde video of het geëxporteerde beeld deze beeldvoorinstelling.

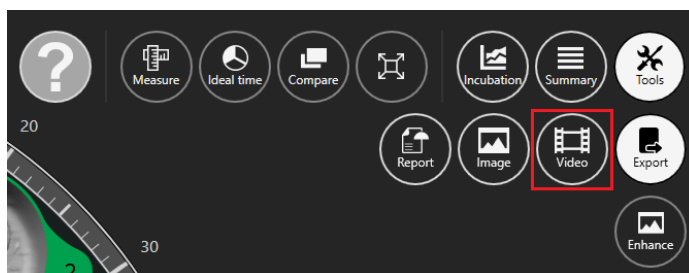


Afbeelding 7.68 Het beeld "Exporteren"-optie

Wanneer de gebruiker de video-optie selecteert, verandert de weergave in de videoselectieweergave. Hier zijn een schuifregelaar voor het brandpuntsvlak, de revolverweergave, het venster met de doelmap, de logo-optie en het statusvak te zien.



Afbeelding 7.69 De video-exportweergave

Door op het gewenste putnummer te klikken, kan de gebruiker de time-lapsevideo selecteren die hij wil exporteren. Het is mogelijk om enkele of meerdere putjes te selecteren voor export. In de onderstaande afbeelding zijn de putjes 1- 3 geselecteerd.

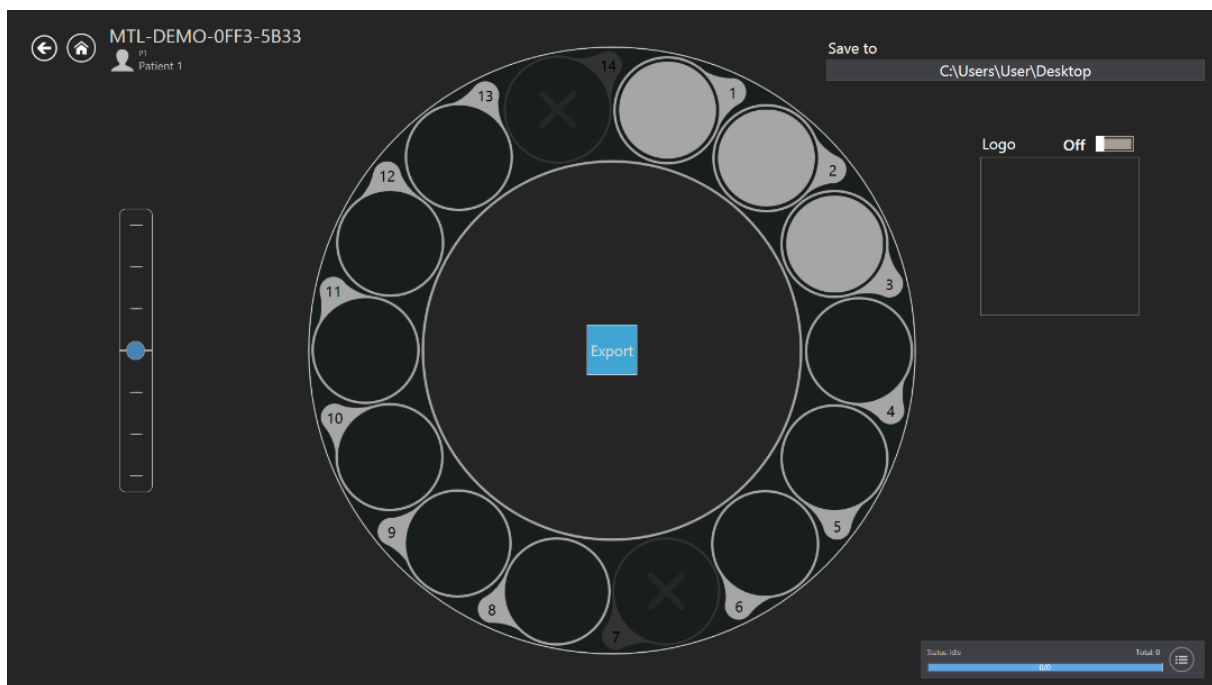

Afbeelding 7.70 De video-exportweergave


Klik op het vak "Opslaan in" in de rechterbovenhoek om de exacte plaats te selecteren waar de geëxporteerde video('s) moet(en) worden opgeslagen. Het resulterende geëxporteerde AVI-bestand kan worden afgespeeld in de Open-Source freeware VLC-speler

(<http://www.videolan.org/vlc/>). Door codec-beperkingen van Microsoft werkt Windows Media Player niet.

Een logo kan aan de film worden toegevoegd door de schuifregelaar naar één te verplaatsen. In het vierkant onder "Logo", wordt "Afbeelding selecteren" weergegeven en alleen door te klikken is het mogelijk om een logobestand te selecteren.


Nadat de gewenste putjes zijn geselecteerd, klikt u op de knop "Exporteren". De exportstatus wordt rechtsonder in het scherm bijgewerkt.

 Het is mogelijk om een video in één brandpuntsvlak tegelijk te exporteren. Om in meerdere brandpuntsvlakken te exporteren, moeten telkens aparte video's worden geëxporteerd met het nieuwe brandpuntsvlak van tevoren geselecteerd.

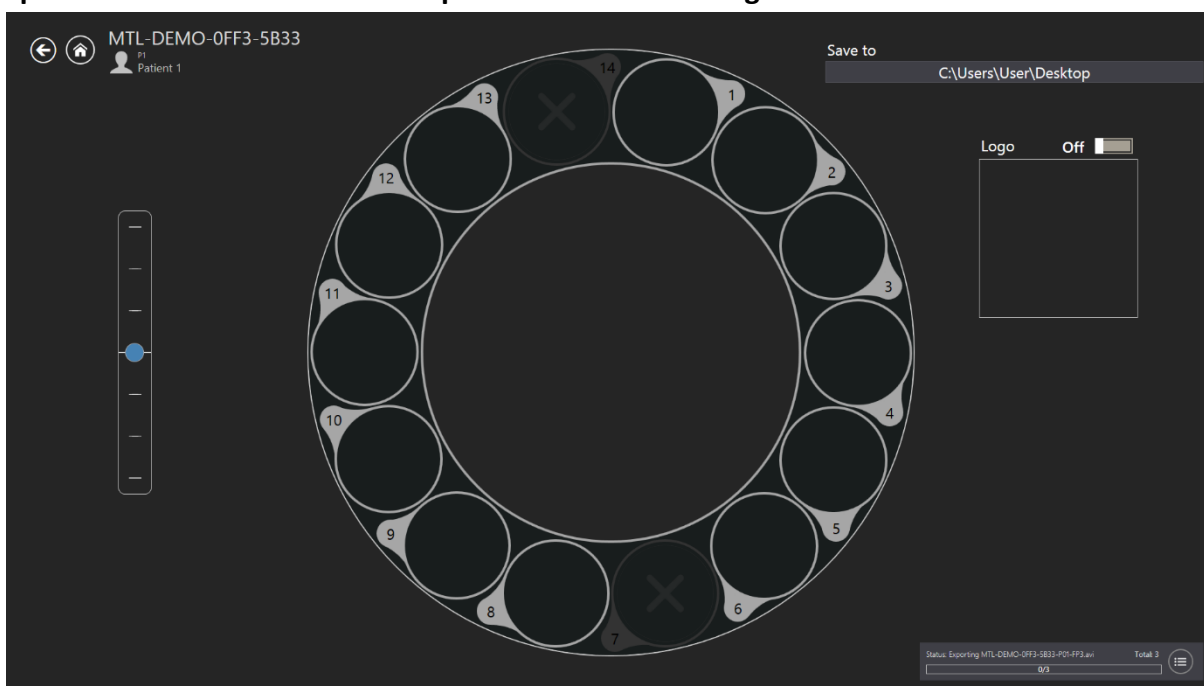


Afbeelding 7.71 Exportstatus

Klik op de speciale knop om het vak Exportstatus uit te vouwen. Hierdoor kan de gebruiker de exportstatus nauwkeuriger observeren. Bovendien kan de gebruiker het exportproces voortijdig beëindigen voor alle of geselecteerde video's door op de daarvoor bestemde knoppen te klikken.

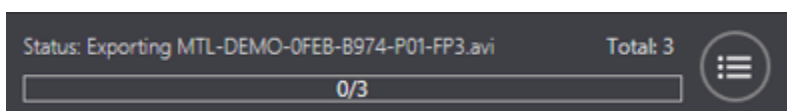


Afbeelding 7.72 Vak Exportstatus

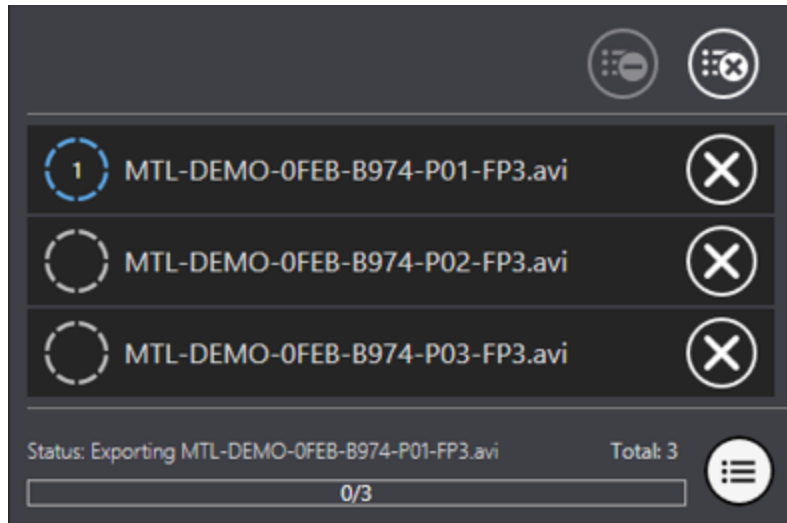


Afbeelding 7.73 Vak Exportstatus uitgevouwen

Nadat de video('s) zijn geëxporteerd, wordt de status bijgewerkt. Door op de daarvoor bestemde knoppen te klikken, kan de gebruiker direct naar de map navigeren waar de video('s) zijn opgeslagen of alle of geselecteerde video's verwijderen.

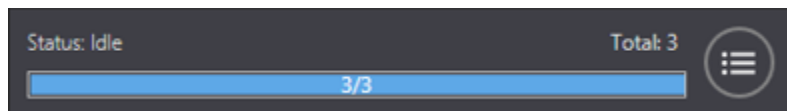

Afbeelding 7.74 Exporteren voltooid

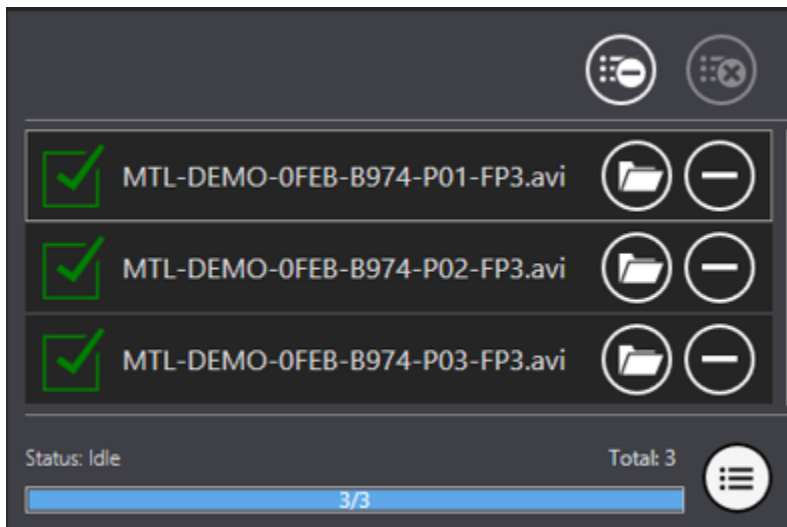

Afbeelding 7.75 Vak Exportstatus met exporteren voltooid

 De foto's voor de video's in de MIRI® IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de TL-familie zijn opgenomen in een hogere resolutie. Om de videokijkervaring te verbeteren,


worden de beelden gedownscaled naar 720p. Bovendien staat er een timer in de rechterbenedenhoek van de geëxporteerde video voor het gemak van de gebruiker.

👉 Het exporteren van video's kan op de achtergrond gebeuren, zodat u kunt blijven werken terwijl de video's worden geëxporteerd.

👉 Als de gebruiker besluit om de Viewer Software-toepassing te sluiten terwijl het exporteren van video's bezig is, verschijnt er een dialoogvenster met een gerelateerde melding.


Een afbeelding exporteren:

Wanneer op de knop "Exporteren" wordt geklikt, worden drie opties weergegeven. De gebruiker kan kiezen tussen het maken van de video, de afbeelding of het rapport. In dit geval moet de gebruiker op de knop "Afbeelding" drukken.

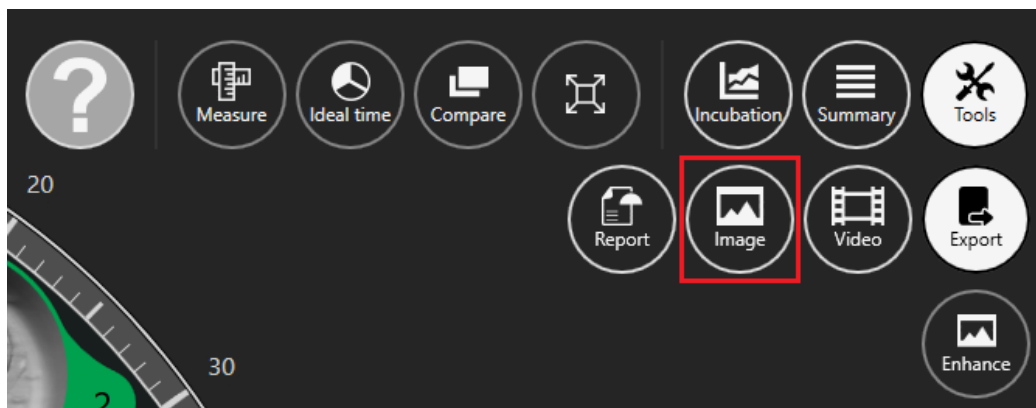

Afbeelding 7.76 Knop voor het exporteren van geselecteerde afbeeldingen

Wanneer de gewenste afbeelding is geselecteerd en op de knop "Afbeelding" wordt gedrukt, wordt het onderstaande venster geopend.

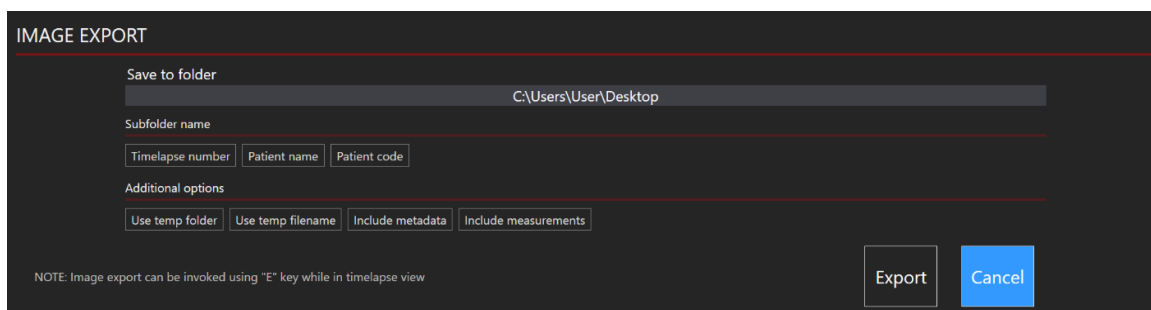


Afbeelding 7.77 Alle opties zijn inactief

De gebruiker kan kiezen welke informatie hij in de geëxporteerde afbeelding wil opnemen.

Het is mogelijk om te kiezen hoe de geëxporteerde foto's worden gegroepeerd. Als u bijvoorbeeld alleen het time-lapse-nummer selecteert, wordt er een nieuwe map "MTL-DEMO-XXX-XXXX" gemaakt en worden er foto's in geplaatst. Als er niets is geselecteerd, worden alle foto's in de hoofdmap geplaatst.

Er zijn extra opties die kunnen worden opgenomen in de geëxporteerde afbeelding: "Gebruik tijdelijke map", "Gebruik tijdelijke bestandsnaam", "Inclusief metadata" en "Inclusief metingen".

Druk op een van de opties om ze op te nemen in het geëxporteerde bestand. Ingeschakelde opties zijn wit gekleurd.

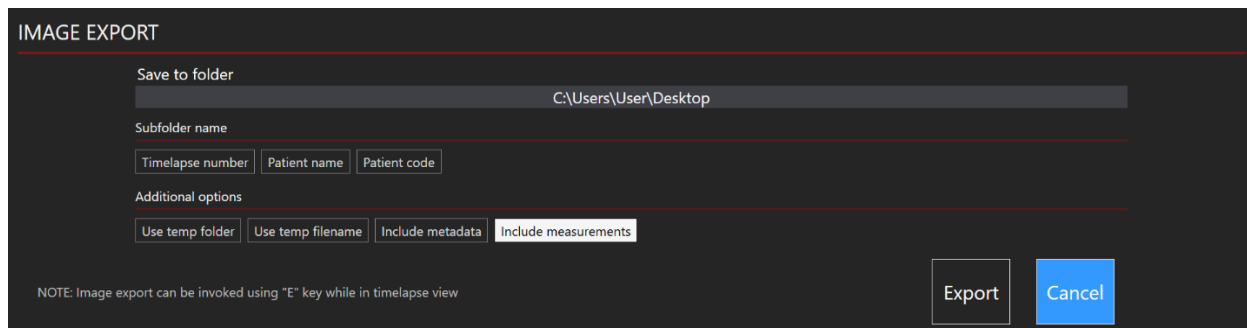


Afbeelding 7.78 "Inclusief metingen"-optie actief

👉 Standaard is de optie "Inclusief metingen" UIT, maar nadat ze voor de 1^e keer zijn opgenomen, worden ze automatisch opgenomen in andere geëxporteerde afbeeldingen.

👉 Merk op dat de naam van de afbeelding niet automatisch verandert, dus wees voorzichtig met het overschrijven van de afbeeldingen!


👉 Het exporteren van afbeeldingen kan ook worden gestart met de sneltoets "Control+E" op het toetsenbord (de exportmap moet van tevoren worden ingesteld). In de rechterbenedenhoek van het scherm wordt een bevestiging weergegeven.

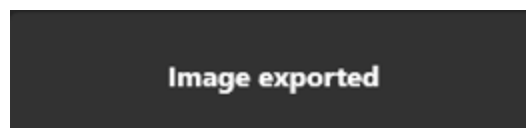

Afbeelding 7.79 Exporteren bevestiging

Hoe een rapport exporteren:

Wanneer op de knop "Exporteren" wordt geklikt, worden drie opties weergegeven. De gebruiker kan kiezen tussen het maken van de video, de afbeelding of het rapport. In dit geval moet de gebruiker op de knop "Rapport" drukken.

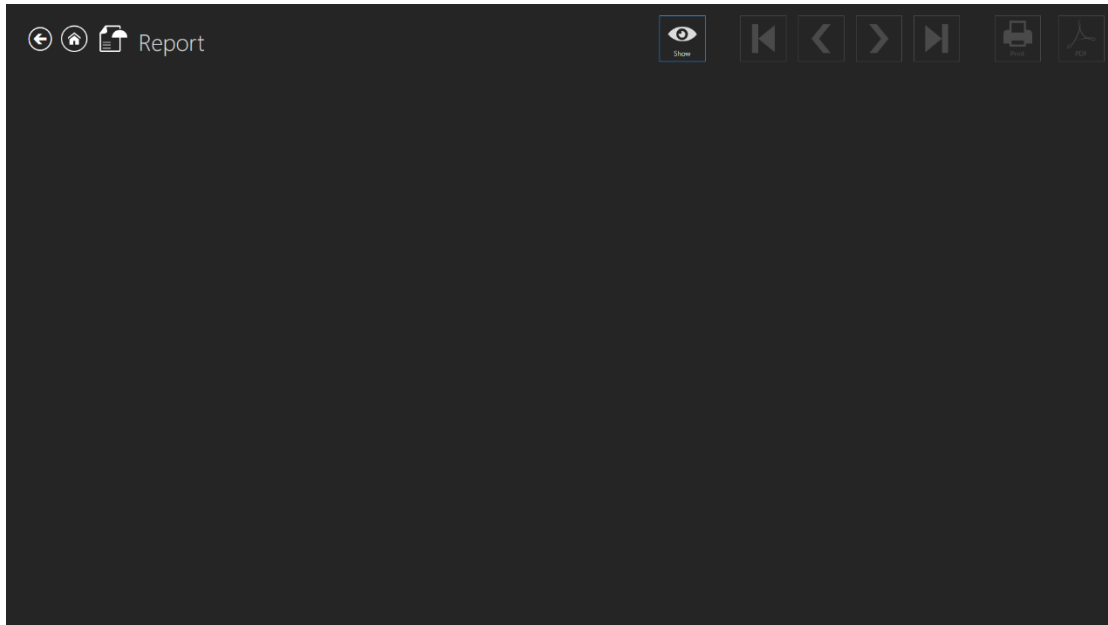


Afbeelding 7.80 "Rapport"-weergave

Door op de knop "Tonen" te klikken, wordt het rapport op het scherm weergegeven. In de buurt van de knop "Tonen" kunnen navigatieknoppen worden gebruikt om tussen geëxporteerde rapportpagina's te navigeren. Door op de eerste of vierde knop te klikken, kan de gebruiker naar de eerste en de laatste rapportpagina's navigeren. Door op de tweede en derde knop te klikken, kan de gebruiker één pagina per klik navigeren. Het is ook mogelijk om een PDF-bestand van het rapport af te drukken of te exporteren.



Afbeelding 7.83 Afbeeldingen met meting in een gegenereerd time-lapse-rapport

In de onderstaande afbeelding wordt een tabel weergegeven met alle annotaties en de bijbehorende informatie.

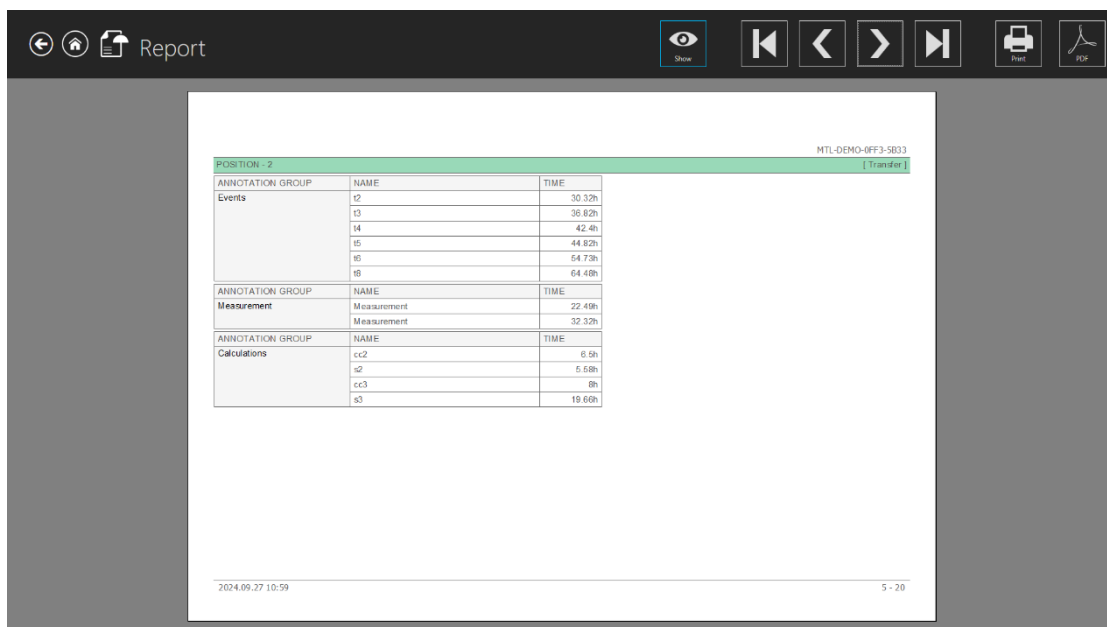


Afbeelding 7.84 Time-lapse-rapportweergave (annotaties)

👉 Alle nieuwe aanvullende informatie (d.w.z. uitkomsten, vruchtzakjes, enz.) wordt ook opgenomen in het time-lapse-rapport (Afbeelding 7.84).


7.3.2.10 Beeldvoorinstellingen

In de rechterbovenhoek van de time-lapseweergave bevindt zich een knop "Tools".

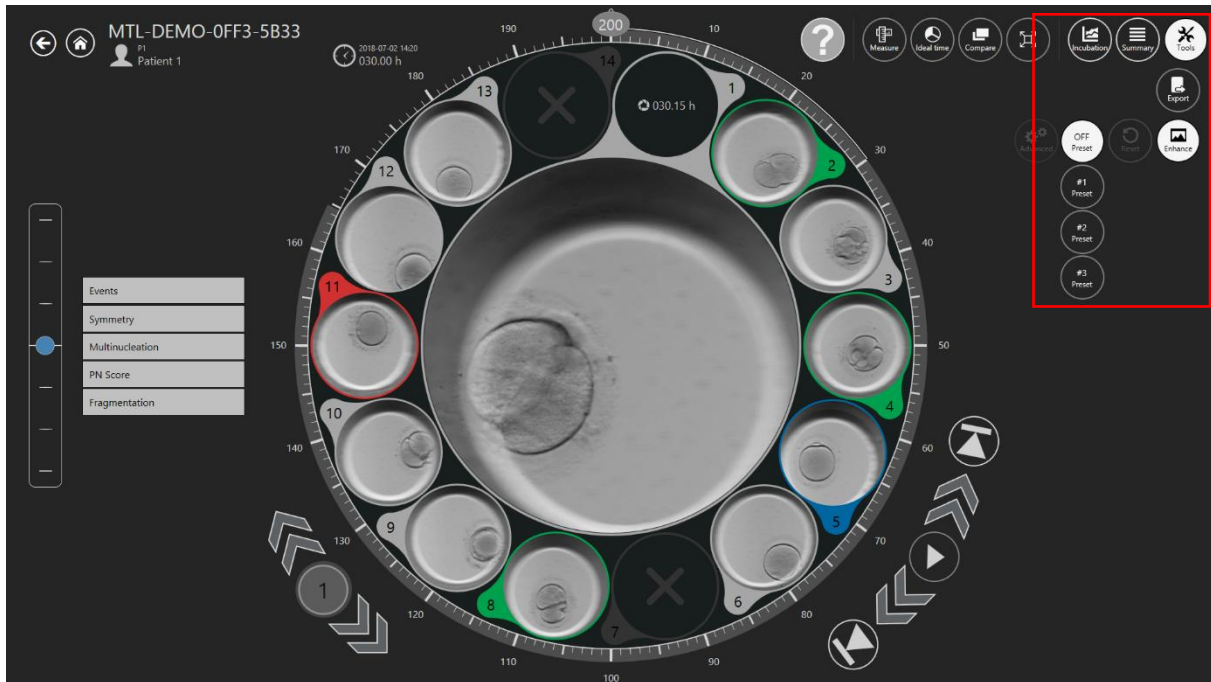

Afbeelding 7.85 Knop "Tools" in het hoofdscherm van de MIRI® IVF-incubator met meerdere kamers uit de TL-familie

Nadat u op de knop "Tools" hebt gedrukt, worden twee extra opties weergegeven: "Exporteren" en "Verbeteren".

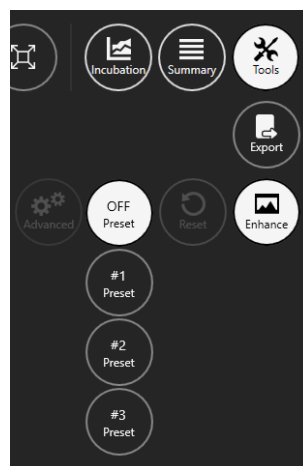

Afbeelding 7.86 Beeldverbeteringstool

Standaard bevat de tool voor beeldverbetering drie beeldvoorinstellingen:

- **#1 Voorinstelling** – contrastverbetering
- **#2 Voorinstelling** – randverbetering
- **#3 Voorinstelling** – bubbelverbetering


Elke geselecteerde afbeeldingsvoorinstelling wordt toegepast op alle time-lapse-afbeeldingen die zichtbaar zijn in time-lapse- en vergelijkingsweergaven.

Geactiveerde afbeeldingsvoorinstellingen worden ook toegepast bij het exporteren van time-lapse-video, afbeelding en rapport.

 Om de beeldverbeteringsfunctie uit te schakelen, drukt u op de "OFF preset"-knop.

 Wanneer de Viewer-software voor de MIRI® TL wordt gestart, is de functie voor beeldverbetering altijd uitgeschakeld.


 Zorg ervoor dat eventueel toegepaste beeldvoorinstellingen worden uitgeschakeld voordat u beelden of video's van geselecteerde embryo's exporteert. Als een beeldvoorinstelling ingeschakeld blijft, bevat de geëxporteerde video of het geëxporteerde beeld deze beeldvoorinstelling.

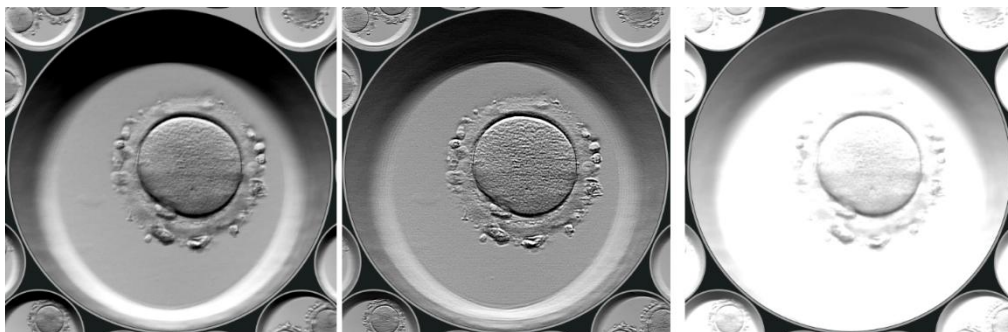

Afbeelding 7.87 Actieve Voorinstelling #1, Voorinstelling #2 en Voorinstelling #3


7.3.2.10.1 Geavanceerde instellingen

Nadat u op de gewenste voorinstelling heeft gedrukt, wordt een knop "Geavanceerd" actief, waarmee de gebruiker toegang heeft tot meer geavanceerde instellingen voor beeldverbetering.

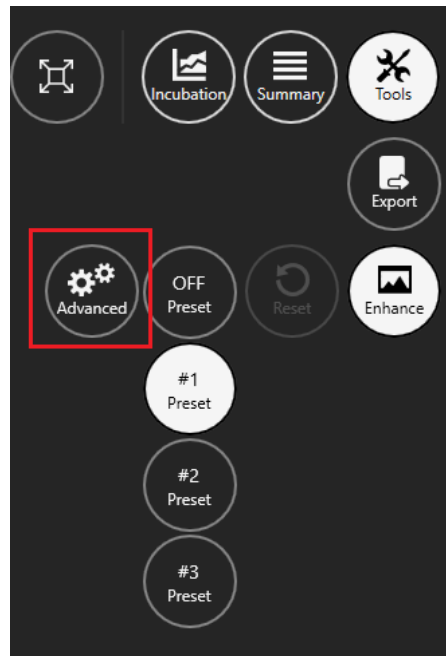

Afbeelding 7.88 Geavanceerde beeldverbeteringsinstellingen

De beeldverbeteringsinstellingen verschijnen aan de linkerkant van het scherm.

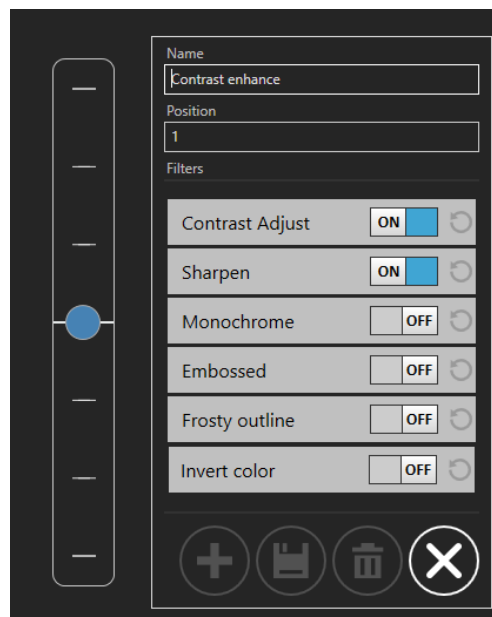


Afbeelding 7.89 #1 Voorinstelling geavanceerde instellingen

Elke instelling voor beeldverbetering bevat een "AAN/UIT"-knop die beeldverbetering onmiddellijk in- of uitschakelt.


 De standaardinstellingen #1, #2 en #3 kunnen niet worden gewijzigd of aangepast.

Wanneer de knop "Contrast aanpassen" wordt ingedrukt, verschijnen er twee nieuwe opties: "Helderheid", die kan worden aangepast van -1,00 tot 1,00 en "Contrast", die kan worden aangepast van 0,00 tot 2,00.

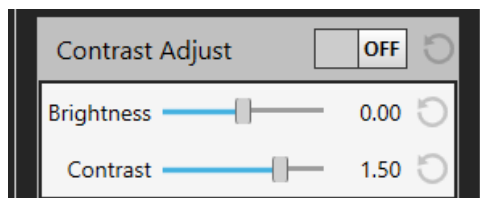


Afbeelding 7.90 Instellingen voor contrastaanpassing

Wanneer de knop "Verscherpen" wordt ingedrukt, verschijnen er twee nieuwe opties: "Hoeveelheid", die kan worden aangepast van 0,00 tot 2,00 en "Grootte", waarbij twee opties kunnen worden aangepast van 1 tot 1000.

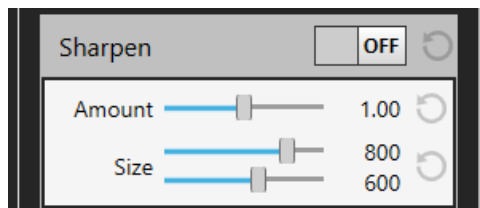


Afbeelding 7.91 Instellingen voor verscherping

Wanneer de knop "Monochroom" wordt ingedrukt, heeft de gebruiker de mogelijkheid om een kleurfilter toe te passen. De gebruiker kan kiezen uit de beschikbare standaardkleuren of een eigen kleur maken.

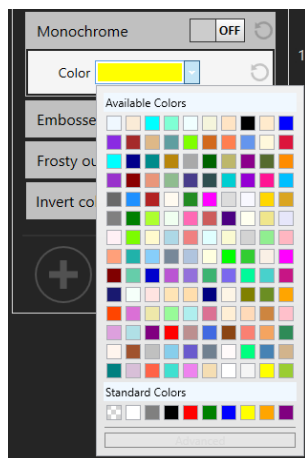


Afbeelding 7.92 Standaard kleurinstellingen

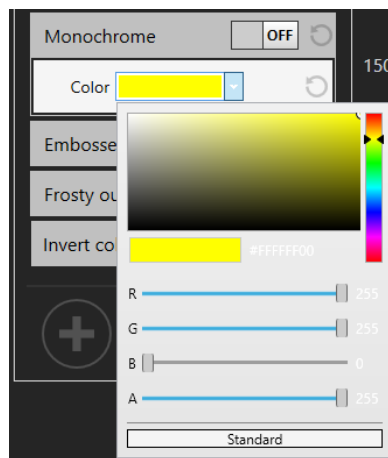


Afbeelding 7.93 Geavanceerde kleurinstellingen

Wanneer de knop "Reliëf" wordt ingedrukt, verschijnen er twee nieuwe opties: "Hoeveelheid", die kan worden aangepast van 0,000 tot 1,000 en "Breedte", die kan worden aangepast van 0,000 tot 0,010.

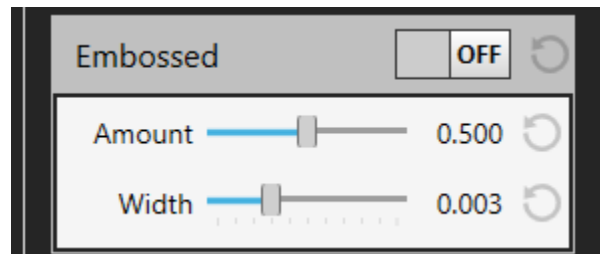

Afbeelding 7.94 Instellingen voor reliëf

Wanneer de knop "Matte contouren" wordt ingedrukt, verschijnen er twee nieuwe opties: "Breedte", die kan worden aangepast van 150 tot 650 en "Hoogte", die kan worden aangepast van 150 tot 400.

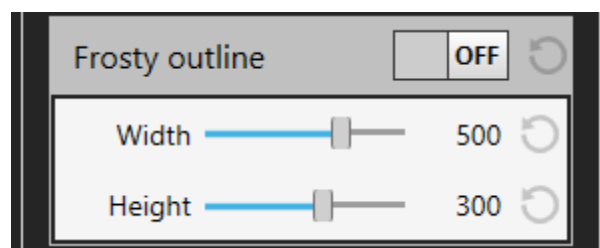

Afbeelding 7.95 Instellingen voor matte contouren

De gebruiker kan ook een filter "Kleur omkeren" gebruiken. Het heeft echter geen extra instellingen.



Afbeelding 7.96 Instellingen voor kleurinversie


7.3.2.10.2 Aanmaken van afbeeldingsvoorinstellingen

Bij het maken van een nieuwe afbeeldingsvoorinstelling kan de gebruiker een naam maken en een positie toepassen, die wordt weergegeven in de lijst met gemaakte afbeeldingsvoorinstellingen.

Afbeelding 7.97 Een nieuwe naam en positie voor afbeeldingsvoorinstellingen maken


 **Wanneer een nieuwe afbeeldingsvoorinstelling wordt gemaakt, moet de "Positie" niet worden gewijzigd. Nadat een voorinstelling is toegevoegd, wordt deze automatisch bijgewerkt.**

Om het filter "Kleur omkeren" toe te passen, drukt u op de knop "AAN/UIT".

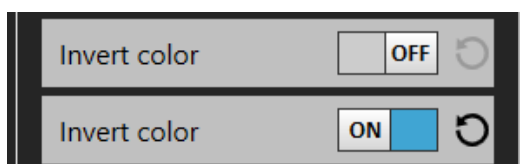


Afbeelding 7.98 "AAN/UIT"-knop

Na het toepassen van de gewenste instellingen voor beeldverbetering, kan de gebruiker een nieuwe beeldvoorinstelling toevoegen door op de knop "Nieuwe voorinstelling toevoegen" te drukken.

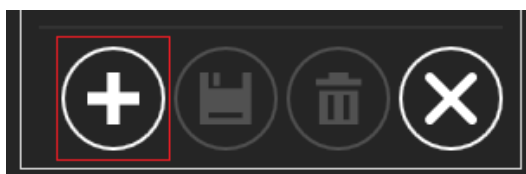

Afbeelding 7.99 "Nieuwe voorinstelling toevoegen"-knop

Nadat de nieuwe afbeeldingsvoorinstelling is opgeslagen, verschijnt deze aan de linkerkant van het scherm, onder de standaard afbeeldingsvoorinstellingen. Beweeg de muis over het nieuw gemaakte pictogram voor afbeeldingsvoorinstellingen om de volledige naam te zien.

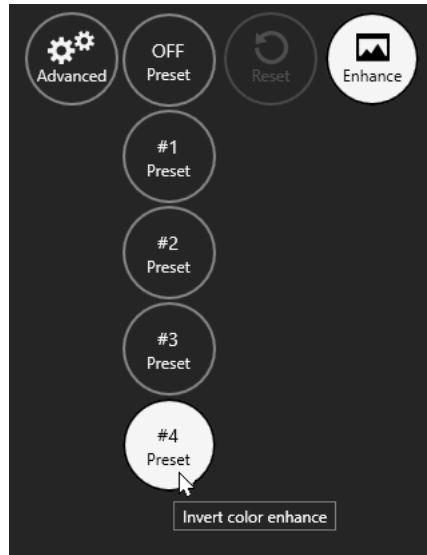

Afbeelding 7.100 Naam van de aangemaakte afbeeldingsvoorinstelling


Als de gebruiker besluit om de bestaande afbeeldingsvoorinstelling te wijzigen na het toepassen van andere instellingen voor beeldverbetering, kan dit worden gedaan door op de knop "Wijzigingen opslaan" te drukken.



Afbeelding 7.101 Knop "Wijzigingen opslaan"

Als de gebruiker een andere afbeeldingsvoorinstelling wil maken na het toepassen van andere instellingen voor beeldverbetering, kan dit worden gedaan door op de knop "Nieuwe voorinstelling toevoegen" te drukken, zoals beschreven in Afbeelding 7.99.

Als de gebruiker de gemaakte voorinstelling voor afbeeldingen wil verwijderen, kan dit worden gedaan door op de knop "Voorinstelling verwijderen" te drukken.

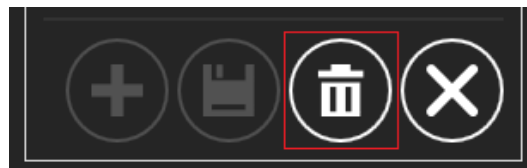


Afbeelding 7.102 "Voorinstelling verwijderen"-knop

Om de geavanceerde instellingen voor beeldverbetering te verlaten, drukt u op de knop "Annuleren".




Afbeelding 7.103 "Annuleren"-knop

De gebruiker kan de gewijzigde instellingen voor beeldverbetering resetten door op de knop "↶" naast de knop "AAN/UIT" te drukken.

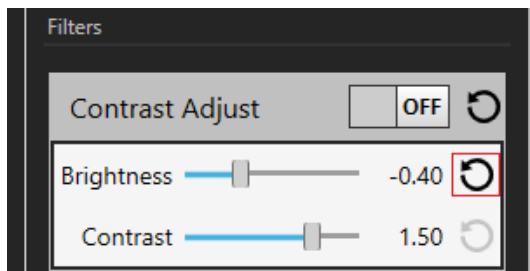

Afbeelding 7.104 Knop voor gewijzigde instellingen voor beeldverbetering herstellen

De knop "Reset" bevindt zich ook in de buurt van de knop "Verbeteren".

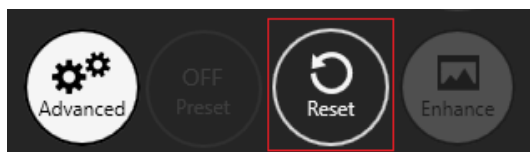

Afbeelding 7.105 "Reset"-knop

👉 Het totale aantal afbeeldingsvoorinstellingen dat kan worden toegepast op de time-lapses is 11 (inclusief 3 standaard afbeeldingsvoorinstellingen).

👉 Zorg ervoor dat eventueel toegepaste beeldvoorinstellingen worden uitgeschakeld voordat u beelden of video's van geselecteerde embryo's exporteert. Als een beeldvoorinstelling ingeschakeld blijft, bevat de geëxporteerde video of het geëxporteerde beeld deze beeldvoorinstelling.



Afbeelding 7.106 Maximaal aantal beeldvoorinstellingen

7.4 Patiënten


7.4.1 Patiëntenlijst

In de patiëntweergave kan een lijst worden bekeken van de patiënten die in het systeem zijn ingevoerd.

Patients				
Last Outcome : All		Patient name or code		
Code #	Name	Diagnosis	Last Outcome	Created
P2	Patient 2			2024-09-17 12:29
P1	Patient 1		test	2015-05-10 12:00


Afbeelding 7.107 Patiëntenlijstweergave

Er is nu een mogelijkheid om patiënten te filteren op hun laatste behandelresultaat. De optie bevindt zich boven aan het scherm in de weergave Patiëntenlijst.

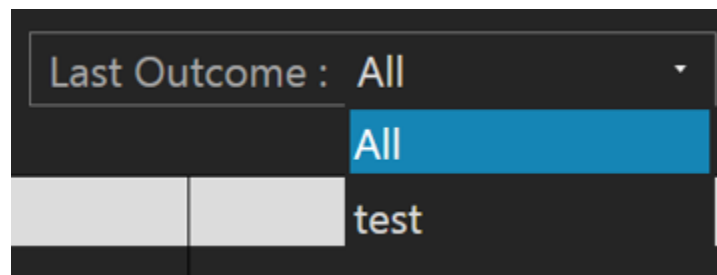

Afbeelding 7.108 Filtratie van laatste resultaat

De behandelijst van de patiënt heeft ook een kolom "Laatste resultaat", zoals te zien is in de afbeelding hieronder.

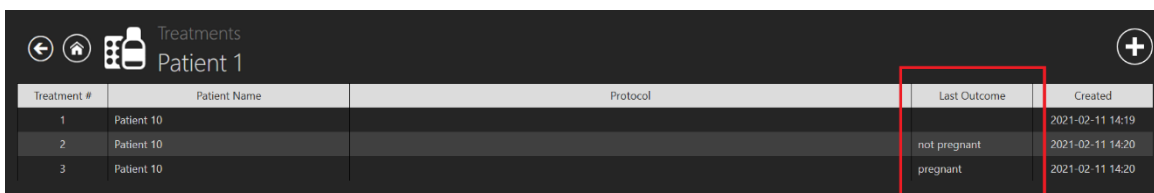

Treatment #	Patient Name	Protocol	Last Outcome	Created
1	Patient 10			2021-02-11 14:19
2	Patient 10		not pregnant	2021-02-11 14:20
3	Patient 10		pregnant	2021-02-11 14:20


Afbeelding 7.109 Filtratie van behandelresultaten bij patiënten

Er is een zoekfunctie in de rechterbovenhoek van de lijstweergave van de patiënt, waar de naam of code van de patiënt kan worden ingevoerd om de juiste patiënt te vinden.

Met de knop "Reset" worden alle geselecteerde filters gereset.


De gebruiker kan een annotatiebestand van een patiënt genereren door op de knop "Rapport" rechtsboven in de lijstweergave van de patiënt te drukken.

De patiënt kan worden verwijderd door op de gewenste patiënt te drukken en op de knop "Verwijderen" rechtsboven in de patiëntenlijstweergave te drukken. Er wordt een nieuw venster weergegeven die de gebruiker informeert dat alle geselecteerde patiëntgegevens zullen worden verwijderd.

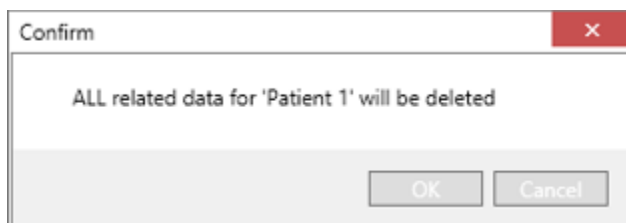

Afbeelding 7.110 Bevestigingsvenster dat alle geselecteerde patiëntgegevens worden verwijderd

Er zal een grote knop "Time-lapses" zijn aan de rechterkant onder de specifieke patiënt.

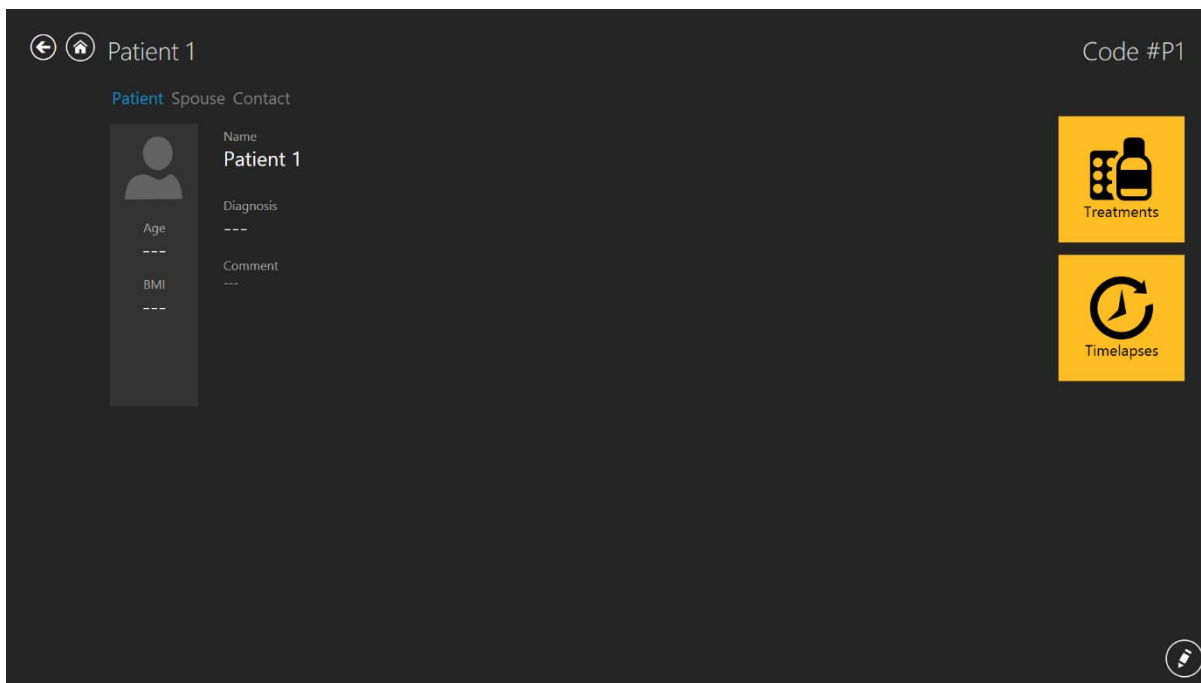

Afbeelding 7.111 Geselecteerde patiëntweergave

Door op de knop "Time-lapses" te drukken, wordt de lijst met time-lapses voor de geselecteerde patiënt geopend.


The screenshot shows the 'Timelapses' list page. At the top left, there are navigation icons and the text 'Timelapses'. At the top right, there is a search bar with the text 'Timelapse number, patient name or c...' and a 'RESET' button. Below the search bar, there is a table with 10 rows of data. The columns are: Timelapse #, Incubator, Compartment, Patient Name, Patient Code, Start Time, End Time, Duration (h), Lid Openings #, Cycle (min), and Created. The table contains 10 rows of data for Patient 1.

Timelapse #	Incubator	Compartment	Patient Name	Patient Code	Start Time	End Time	Duration (h)	Lid Openings #	Cycle (min)	Created
MTL-DEMO-0FF3-5B33	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-01 08:20	2018-07-08 05:01	164.7	0	5	2018-07-01 08:20
MTL-DEMO-0FEF-4C62	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 13:38	2018-07-01 13:29	119.9	0	5	2018-06-26 13:38
MTL-DEMO-0FEB-A9DB	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-24 08:09	2018-06-29 02:43	114.6	0	5	2018-06-24 08:09
MTL-DEMO-0FD3-9ED0	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-06 07:58	2018-06-12 02:06	138.1	0	5	2018-06-06 07:58
MTL-DEMO-0FCD-4CA9	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-03 07:58	2018-06-10 02:34	162.6	0	5	2018-06-03 07:58
MTL-DEMO-0FCS-80E1	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-05-27 08:14	2018-06-02 00:52	136.6	0	5	2018-05-27 08:14
MTL-DEMO-0F51-731F	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-02-28 08:28	2018-03-06 03:05	138.6	0	5	2018-02-28 08:28
MTL-DEMO-0F9F-25DA	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-04-25 09:48	2018-04-28 06:27	68.7	0	5	2018-04-25 09:48
MTL-DEMO-1005-B419	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-07-12 12:19	2018-07-16 11:00	94.7	0	5	2018-07-12 12:19
MTL-DEMO-0FEB-B974	DEMO	1	Patient 1	P1	2018-06-26 07:39	2018-07-03 00:04	160.4	0	5	2018-06-26 07:39
MTL-DEMO-0D89-3624-[142]	DEMO	1	Patient 1	P1	2017-03-19 07:18	2017-03-25 02:16	139.0	0	5	2017-03-19 07:18

Afbeelding 7.112 Geselecteerde patiënt time-lapse-weergave

7.4.2 Patiëntweergave

Dubbelklikken op de gewenste patiënt opent de geselecteerde patiëntweergave.

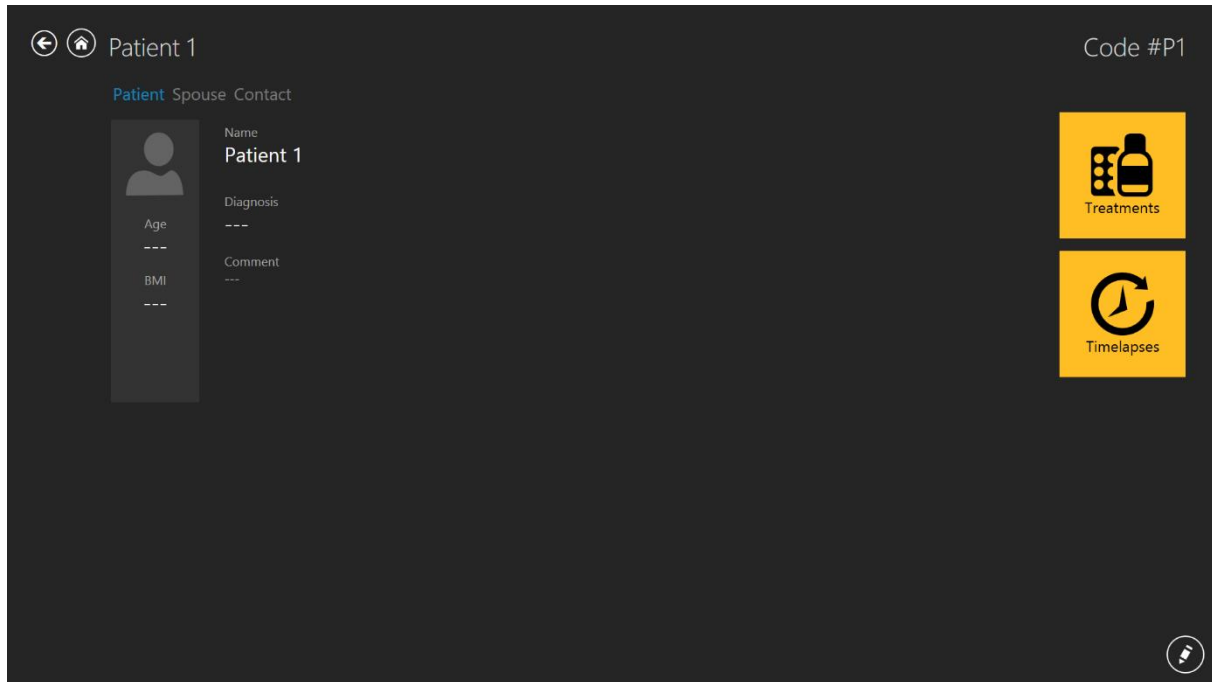

Afbeelding 7.113 Geselecteerde patiëntweergave

De knop "Bewerken" bevindt zich rechtsonder in het scherm.

De specifieke patiëntweergave bevat database-informatie over de patiënt. Alle gegevens kunnen hier worden bewerkt of toegevoegd als ze bij het aanmaken van de patiëntgegevens leeg zijn gelaten. Voeg gegevens toe en bewerk ze door op de knop "Potlood" in de rechterbenedenhoek te drukken. De gebruiker moet opslaan ("Opslaan"-knop verschijnt wanneer informatie is toegevoegd) om eventuele wijzigingen op te slaan.

Met de "Plus"-knop in de rechterbovenhoek van de patiëntenlijstweergave kan de gebruiker een nieuwe patiënt toevoegen. Wanneer erop wordt gedrukt, wordt een nieuwe weergave geopend:

Afbeelding 7.114 Venster voor het aanmaken van een nieuwe patiënt

Er kunnen verschillende gegevens over de patiënt worden ingetypt:

- Code # (identificatienummer – indien leeg gelaten, zal het systeem een unieke code toewijzen)
- Naam (moet worden opgegeven)
- Geboortedatum (gebruikerskalenderfunctie om de datum in te stellen)
- Leeftijd (wordt berekend)
- Diagnose
- Opmerking

De geboortedatum wordt ingevoerd met behulp van de kalenderfunctie die opent wanneer erop wordt gedrukt.

Code #

Patient Spouse Contact

Code #

Name

Birth Date Age

Select a date 14 ---

September 2024

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Correct errors

Afbeelding 7.115 Geboortedatum invoer

De meeste informatie in de database is vrijwillig in te voeren, behalve de naam van de patiënt. Het systeem waarschuwt als de benodigde informatie niet is ingevoerd.

Code #

Patient Spouse Contact

Code #

Name

The Name field is required.

Birth Date Age

Select a date 14 ---

Diagnosis

Comment

Correct errors

Afbeelding 7.116 Waarschuwinginformatie

De knop "Opslaan" in de rechterbenedenhoek slaat de verstrekte informatie op.

Door op de "Partner" te drukken verschijnt een weergave waar gegevens voor de partner kunnen worden ingevoerd.

← ↻ +

Code #

Patient Spouse Contact

Name

Birth Date Age

Select a date

⌂

Afbeelding 7.117 Informatie over partnervenster

De naam en geboortedatum kunnen worden ingevuld. De knop "Opslaan" in de rechterbenedenhoek slaat de informatie op.

Door op "Contact" te drukken, verschijnt een weergave waarin gedetailleerde contactgegevens kunnen worden ingevoerd.

← ↻ +

Code #

Patient Spouse Contact

Home Phone

Work Phone

Mobile Phone

Email

Address

⌂

Afbeelding 7.118 Venster contactgegevens


Er kunnen verschillende telefoonnummers, e-mailadressen en adressen worden ingevoerd. De knop "Opslaan" in de rechterbenedenhoek slaat de informatie op.

Wanneer een patiënt is toegevoegd aan de database, is de informatie beschikbaar in de lijst in de hoofdweergave van de patiënt.

7.4.3 Behandelingsweergave

Om een behandeling voor de patiënt te genereren, moet de gebruiker de patiëntweergave openen (raadpleeg voor meer informatie paragraaf "7.4.2 Patiëntweergave" van de gebruikershandleiding).


Er zal een grote knop "Behandeling" zijn aan de rechterkant onder de specifieke patiënt. Het opent de behandelingsweergave die een overzichtslijst bevat van de huidige of eerdere behandelingen voor de patiënt en laat de gebruiker een nieuwe behandeling toevoegen.

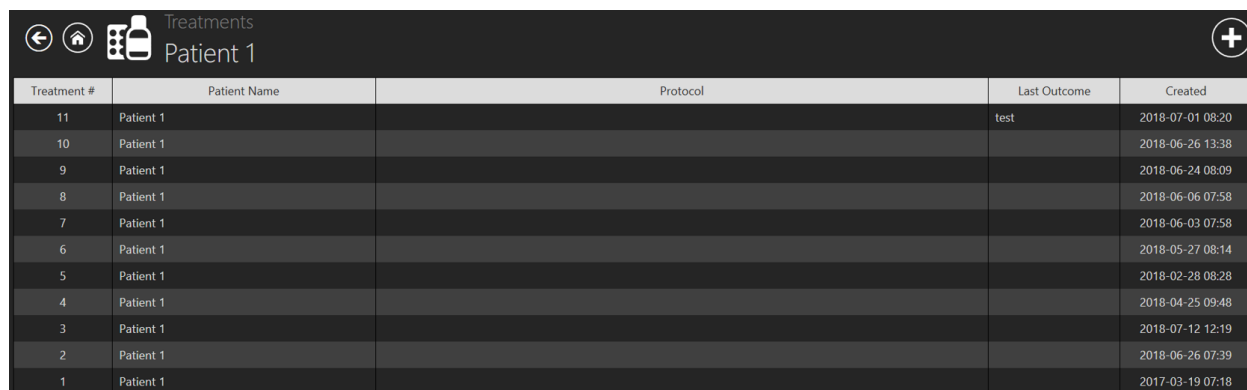

Treatment #	Patient Name	Protocol	Last Outcome	Created
11	Patient 1		test	2018-07-01 08:20
10	Patient 1			2018-06-26 13:38
9	Patient 1			2018-06-24 08:09
8	Patient 1			2018-06-06 07:58
7	Patient 1			2018-06-03 07:58
6	Patient 1			2018-05-27 08:14
5	Patient 1			2018-02-28 08:28
4	Patient 1			2018-04-25 09:48
3	Patient 1			2018-07-12 12:19
2	Patient 1			2018-06-26 07:39
1	Patient 1			2017-03-19 07:18

Afbeelding 7.119 Weergave geselecteerde patiëntbehandeling

Door op de "Plus"-knop te drukken, wordt het nieuwe behandelvenster geopend.

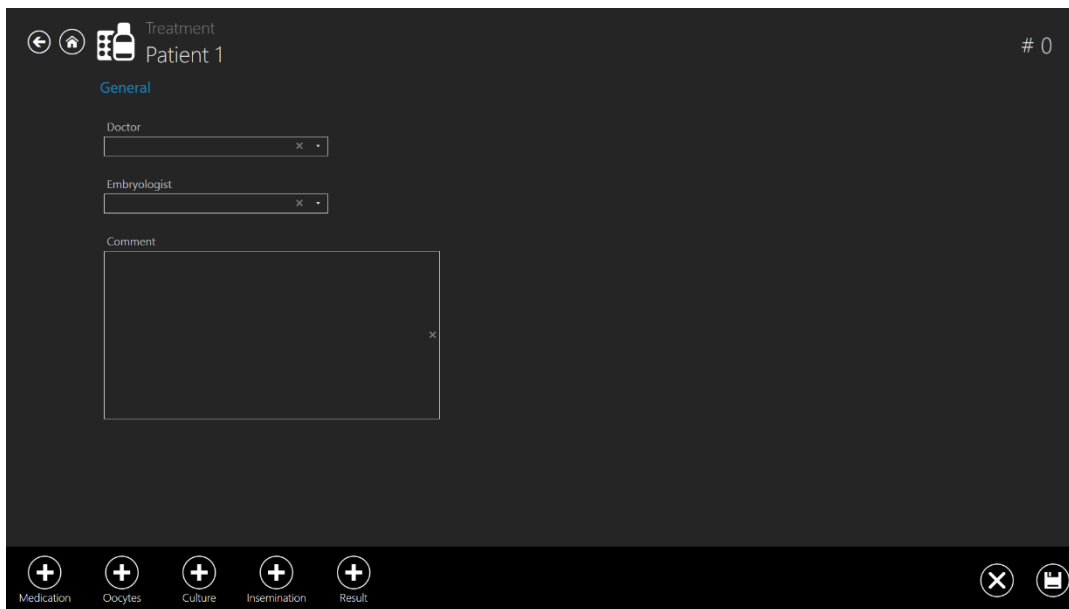

Afbeelding 7.120 Nieuw behandelvenster

De "Plus"-knop in het onderste paneel opent meer mogelijkheden voor het invoeren van specifieke informatie over de behandelingen van de patiënt.

Het gedeelte "Algemeen" toont de arts, de embryoloog en een commentaarveld. Dit is allemaal optionele informatie. Zorg er wel voor op te slaan als de informatie is ingevoerd.

De eerste "Plus"-knop voegt het gedeelte "Medicatie" toe.

The screenshot shows the 'Treatment' screen for 'Patient 1'. The 'Medication' tab is selected and highlighted in blue. The form contains the following fields:

- Medication Protocol:** A dropdown menu with a close button (x).
- Medication Brand:** A dropdown menu with a close button (x).
- Oocyte Triggering:** A dropdown menu with a close button (x).
- FSH Dose (IU):** A text input field with a close button (x).
- Comment:** A large text area with a close button (x).

At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Oocytes', 'Culture', 'Insemination', 'Result', and 'Remove'. The 'Remove' icon is a minus sign inside a circle. On the far right of the bar are icons for 'Cancel' (X) and 'Save' (floppy disk).

Afbeelding 7.121 Onderdeel "Medicatie" toegevoegd

In deze rubriek kan de informatie over de medicatie ingevuld worden:

- Medicatieprotocol
- Medicatiemerk
- Eicel-triggering
- FSH-dosis
- Opmerkingen (vrij tekstveld)

Onder aan de weergave voor het maken van behandelingen worden de rest van de secties met informatie over de behandeling nog steeds weergegeven. Alleen de geopende gedeelte "Medicatie" is uit de lijst verwijderd omdat de weergave met mogelijke toevoegingen momenteel open is. Nu is het te zien onder de naam van de patiënt (in dit geval is het "Patiënt 1") in blauw.

Bewaar de informatie die is ingevoerd onder het kopje "Medicatie" door op de knop "Opslaan" te drukken.

Het extra veld kan worden verwijderd door op de knop "Verwijderen" te drukken. Hierdoor gaat de optie "Medicatie" terug naar linksonder in het scherm.

Door op de "Plus"-knop onder "Eicellen" te drukken, wordt het gedeelte eicellen geopend.

Afbeelding 7.122 Onderdeel "Eicellen" toegevoegd

In deze rubriek kan de informatie over de eicellen worden ingevuld:

- Eicel-bron
- Eicelkwaliteit
- Oogstdatum
- Het veld voor het noteren van de splitsing tussen geoogst, gerijpt en niet-gerijpt
- Opmerking (vrij tekstveld)

Bewaar de informatie die is ingevoerd onder het kopje "Eicellen" door op de knop "Opslaan" te drukken.

Nogmaals, de lijst met "Plus"-knoppen onderaan is verkleind met nu zowel "Medicatie" als "Eicellen". Merk op dat de secties die worden behandeld bovenaan laten zien hoe diep de gebruiker in de sectielagen is genavigeerd. Hier wordt "Algemeen" (1^e gedeelte), "Medicatie" (2^e gedeelte), "Eicellen" weergegeven (blauw gekleurd - wat betekent dat de actieve weergave actief is).

Door op de "Plus"-knop onder "Kweek" te drukken, wordt het kweekgedeelte geopend.

The screenshot shows a software interface for 'Patient 1' under the 'Treatment' tab. The 'Culture' section is active, displaying a 'Culture Type' dropdown menu and a 'Comment' text area. The bottom navigation bar includes buttons for 'Insemination', 'Result', 'Remove', and a 'Save' button (represented by a document icon).

Afbeelding 7.123 Onderdeel "Kweek" toegevoegd


In deze rubriek kan de informatie over de kweek worden ingevoerd:

- Kweektype
- Opmerking (vrij tekstveld)

Bewaar de informatie die is ingevoerd onder het kopje "Kweek" door op de knop "Opslaan" te drukken.

Nogmaals, de lijst van de "Plus"-knop wordt verkleind en de sectielijst onder behandelingen wordt vergroot met de nu geopende sectie "Kweek".

Door op de "Plus"-knop onder "Inseminatie" te drukken, wordt het inseminatiegedeelte geopend.

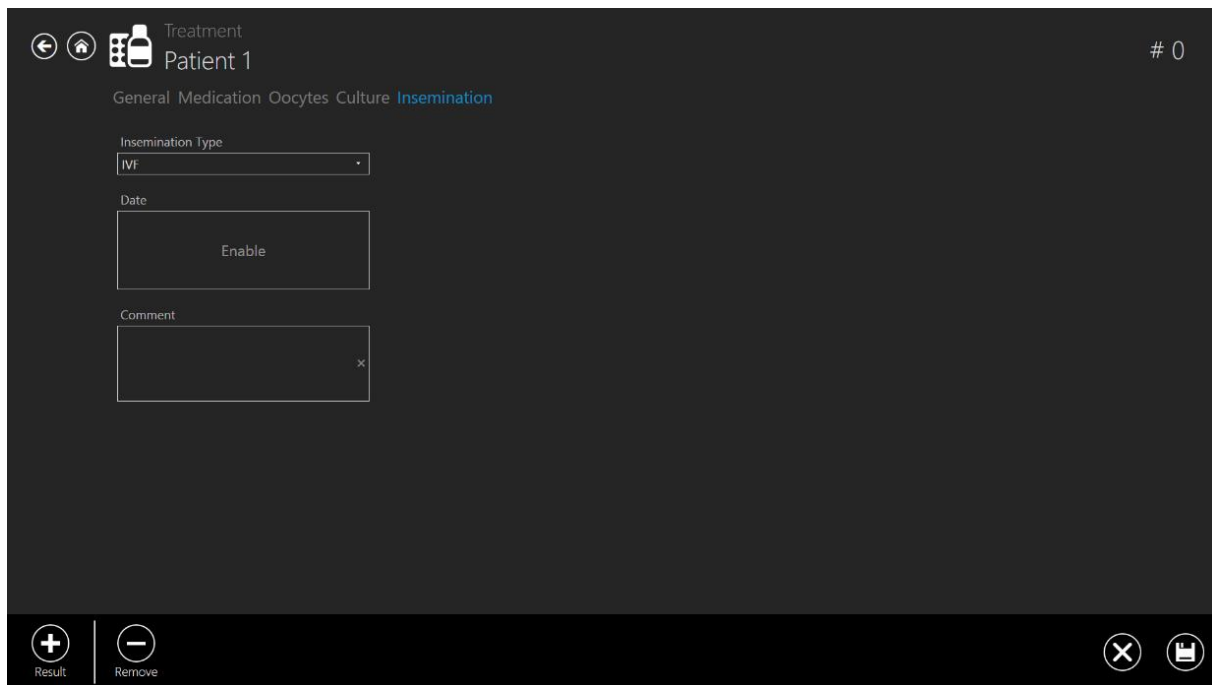

Afbeelding 7.124 Onderdeel "Inseminatie" toegevoegd

In deze rubriek kan de informatie over inseminatie worden ingevuld:

- Inseminatietype (IVF, ICSI)
- Datum
- Opmerking (vrij tekstveld)

 De inseminatietijd moet correct worden ingevoerd voor een latere zinvolle analyse van de time-lapse-gegevens. De verdelingstijdstippen worden berekend en geregistreerd volgens het inseminatietijdstip als uitgangspunt. Als er geen tijd is ingevoerd, zal het systeem deze gebruiken wanneer de time-lapse wordt gestart als tijd nul. Het kan nuttig zijn als eicellen op een natuurlijke manier worden gekweekt, er op dit moment geen inseminatietijd zou bestaan.

Bewaar de informatie die is ingevoerd onder het kopje "Inseminatie" door op de knop "Opslaan" te drukken.

De laatste overgebleven "Plus"-knop onder het "Resultaat" opent het resultaatgedeelte.

The screenshot shows the 'Result' tab in the MIRI TL Viewer Software. The interface is dark-themed. At the top, there are navigation icons and the text 'Treatment Patient 1' and '# 0'. Below this, there are tabs for 'General', 'Medication', 'Oocytes', 'Culture', 'Insemination', and 'Result' (which is highlighted in blue). The 'Result' tab contains several input fields and buttons: 'Transfer Date' with an 'Enable' button, 'Transfer Comment' with a text area and a close button, 'Assisted Hatching' with an 'Unset' button, 'HCG Test' with an 'Unset' button, 'Gestational Sacs' with a '+' button, 'Fetal Heart Beat' with a '+' button, 'Born Babies' with a '+' button, and 'Outcome' with a text area and a close button. At the bottom left, there is a 'Remove' button. At the bottom right, there are two circular buttons with 'X' and a document icon.

Afbeelding 7.125 Onderdeel "Resultaat" toegevoegd

In deze rubriek kan de informatie over het resultaat worden ingevoerd:


- Datum transfer
- Opmerking bij transfer (vrij tekstveld)
- Assisted hatching (niet ingesteld – nee – ja)
- HCG-test (niet ingesteld – negatief – positief)
- Vruchtzakjes (van 0 tot 5)
- Foetale hartslag (van 0 tot 5)
- Geboren baby's (van 0 tot 5)
- Resultaat (vrij tekstveld)

Bewaar de informatie die is ingevoerd onder het kopje "Resultaat" door op de knop "Opslaan" te drukken.

De resultaten worden ingesteld door op de ronde knop te klikken totdat deze het juiste resultaat toont.

De gebruiker kan alles verwijderen wat hij schrijft in een "open tekst"-veld, zoals "Resultaat", "Patiëntnaam of -code", "Opmerking bij transfer", enz.


Dit kan worden gedaan door op de rood gemarkeerde "X"-knop in de onderstaande afbeelding te drukken.

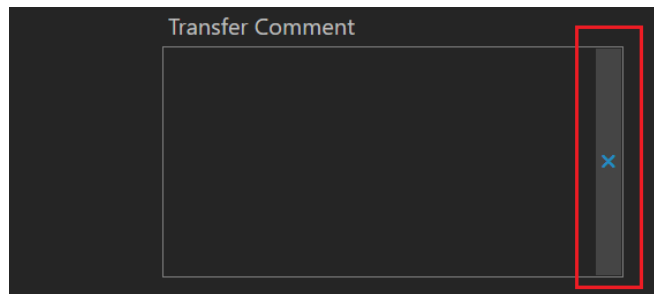

Afbeelding 7.126 Knop "Wissen"

7.4.4 Weergave time-lapse maken


Onder de behandelweergave voor de specifieke patiënt is het mogelijk om een nieuwe time-lapse te starten.

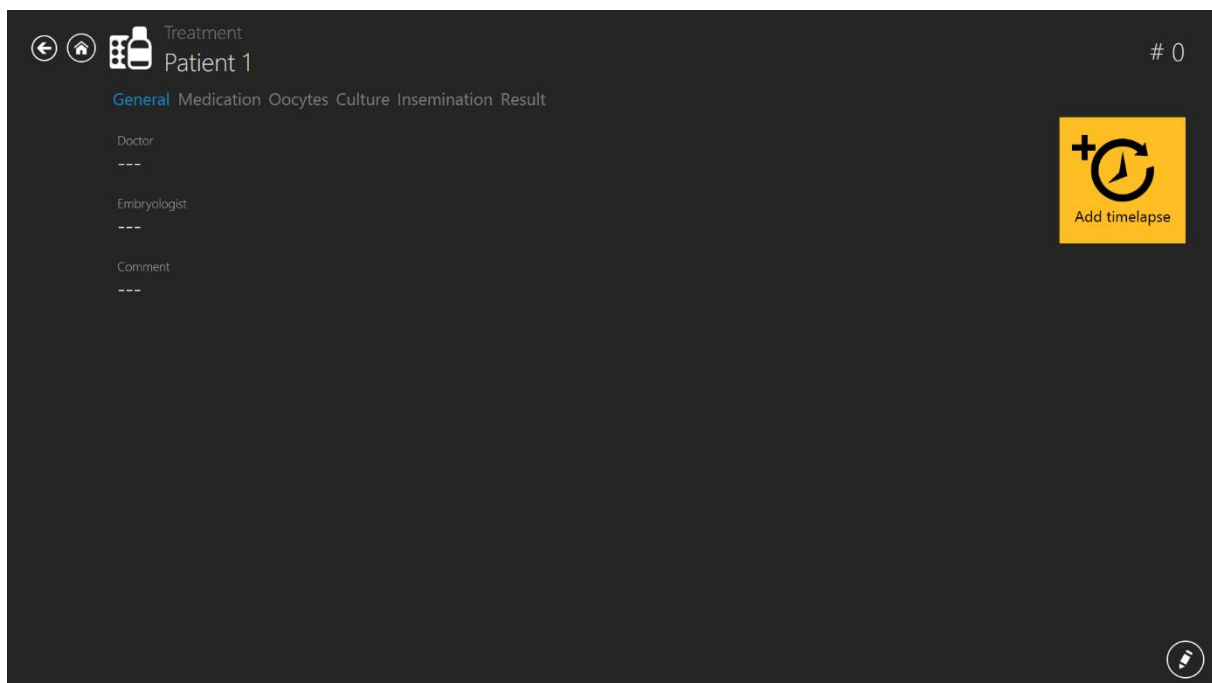

Afbeelding 7.127 Knop "Time-lapse toevoegen" onder de specifieke patiëntbehandeling

Door op de knop "Time-lapse toevoegen" te drukken, wordt een nieuw venster geopend. De gebruiker moet selecteren naar welk apparaat de time-lapse wordt verzonden.

Als er incubatoren zijn die zijn uitgeschakeld in de weergave "Incubator", zullen deze niet zichtbaar zijn in het onderstaande venster "Incubator selecteren".

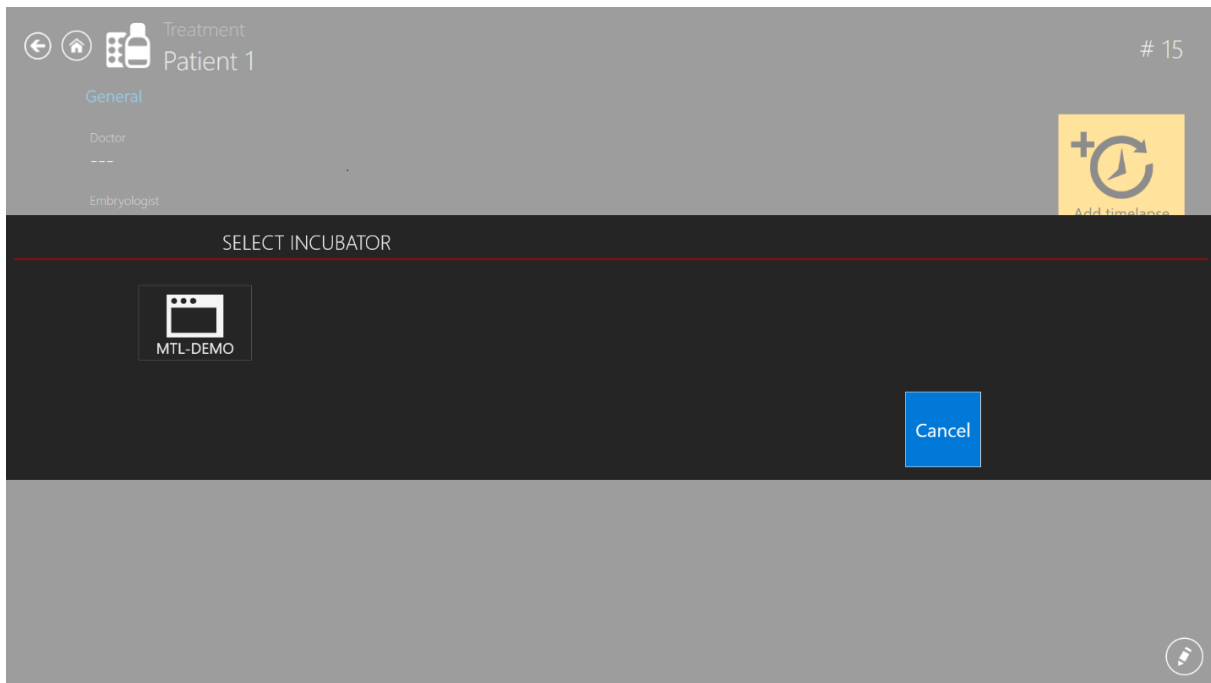

Afbeelding 7.128 Selecteer het apparaat waarin de time-lapse wordt verzonden

👉 Eén behandeling kan maar één time-lapse hebben. Als de gebruiker meer time-lapses voor de patiënt wil toevoegen, moet een nieuwe behandeling worden toegevoegd.

👉 Er moet eerst een time-lapse gemaakt worden op de TL Viewer en verzonden worden naar de MIRI® TL6 en MIRI® TL12 IVF-incubator met meerdere kamers om te verschijnen op de lijst met beschikbare patiënten op de MIRI® TL6 en MIRI® TL12 IVF-incubator met meerdere kamers. Een time-lapse kan niet op een andere manier worden gestart.


👉 Raadpleeg de paragraaf "7.5 Incubatorlijst" in de gebruikershandleiding voor instructies voor het in- en uitschakelen van incubatoren.

Als de time-lapse is gemaakt, ziet de behandelpagina eruit als in de onderstaande afbeelding en door op de knop "Time-lapse" te drukken, wordt de time-lapse-weergave getoond:



Afbeelding 7.129 Behandelingsoverzicht wanneer de time-lapse is gemaakt


Door op de knop "Time-lapse" te drukken, wordt de time-lapse-weergave getoond.

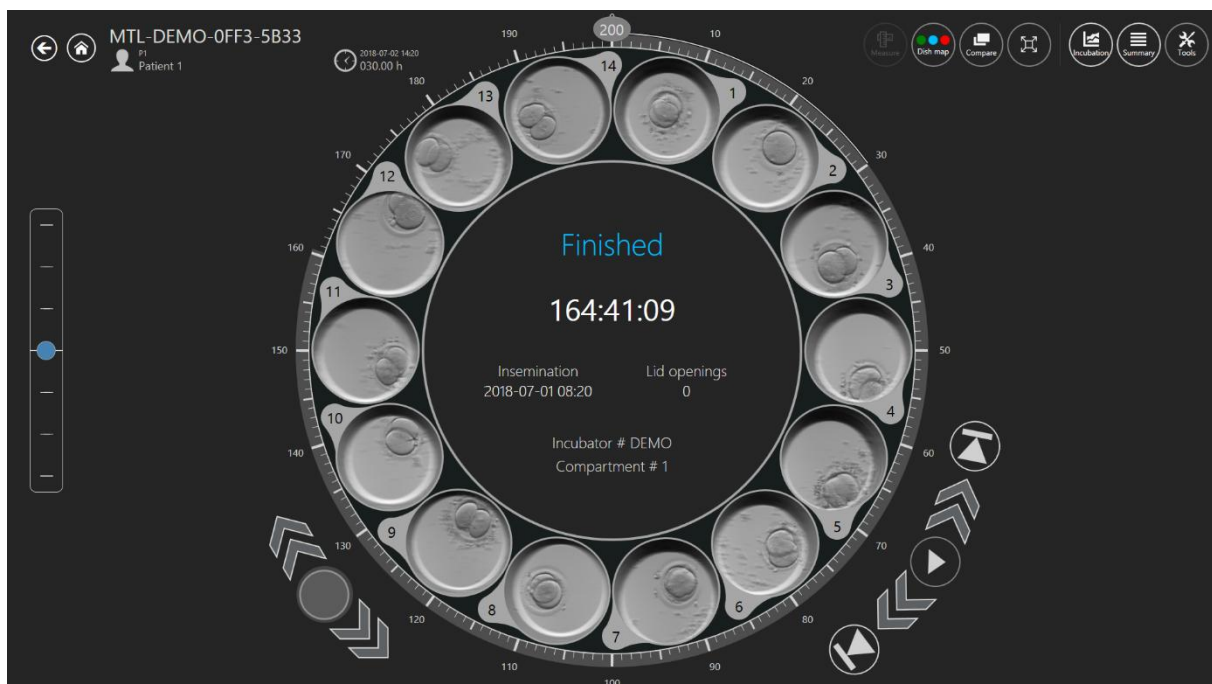

Afbeelding 7.130 De time-lapse weergave van een specifieke patiënt


7.5 Incubatorlijst

Door op een "Incubator"-knop in de hoofdweergave te drukken, wordt een nieuw venster geopend waarin de gebruiker alle MIRI® IVF-incubatoren met meerdere kamers uit de TL-familie kan zien die ooit zijn aangesloten op de Viewer-software van de MIRI® IVF-incubator met meerdere kamers uit de TL-familie.

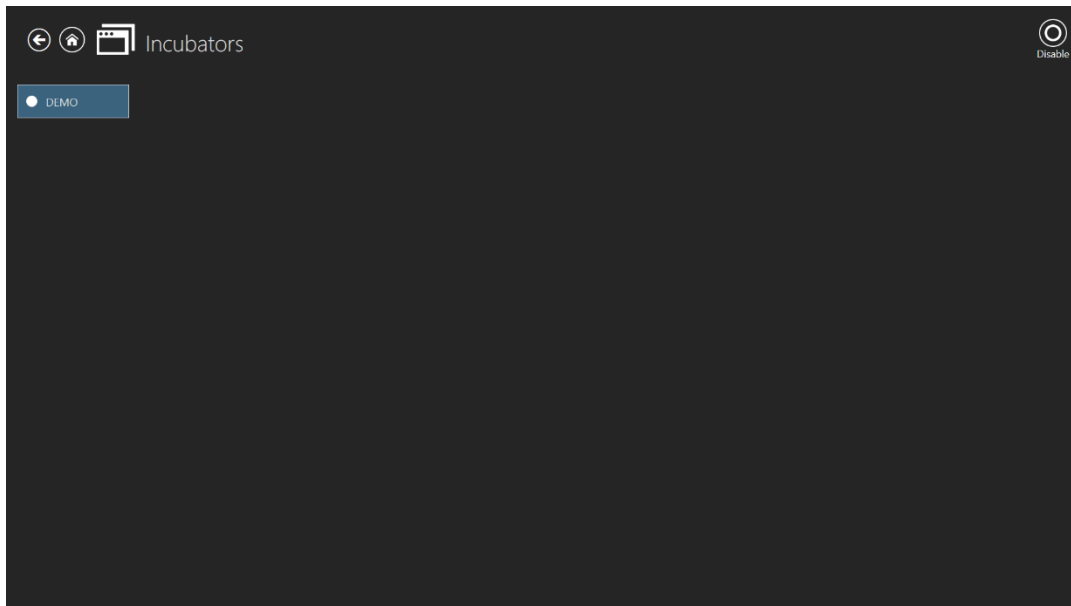

Afbeelding 7.131 "DEMO" incubator is ingeschakeld


Door op de knop "Uitschakelen" in de rechterbovenhoek te drukken, kan de gebruiker de gemarkeerde incubator uitschakelen. Het zal niet langer beschikbaar zijn voor selectie bij het maken van een time-lapse.

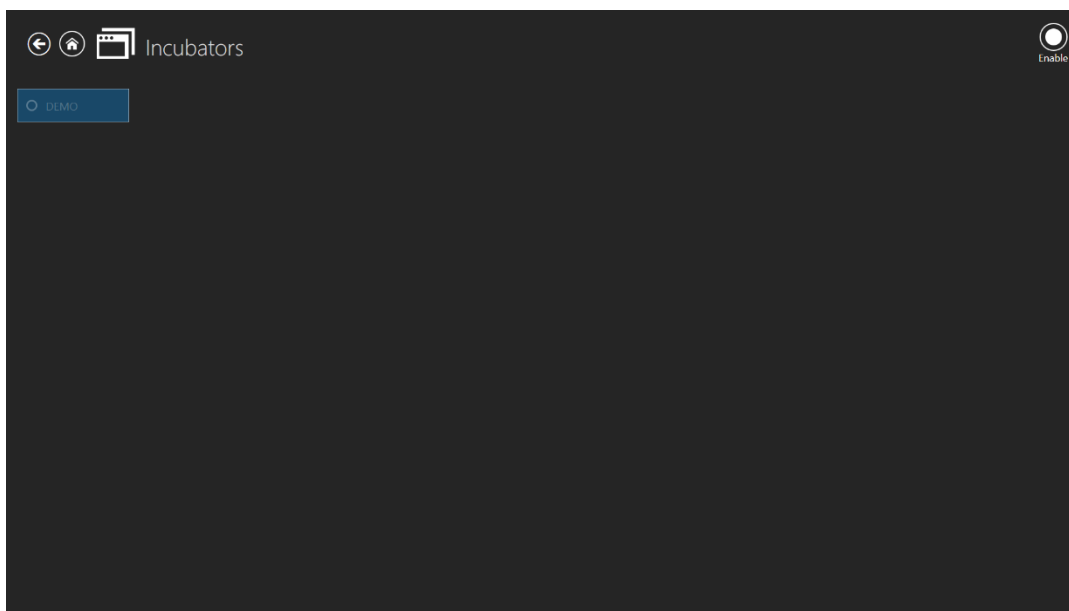

Afbeelding 7.132 "DEMO" incubator is uitgeschakeld

Door te dubbelklikken op de geselecteerde incubator gaat u direct naar de incubatiegegevenslogweergave van de incubator.

In de onderstaande afbeelding worden de incubatiegegevens van de temperatuur van de 1^e kamer weergegeven.

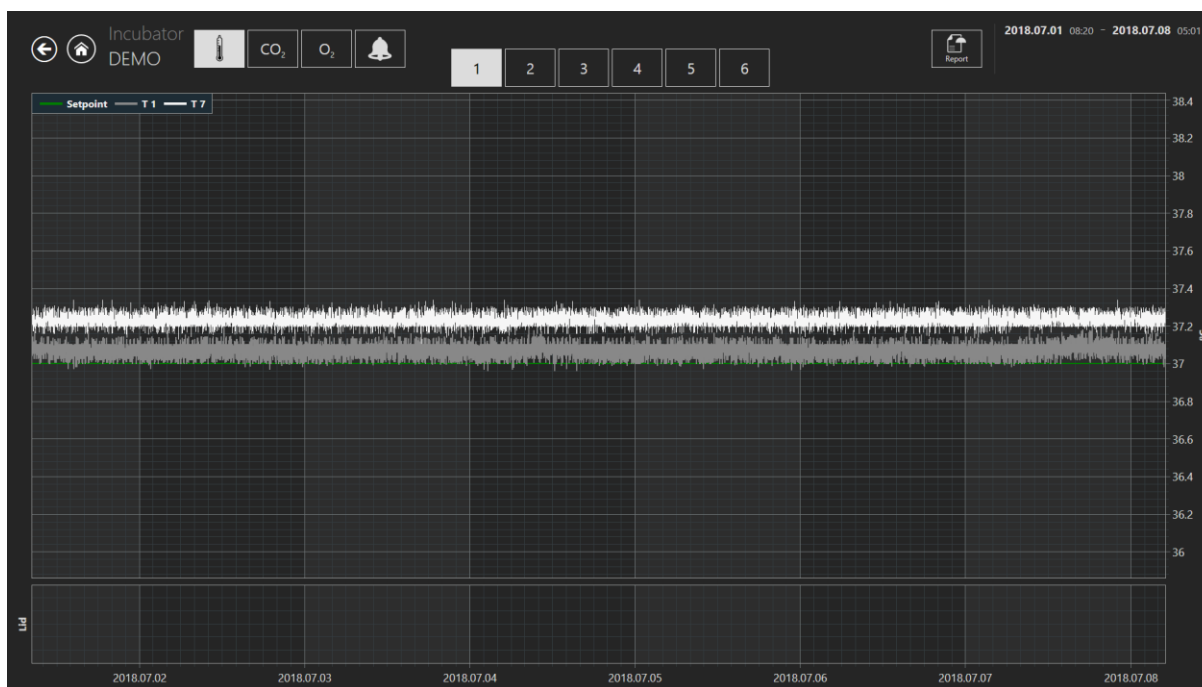


Afbeelding 7.133 Incubatiegegevenslogweergave "DEMO" incubatortemperatuur

Er zijn hier een paar extra opties. In de rechterbovenhoek van het scherm kan de gebruiker de


gegevens verschuiven naar de huidige maand door op de knop "Maand" te drukken, de huidige week door op de knop "Week" te drukken en de huidige dag door op de knop "Dag" te drukken.

De andere optie is dat de gebruiker door op de knop te drukken die in de onderstaande afbeelding rood is gemarkeerd, de gewenste maand in het verleden kan kiezen. De maand wordt vermeld vanaf de 1^e maand dat MIRI® TL begon te werken.

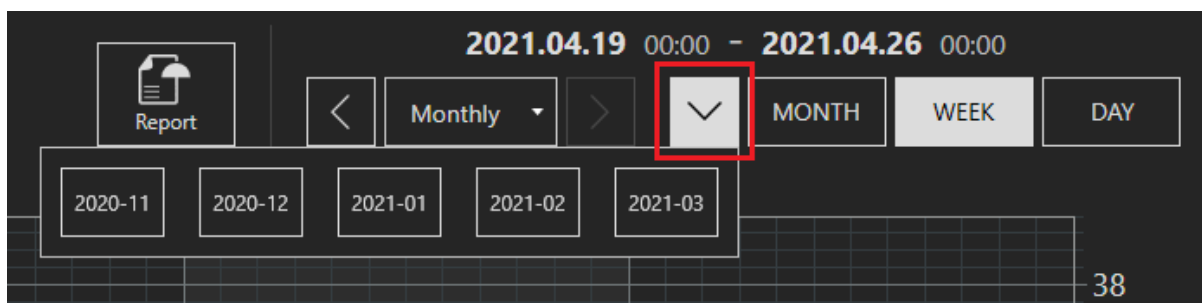

Afbeelding 7.134 Selectie-opties voor incubatiegegevens

De andere optie is dat de gebruiker de gegevens van de geselecteerde maand kan verschuiven tussen intervallen "Dagelijks", "Wekelijks" en "Maandelijks" door op de juiste knoppen hieronder te drukken.

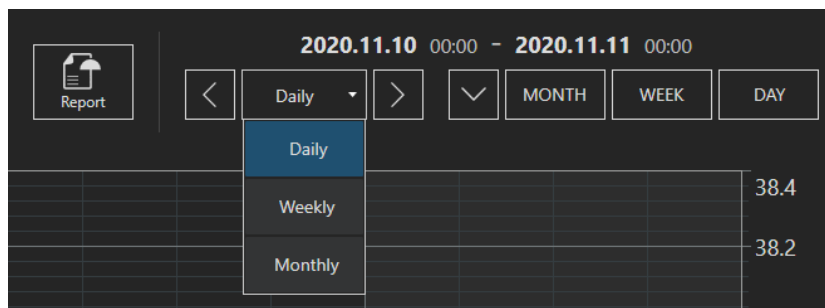


Afbeelding 7.135 Selectie-opties voor incubatiegegevens

Na het selecteren van de gewenste gegevensoptie kan de gebruiker op de knop drukken die naar links (<) of naar rechts (>) wijst en op die manier schakelen tussen de gegevens in die intervallen.

7.6 Instellingen

In dit gedeelte is het mogelijk om de ervaring bij het gebruik van de MIRI® TL Viewer Software aan te passen aan unieke gebruikersvoorkeuren en -behoeften.

Door op de knop "Instellingen" te drukken, wordt de instellingenweergave geopend, die de secties "Annotaties", "Embryostatussen", "Sneltoetsen", "Scoremodellen" en "Taal" bevat.

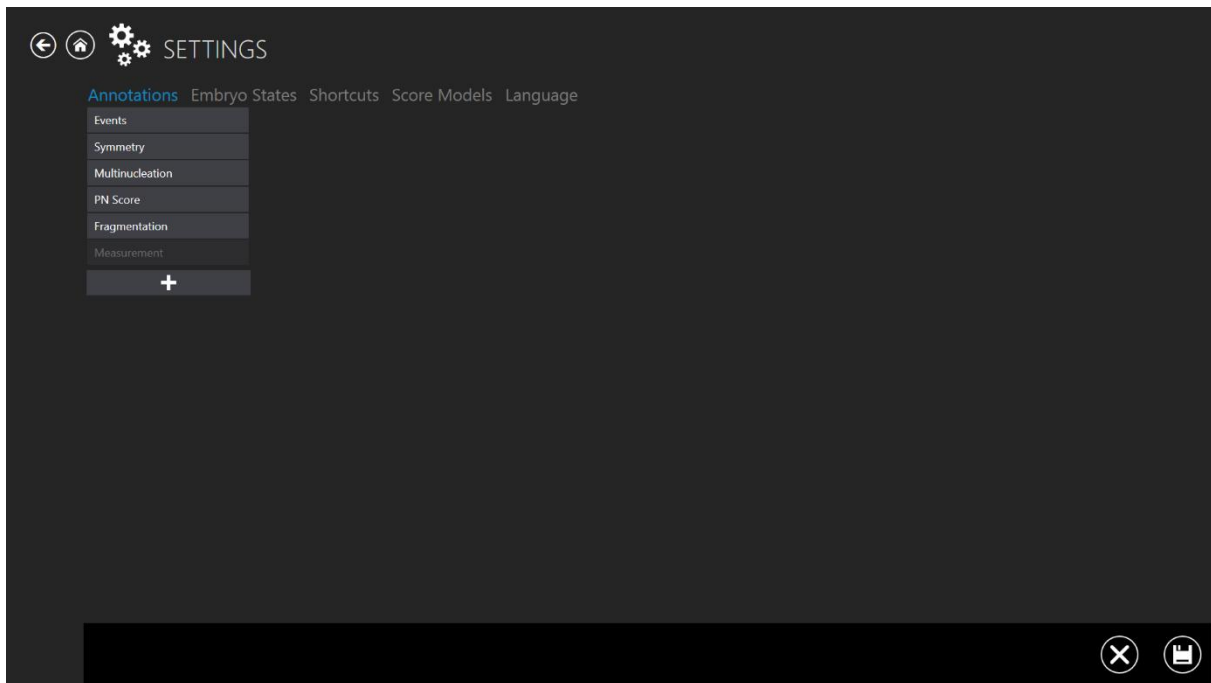


Afbeelding 7.136 Instellingenweergave

7.6.1 Annotatie wijzigen/aanmaken

Het is mogelijk om een groep van annotaties te bekijken die al zijn gemaakt in het menu "Annotaties". Een nieuwe groep kan worden toegevoegd door op de "+"-knop te drukken, die onder alle annotaties te vinden is.

Een aangemaakte groep kan uit de selectie worden verwijderd door op het verwijderpictogram "x" rechtsonder in het scherm te drukken.

Door op de balk "Gebeurtenis" te drukken, wordt een weergave met gebeurtenisannotaties geopend. Hier zijn de gebeurtenissen te zien die de annotatiegroep vormen. In de afbeelding wordt t2 weergegeven (tijd tot het tweecellige stadium). Het wordt aangeduid als "actief", wat betekent dat het zal worden gebruikt in de annotatiemodus.

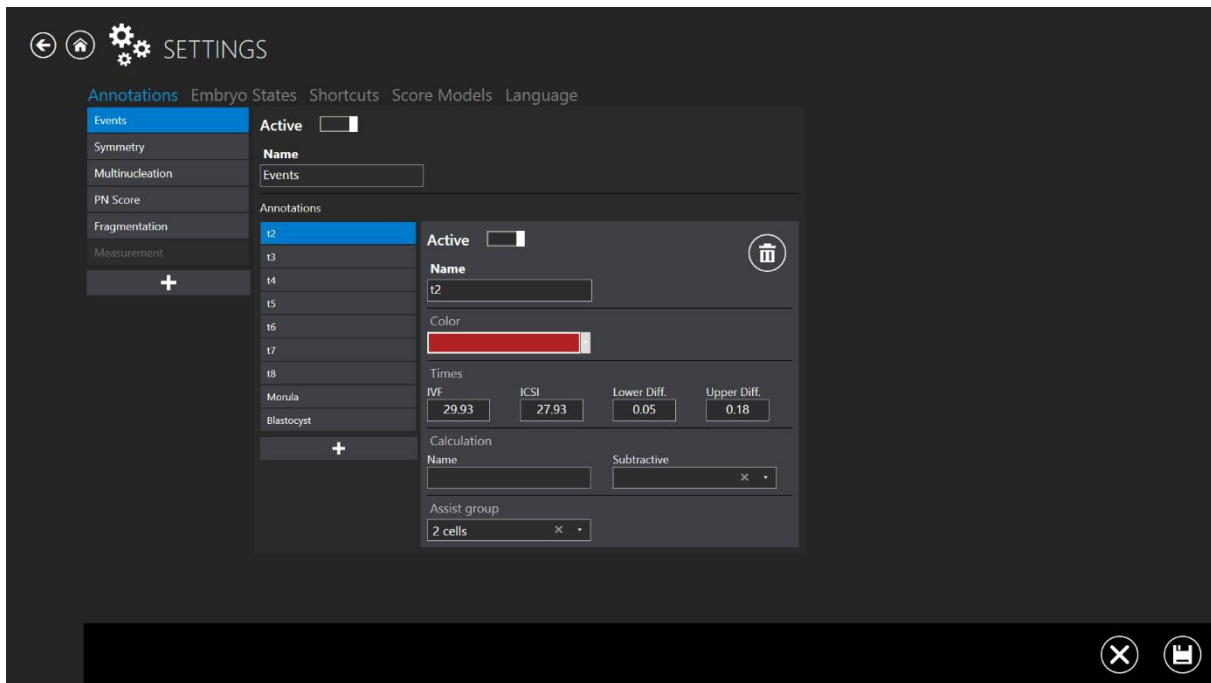


Afbeelding 7.137 Instellingen – annotaties – weergave gebeurtenissen

Het heeft de kleur rood gekregen (de kleur die wordt weergegeven in de context waarin t2 voorkomt). Ideale tijden zijn vastgesteld voor IVF en ICSI met een onder- en bovenverschil.

Hier zijn geen berekeningen aan de parameter t2 gekoppeld.

Als de gebruiker de tijd tussen t2 en t3 automatisch wil berekenen, worden de variabelen in het rekenveld ingevoerd. Vervolgens wordt de wiskundige functie geselecteerd, die de berekening zal uitvoeren. cc2 is bijvoorbeeld het tijdsverschil van 2 celdelingen in 3 cellen. De t3-celdelingstijdwaarde wordt afgetrokken van de t2-celdelingstijdwaarde. Op die manier berekent het systeem automatisch celcycli zodra de gebeurtenistijden zijn geannoteerd. Experimenteel berekende waarden kunnen ook worden ingesteld en gevolgd.

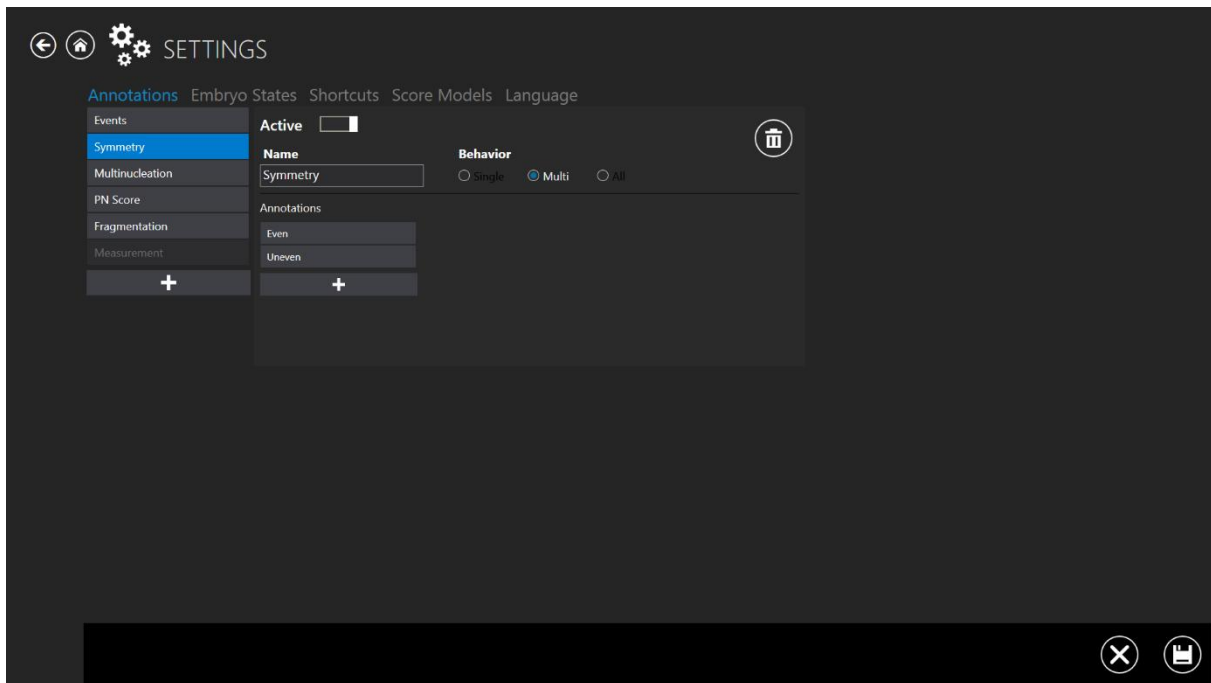

Afbeelding 7.138 Instellingen – annotaties – symmetrieweergave

Gebeurtenissen hebben ook gedrag dat bepaalt hoe ze reageren op annotaties. Zo komt t2 maar één keer voor, wat betekent dat het praktisch is om uit de lijst met gebeurtenissen te verdwijnen als er eenmaal een waarde (geannoteerd) aan is toegekend. Dit gedrag wordt "Single" genoemd.

Net als symmetrie kunnen andere dingen in verschillende stadia voorkomen en moeten ze selecteerbaar blijven nadat ze eenmaal zijn gebruikt. Dit gedrag wordt "Multi" genoemd.

De gebruiker kan ook een groep annotaties koppelen en als die wordt gekozen, verdwijnt de rest van de groep. Dit gedrag wordt "Alle" genoemd.

Er staan ook "Multinucleatie", "PN-score", "Fragmentatie" en "Meting"-annotaties vermeld.


 **Als het submenu "Annotaties" wordt verlaten zonder de wijzigingen op te slaan, verschijnt er een dialoogvenster dat de gebruiker informeert over niet-opgeslagen wijzigingen.**

7.6.2 Wijzigen/aanmaken Embryostatussen


In het submenu kan de gebruiker de reeds aangemaakte embryostatussen wijzigen of nieuwe toevoegen.

De creatie van een nieuwe embryostatus bestaat uit 4 statussen:

1. Mogelijkheid om de gecreëerde embryostatus te activeren/deactiveren.
2. "Sleutel" – één symbool, dat de geselecteerde put op een "schaal-kaart" aangeeft. Het moet uniek zijn en niet overlappen met bestaande.
3. "Naam" – gecreëerde naam van de embryostatus.
4. Kleurselectie embryostatus.

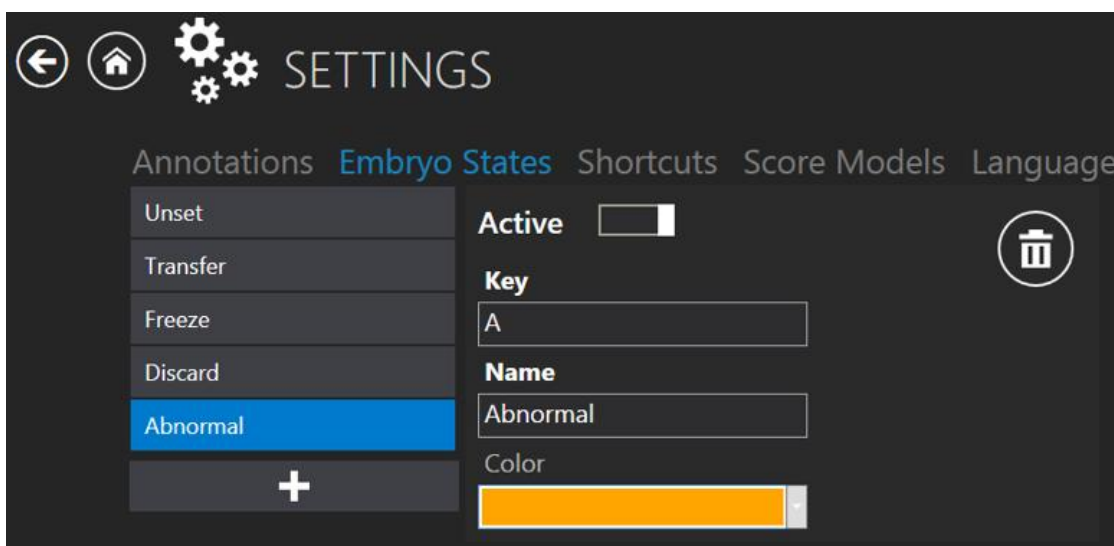

Afbeelding 7.139 Actieve nieuwe embryostatus

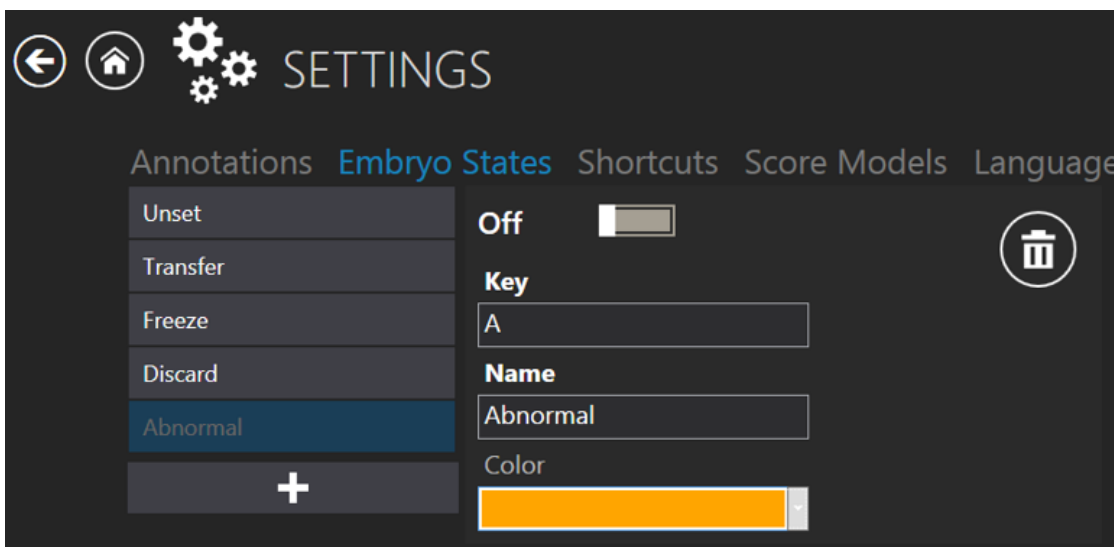


Afbeelding 7.140 Inactieve "abnormale" embryostatus

 Als het submenu "Embryostatussen" wordt verlaten zonder de wijzigingen op te slaan, verschijnt er een dialoogvenster dat de gebruiker informeert over niet-opgeslagen wijzigingen.

7.6.3 Sneltoetsen

Met het submenu "Sneltoetsen" kan de gebruiker verschillende sneltoetsen aanpassen voor een handigere gebruikerservaring en een betere workflow.

Sneltoetsen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën waarin ze kunnen worden gebruikt. Momenteel bestaan er slechts twee categorieën: "Patiënten" en "Time-lapse/Time-lapses". Deze categorieën komen overeen met gerelateerde menu's in de MIRI® TL Viewer Software, d.w.z. "Patiënten" en "Time-lapses".

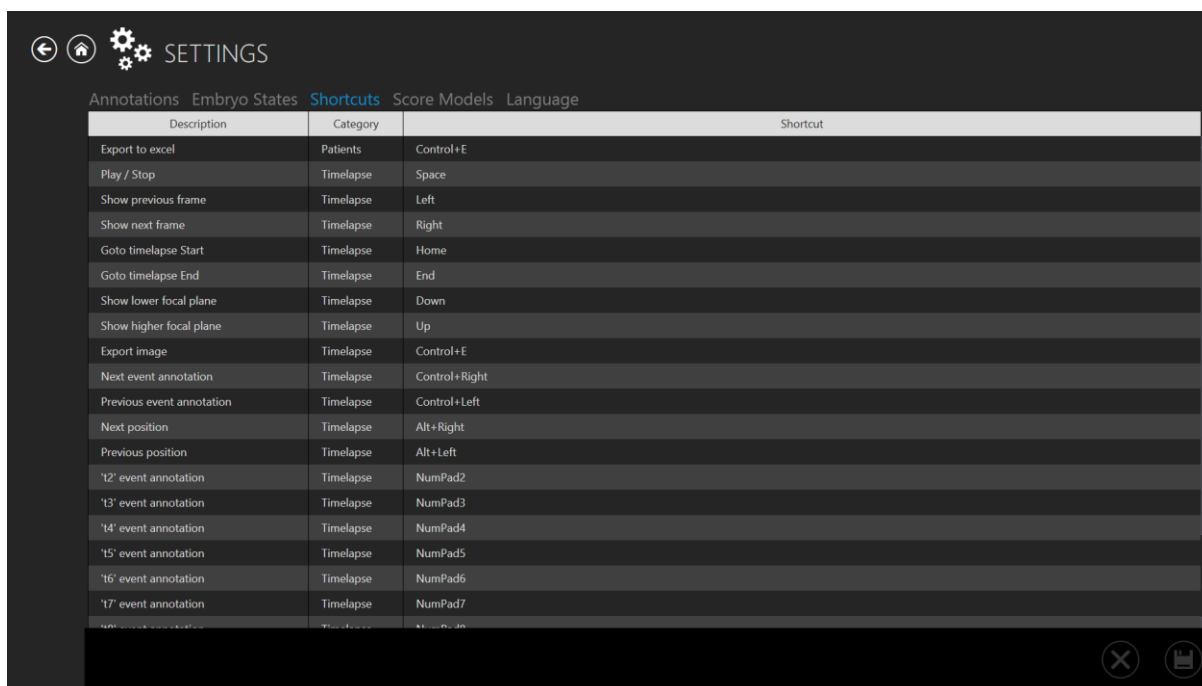


Afbeelding 7.141 Submenu Sneltoetsen

Om de bestaande sneltoetsen te wijzigen, dubbelklikt u op de sneltoets die u wilt wijzigen en voert u de gewenste combinatie in. Het is mogelijk om de volgende toetsen te gebruiken:

- De functietoetsen (F1-F12), navigatietoetsen ("Home", "End"), pijltoetsen en NumPad-toetsen kunnen worden gebruikt.
- Wijzigtoetsen, zoals "Control", "Alt" en "Shift", kunnen worden gebruikt om een toetsencombinatie in te voeren, zoals "Control+E", om de alfabetische toetsen te gebruiken.

Klik na het bewerken van de sneltoetsen op de knop "Opslaan" om de nieuwe sneltoets op te slaan. Het is ook mogelijk om de nieuwe sneltoets te verwijderen en terug te keren naar de vorige door op de "x"-knop te drukken.

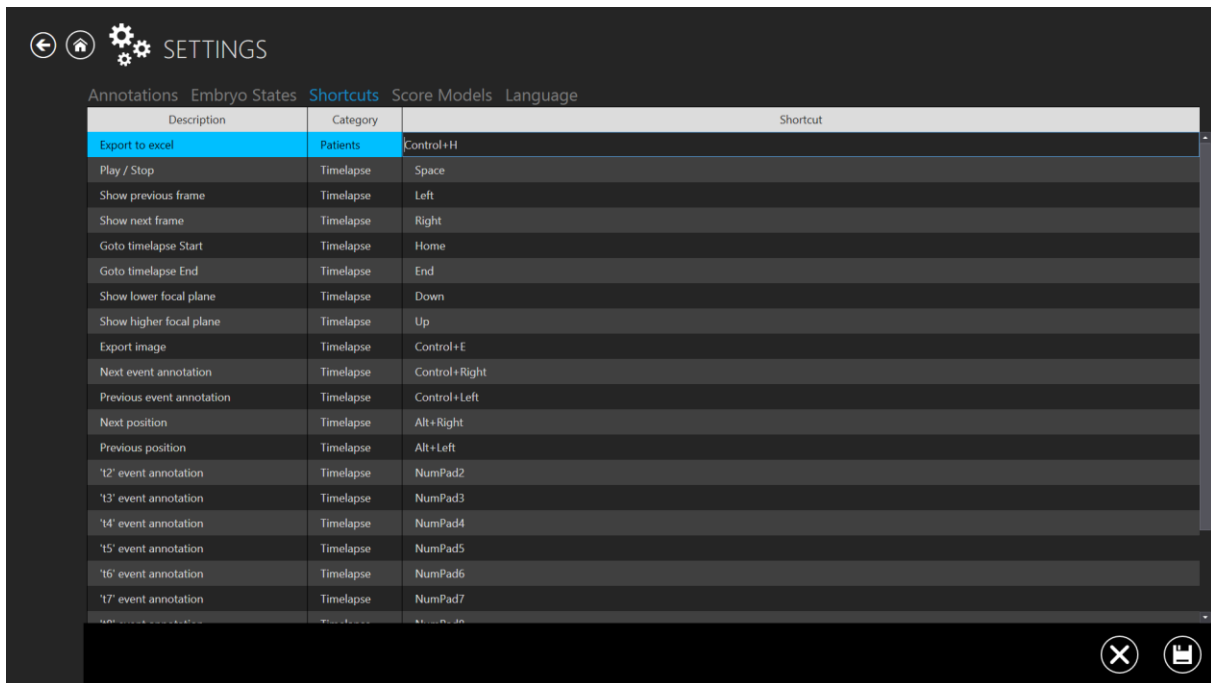

Afbeelding 7.142 Sneltoetsen bewerken


Door de beperkingen van Windows kan een sneltoets die alleen de letter van het alfabet bevat (bijvoorbeeld "A", "X", enz.) niet worden gebruikt.

Momenteel is het niet mogelijk om extra sneltoetsen te maken.

Gelijksoortige sneltoetsen kunnen **niet** binnen dezelfde categorie worden gebruikt. De sneltoets "Control+Right" kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt om tegelijkertijd naar de volgende gebeurtenisannotatie en de volgende positie te gaan (beide functies vallen onder de categorie "Time-lapse"). De sneltoets "Control+Right" **kan** echter worden gebruikt om te exporteren naar Excel, omdat de functie in een andere ("Patiënten") categorie staat.

Er verschijnt een bericht "Sneltoets 'xxx' is al in gebruik" als twee identieke sneltoetsen in dezelfde categorie worden gebruikt.

De sneltoets voor annotaties maakt geen nieuwe annotatie aan. In plaats daarvan stelt het de gebruiker in staat om direct naar het exacte tijdstip te springen waarop een bestaande annotatie is aangemaakt.

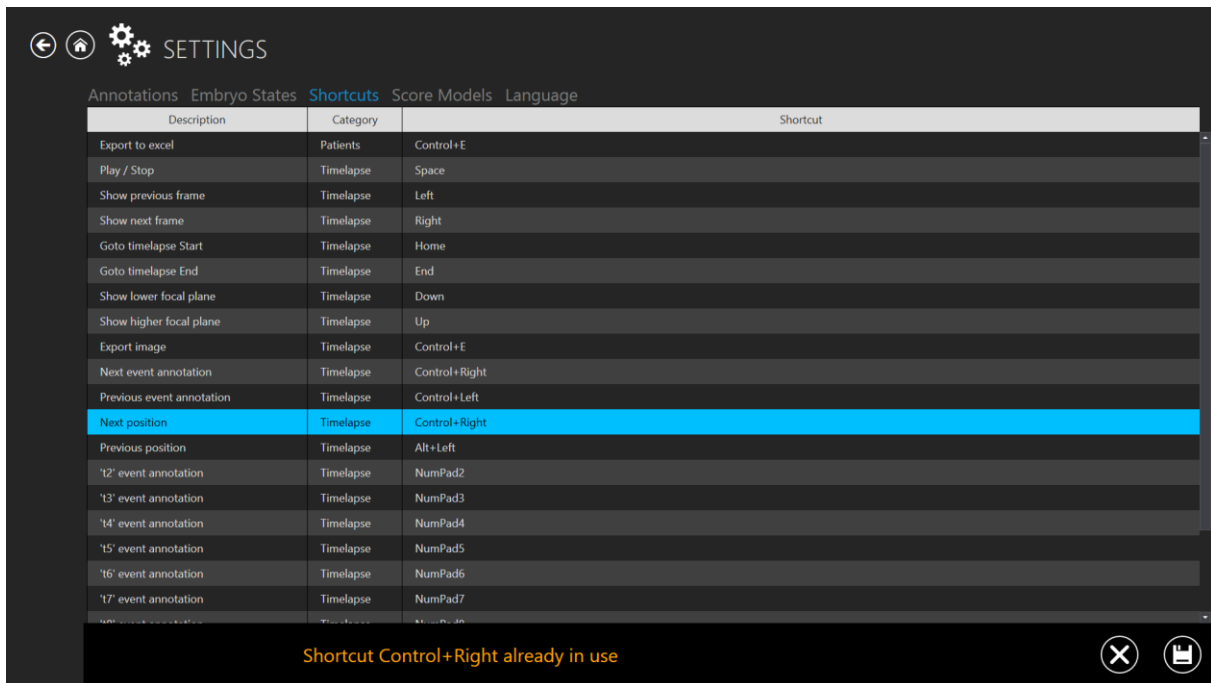


Afbeelding 7.143 Twee identieke sneltoetsen in gebruiksscenario

👉 Als het submenu "Sneltoetsen" wordt verlaten zonder de wijzigingen op te slaan, verschijnt er een dialogvenster dat de gebruiker informeert over niet-opgeslagen wijzigingen.


7.6.4 Aanmaken Scoremodellen

Er is een functie in het menu "Instellingen", genaamd "Scoremodellen".

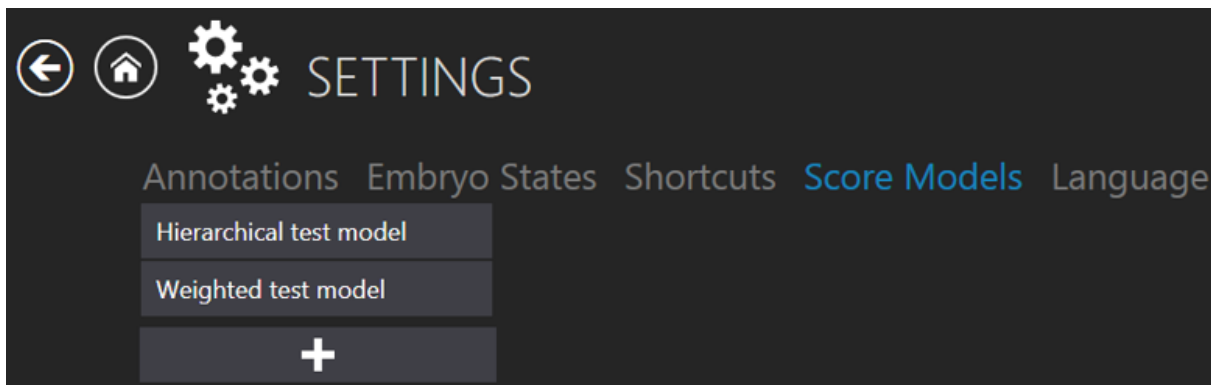

Afbeelding 7.144 Scoremodellen


Als u op de knop "+" drukt, wordt een scoremodel ingevoerd waar de gebruiker een gewenst embryoscoremodel kan aanmaken.

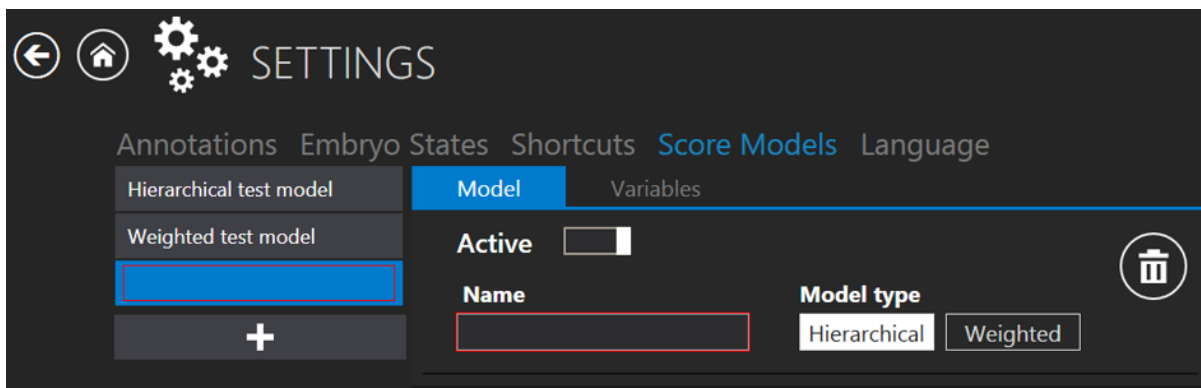


Afbeelding 7.145 Een nieuw venster voor het maken van een embryoscoremodel

Het modeltype kiezen

De gebruiker kan kiezen tussen twee modeltypes: "Hiërarchisch" en "Gewogen". Het belangrijkste verschil tussen deze modeltypen is dat "Hiërarchisch" grafisch wordt uitgezet terwijl "Gewogen" wordt berekend met behulp van een formule.

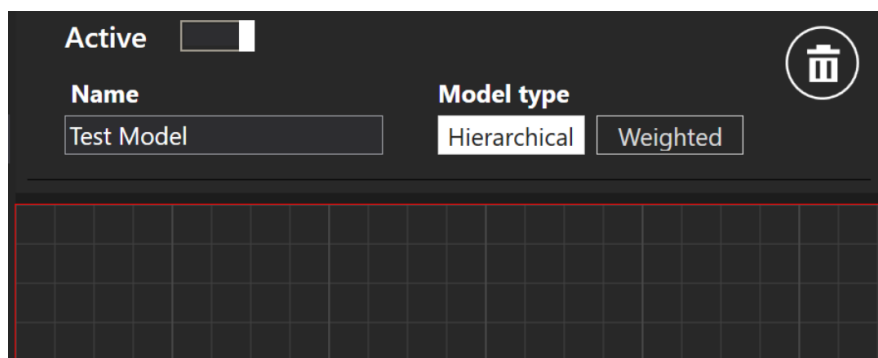


Afbeelding 7.146 "Hiërarchisch" modeltype

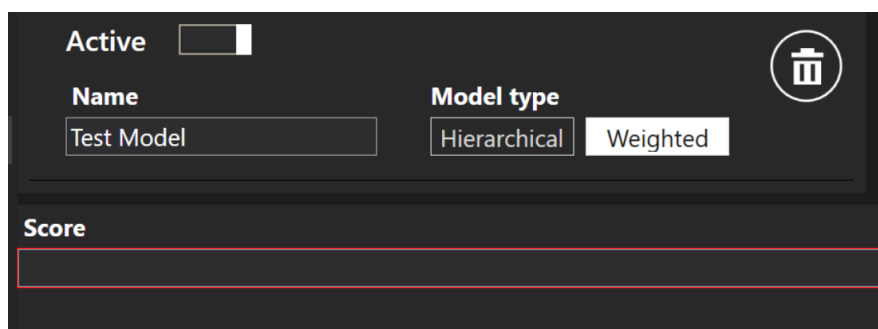

Afbeelding 7.147 "Gewogen" modeltype


Het model kan worden geactiveerd of gedeactiveerd door op de knop (rood gemarkeerd) in de onderstaande afbeelding te drukken.

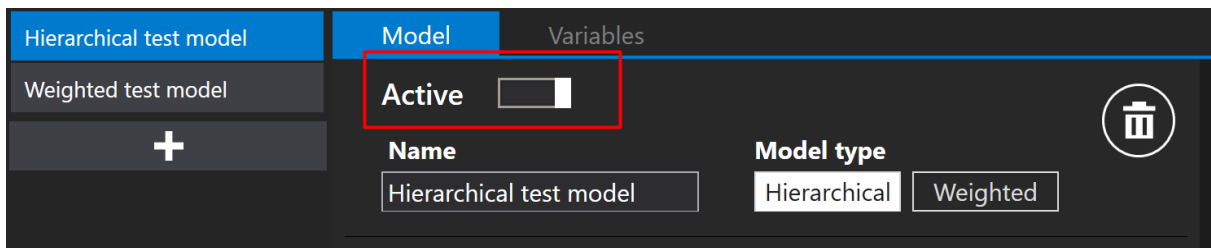

Afbeelding 7.148 Het geselecteerde scoremodel activeren of deactiveren


Variabelen maken

Naast de knop "Model" is er ook een knop "Variabelen". Door deze in te drukken wordt een lijst weergegeven met vooraf gedefinieerde variabelen die automatisch worden overgenomen uit de annotatielijst voor gebeurtenissenberekeningen.

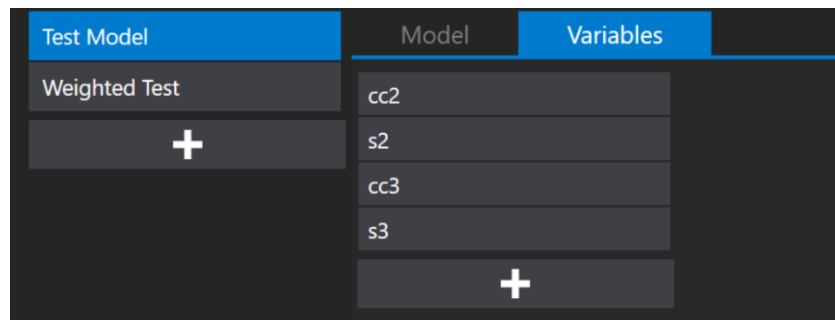

Afbeelding 7.149 Vermelde "Variabelen" uit de annotatielijst


Door op de knop "+" te drukken, kan de gebruiker een nieuwe variabele maken door de naam en formule in te voeren.

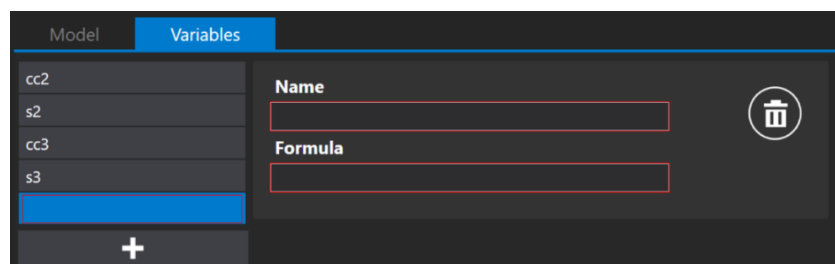

Afbeelding 7.150 Nieuwe variabele aanmaken


👉 De variablenaam mag niet uit symbolen bestaan, bijvoorbeeld – "+", "-", "/", enz. Als het symbool wordt gebruikt, wordt het vak rood omcirkeld.

Door op de letter "e" in het vak "Formule" te drukken, wordt een lijst met annotaties voor "Gebeurtenissen" weergegeven, waar de gebruiker de gewenste gebeurtenis kan kiezen in plaats van alles op te schrijven.

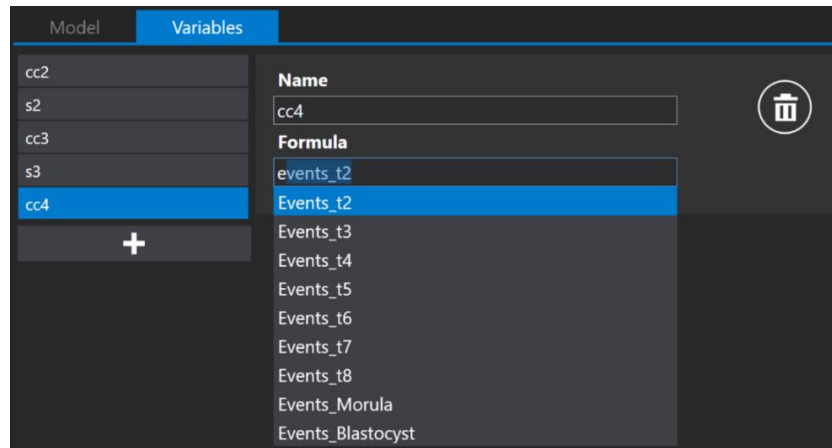


Afbeelding 7.151 Nieuwe variabele aanmaken

👉 Wanneer het veld "Formule" tekst bevat om de weergave van de lijst met gebeurtenissen op te roepen, moet de toets "Spatie" worden gebruikt. Anders moet de gebruiker de naam van de annotatiegroep, het onderstrepingssteken en de annotatienaam schrijven (bijv. `events_t2`).

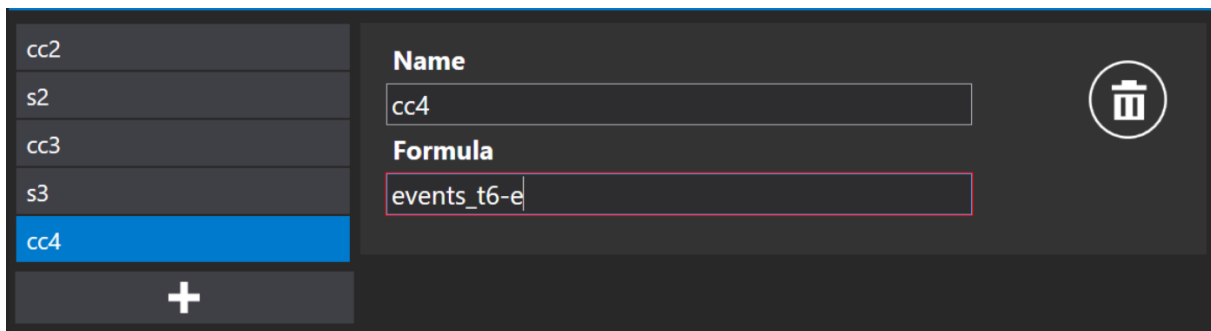

Afbeelding 7.152 Formule maken zonder op de "spatie"-toets te drukken

👉 Het rode vierkantje rond "Formule" zal verdwijnen als de variabele formule correct is geschreven.

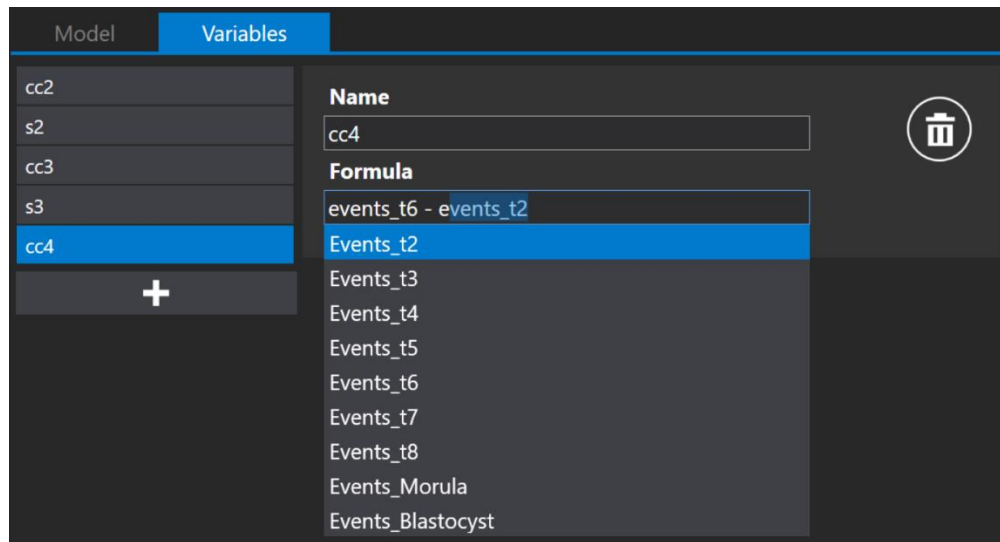


Afbeelding 7.153 Formule maken bij het indrukken van de "spatie"-toets

 Als gebruikers aanvullende variabelen maken, zullen ze alleen van toepassing zijn op een specifiek embryoscoremodel. Bij het maken van een nieuw embryoscoremodel moeten variabelen ook apart worden aangemaakt.

Druk op de knop "Opslaan" onderaan het scherm. Als alles correct is ingevuld, verschijnt het bericht "Opgeslagen"; zo niet, dan verschijnt het bericht "Scoremodelvariabelen bevat fouten".

7.6.4.1 Hiërarchische scoremodellen


Het eerste wat de gebruiker moet doen, is een naam invoeren voor het hiërarchische embryoscoremodel. Na het invoeren van de naam zal het rode vierkantje rond "Naam" verdwijnen.

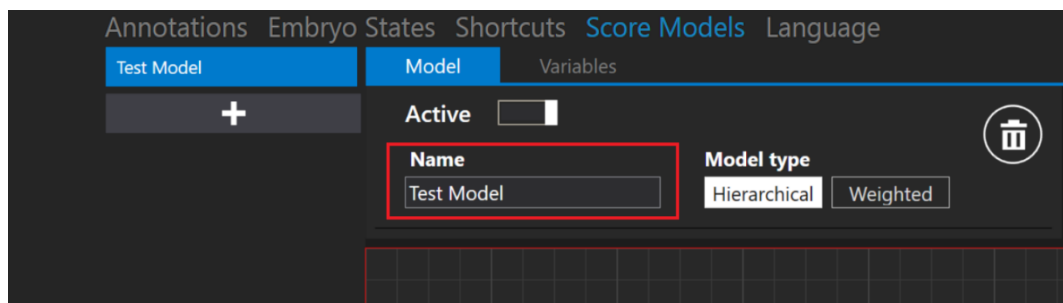

Afbeelding 7.154 Naamgeving van het hiërarchische embryoscoremodel


7.6.4.1.1 Aanmaken van voorwaardelijk knooppunt

Onder het naamveld bevindt zich een gebied waar de gebruiker knooppunten kan plaatsen. Door met de rechtermuisknop op het gebied te drukken, wordt een lijst met mogelijke acties weergegeven. De gebruiker kan een voorwaardelijk knooppunt of een resultaatknooppunt toevoegen of het geselecteerde knooppunt verwijderen (alleen van toepassing wanneer een knooppunt is geselecteerd).

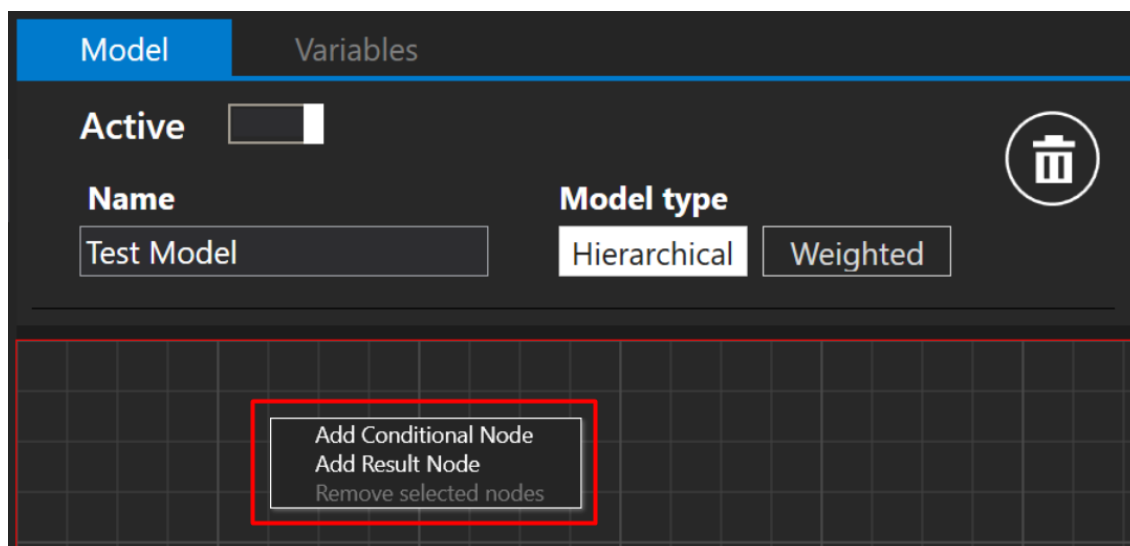

Afbeelding 7.155 Nieuwe voorwaardelijke of resultaatknooppunt maken

Een "Voorwaardelijke"-invoer verschijnt wanneer op "Voorwaardelijk knooppunt toevoegen" wordt gedrukt.

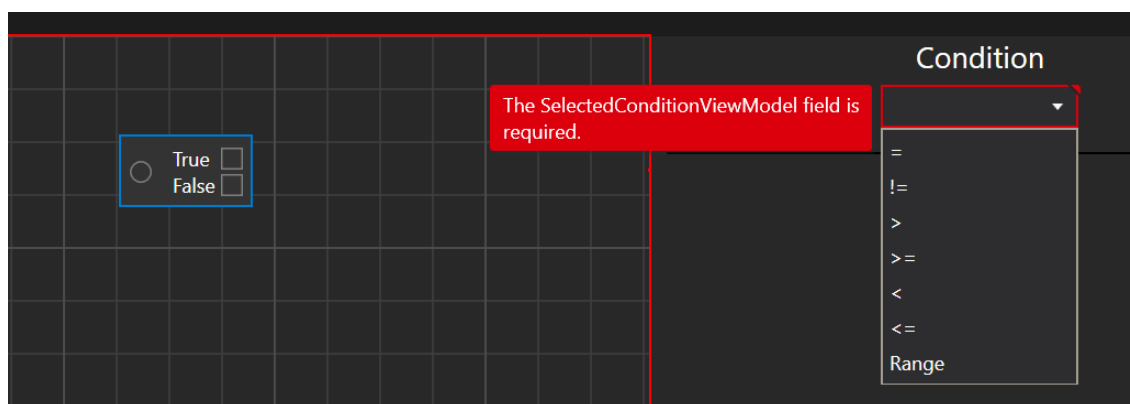


Afbeelding 7.156 Beschikbare voorwaarden

De gebruiker kan kiezen uit zeven voorwaarden: **gelijk aan** (symbool "="), **niet gelijk aan** (symbool "!="), **meer dan** (symbool ">"), **meer dan of gelijk aan** (symbool ">="), **minder dan** (symbool "<"), **minder dan of gelijk aan** (symbool "<=") en **Bereik**.


Wanneer de gewenste voorwaarde is gekozen, wordt automatisch een lijst weergegeven met "Variabelen" en annotaties.

 Het systeem kiest automatisch de eerste variabele uit de lijst!

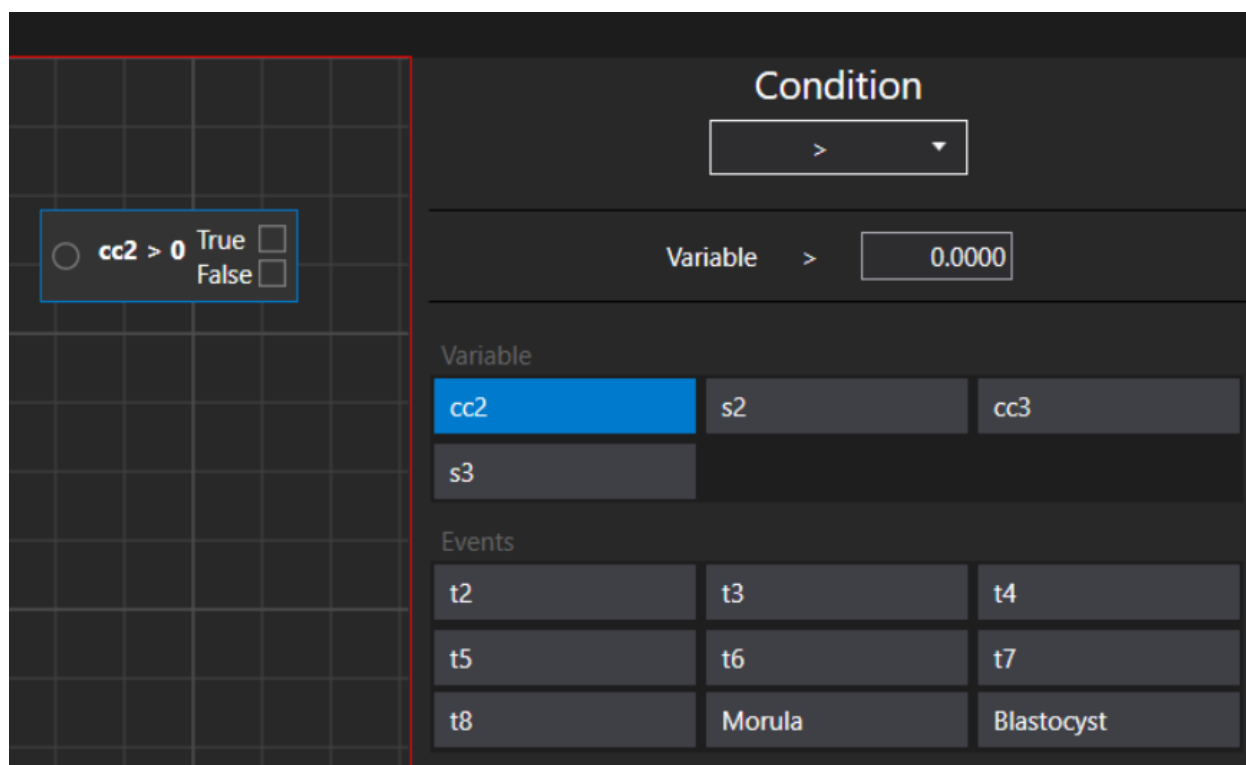

Afbeelding 7.157 "Meer dan"-voorwaarde en annotatie-opties

 Alleen annotaties met de groepsgedragoptie "Enkel" of "Alle" worden in dit menu weergegeven. Raadpleeg het gedeelte 7.6.1 "Annotatie wijzigen/aanmaken" van de Gebruikershandleiding voor meer informatie over het groepsgedrag.

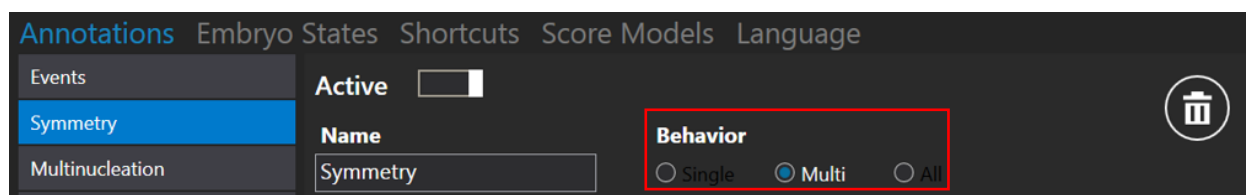


Afbeelding 7.158 Mogelijke annotaties "Gedrag"-opties

 Een hiërarchisch scoremodel kan geen twee afzonderlijke voorwaardelijke knooppunten in één scoremodel hebben. Het kan meerdere voorwaardelijke knooppunten hebben, maar ze moeten aan elkaar worden gekoppeld.


7.6.4.1.2 Aanmaken resultaatknooppunt

Laten we instellen dat de variabele "cc2" meer dan 10 is. ("cc2"-variabele betekent de hoeveelheid tijd die verstrijkt tussen de "t2"-gebeurtenis en de "t3"-gebeurtenis).

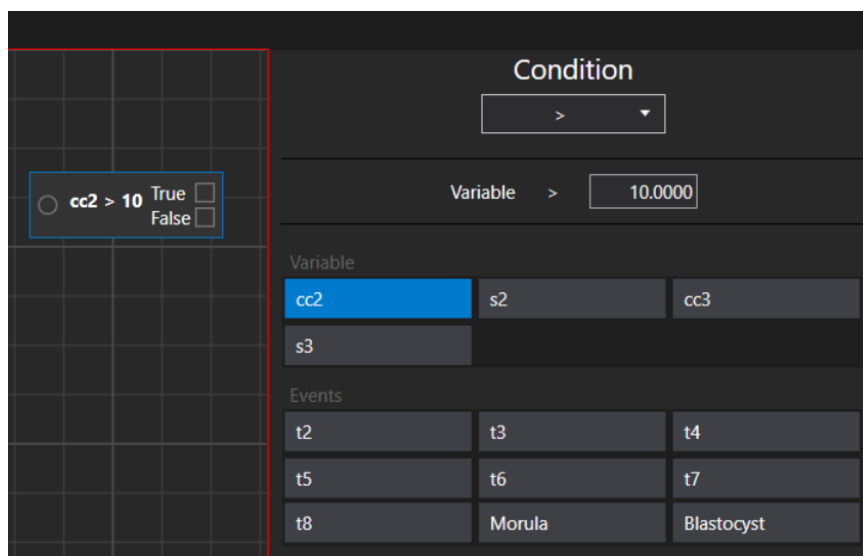


Afbeelding 7.159 De variabele "cc2" is ingesteld op meer dan 10

Wanneer het voorwaardelijke knooppunt is gemaakt, is de volgende stap het maken van een resultaatknooppunt, wat de gebruiker kan doen door met de rechtermuisknop op het gebied van een knooppunt te drukken en de actie "Resultaatknooppunt toevoegen" te kiezen.

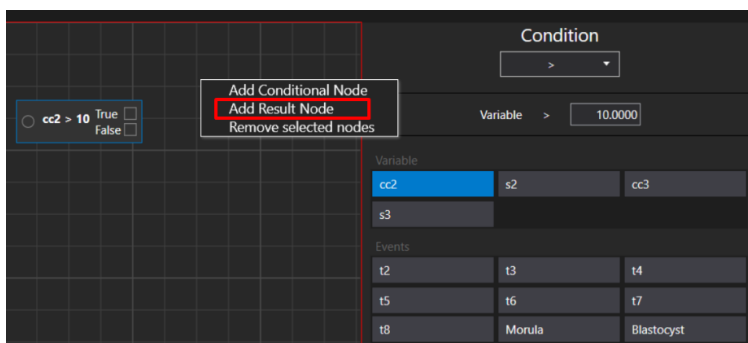


Afbeelding 7.160 Venster "Resultaatknooppunt toevoegen"

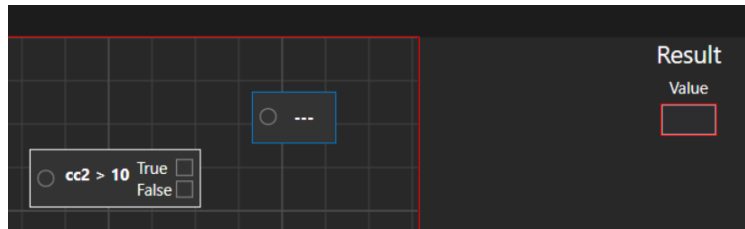

Afbeelding 7.161 Gemaakt resultaatknooppunt zonder ingestelde "waarde"

De waarde van het resultaatknooppunt kan worden gemaakt volgens de voorkeuren van elke gebruiker. In dit geval zullen we het "Acceptabel" instellen. Het wordt ingesteld als een "Juist"-waarde. Laten we voor de waarde "Fout" een resultaatknooppunt "Niet acceptabel" maken.

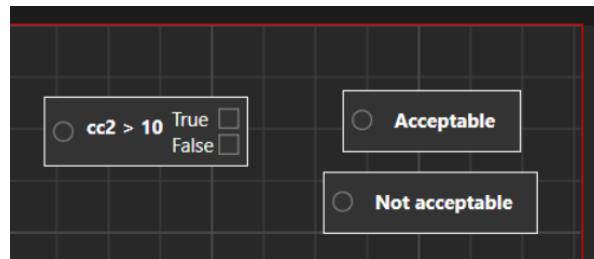

Afbeelding 7.162 Voorwaardelijk knooppunt met 2 resultaatknooppunten

Nadat de resultaatknooppunten zijn gemaakt, moet het voorwaardelijke knooppunt aan elk resultaatknooppunt worden gekoppeld. Het kan worden gekoppeld door met de linkermuisknop op de vierhoek van het voorwaardelijke knooppunt te drukken en vervolgens de verschenen lijn naar de cirkel in het resultaatknooppunt te verplaatsen.




Afbeelding 7.163 Voorwaardelijk knooppunt met verbonden "Acceptabel" resultaatknooppunt

 In het **ACTIEVE** scoremodel moeten "Voorwaardelijk knooppunt" en "Resultaatknooppunten" gekoppeld worden om het scoremodel op te slaan. Als wordt geprobeerd om het model op te slaan zonder deze knooppunten te koppelen, dan verschijnt de melding "Scoremodel bevat fouten". Om het scoremodel op te slaan tijdens het bewerken, moet het worden gedeactiveerd.

 Het embryoscoremodel wordt alleen opgeslagen als het is gemaakt volgens de hierboven beschreven stappen en op de opgeslagen knop aan de rechterkant is gedrukt. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht door het bericht "Opgeslagen".


7.6.4.1.3 De voorwaardelijke en resultaatknooppunten verwijderen

De koppeling tussen de voorwaardelijke en resultaatknooppunten kan worden verwijderd door de muis over de gemaakte regel te bewegen. Als het kleine blauwe lijntjes worden, klikt men erop met de linkermuisknop.

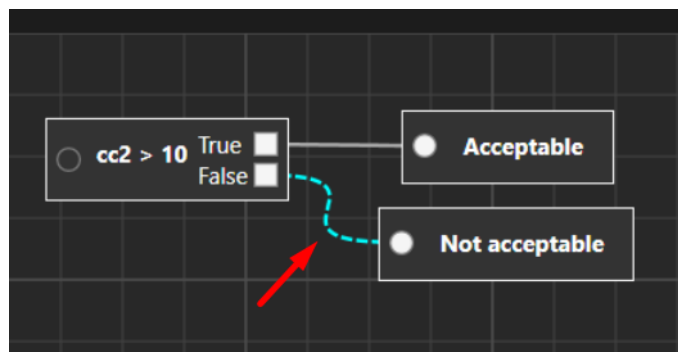


Afbeelding 7.164 De koppeling tussen voorwaardelijke en resultaatknooppunten verwijderen

Het voorwaardelijke of resultaatknooppunt kan worden verwijderd door met de rechtermuisknop op het geselecteerde knooppunt te drukken. Een mogelijke actie "Knooppunt verwijderen" wordt weergegeven.

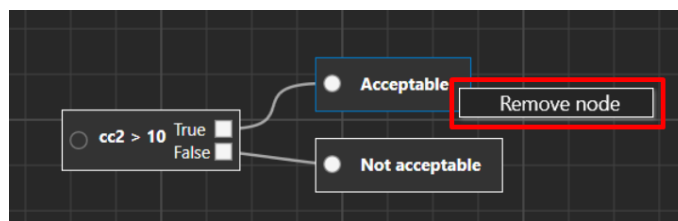


Afbeelding 7.165 "Acceptabel" resultaatknooppunt verwijderen

De gebruiker kan ongewenste knooppunten op twee verschillende manieren verwijderen. De eerste methode is door de muis te bewegen en alle knooppunten te markeren.

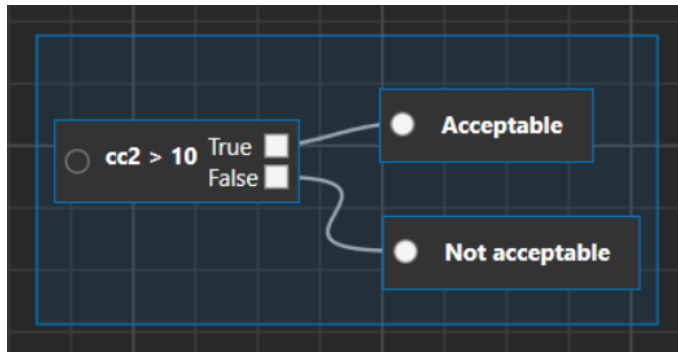

Afbeelding 7.166 Alle knooppunten selecteren

Nadat de knooppunten zijn geselecteerd (deze worden gemarkeerd met een blauwe lijn eromheen), drukt u op de rechtermuisknop in het celvenster en kiest u de optie "Geselecteerde knooppunten verwijderen".

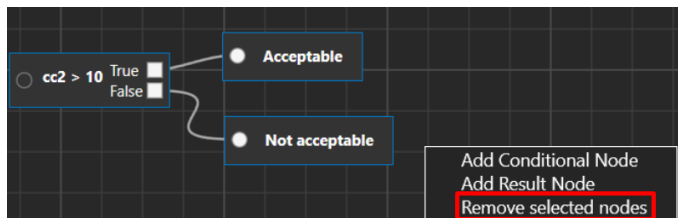


Afbeelding 7.167 Alle geselecteerde knooppunten verwijderen

De tweede methode is door één voor één op de gewenste knooppunten te klikken terwijl u de "Ctrl" -toets ingedrukt houdt. Nadat alle knooppunten zijn geselecteerd, herhaalt u de bovenstaande verwijderingsstap.


7.6.4.1.4 Extra functies

Door de rechtermuisknop op de celbox ingedrukt te houden, kan de gebruiker de weergave van de embryoscore verplaatsen.

De gebruiker kan de weergave maximaliseren of minimaliseren door het scrollwiel van de muis te gebruiken.

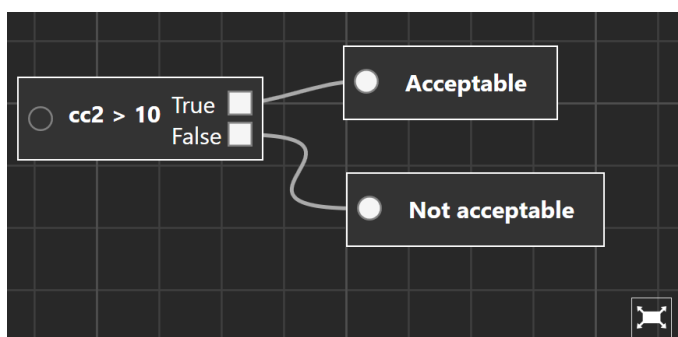


Afbeelding 7.168 Gemaximaliseerde embryoscore-modelweergave

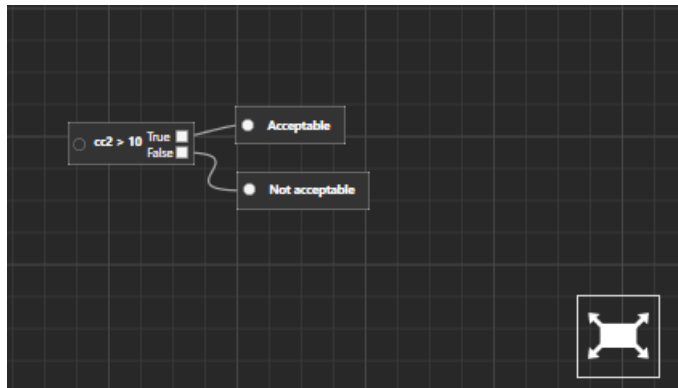



Afbeelding 7.169 Geminimaliseerde embryoscore-modelweergave

Door op de knop "Reset" te drukken, keert de weergave terug naar de oorspronkelijke aanmaakfase.

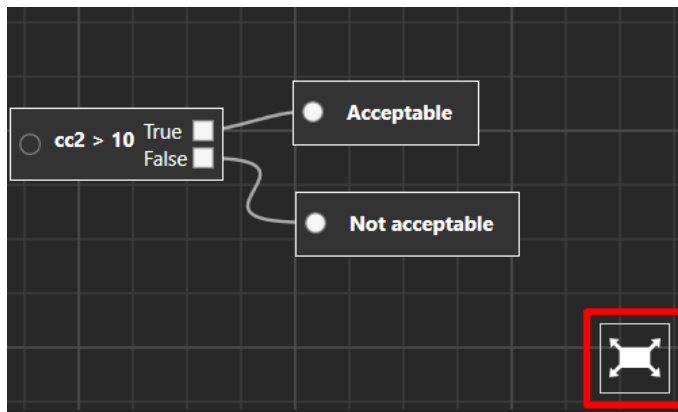

Afbeelding 7.170 De initiële scoremodelweergave resetten


De knooppunten kunnen in alle celvensters worden verplaatst door ze te selecteren en eenvoudig te verplaatsen met de muistoets. Meerdere knooppunten (geselecteerd terwijl de "Ctrl"-toets ingedrukt wordt gehouden) zullen gelijktijdig bewegen. De linklijn van de node wordt automatisch aangepast.

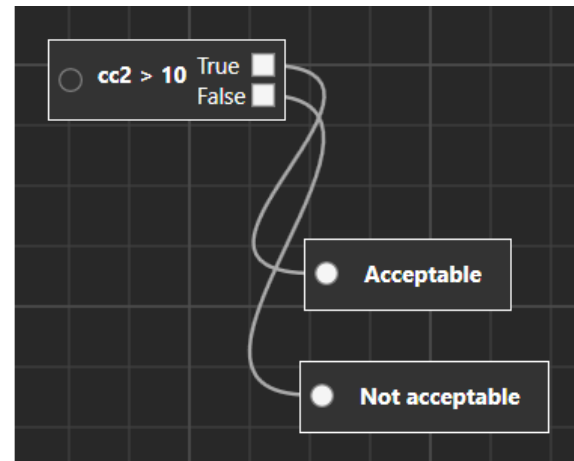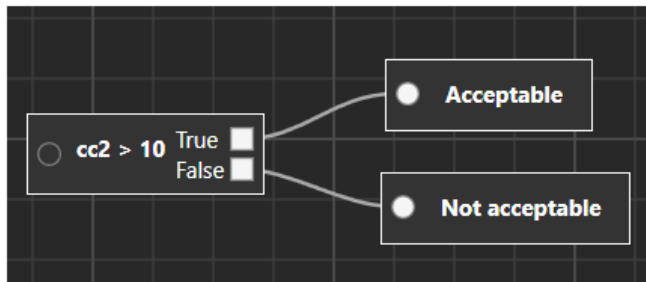

Afbeelding 7.171 De resultaatknooppunten tegelijkertijd verplaatsen


7.6.4.2 Gewogen scoremodellen

Het eerste wat de gebruiker moet doen, is een naam invoeren voor het gewogen embryoscoremodel. Nadat de naam is ingevoerd, verdwijnt het rode vierkant rond "Naam".

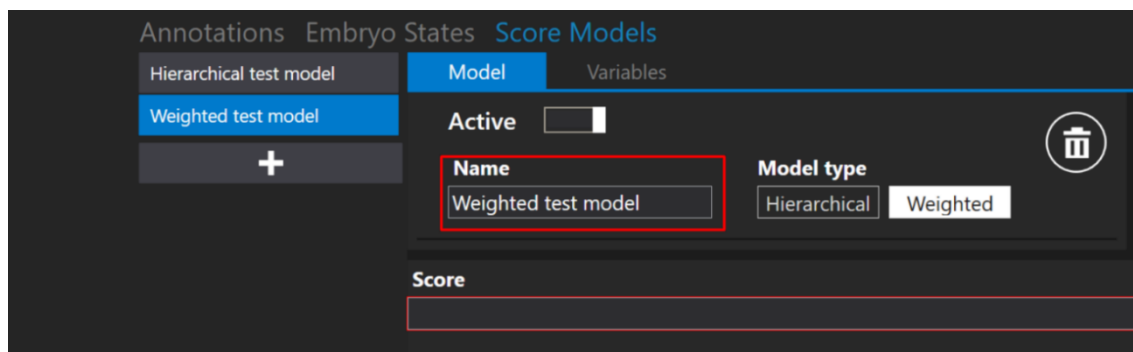


Afbeelding 7.172 Een naam geven aan het model voor de gewogen embryoscore

Door op de letter "e" in het vak "Score" te drukken, verschijnt er een lijst waar de gebruiker de gewenste gebeurtenis kan kiezen in plaats van alles op te schrijven.

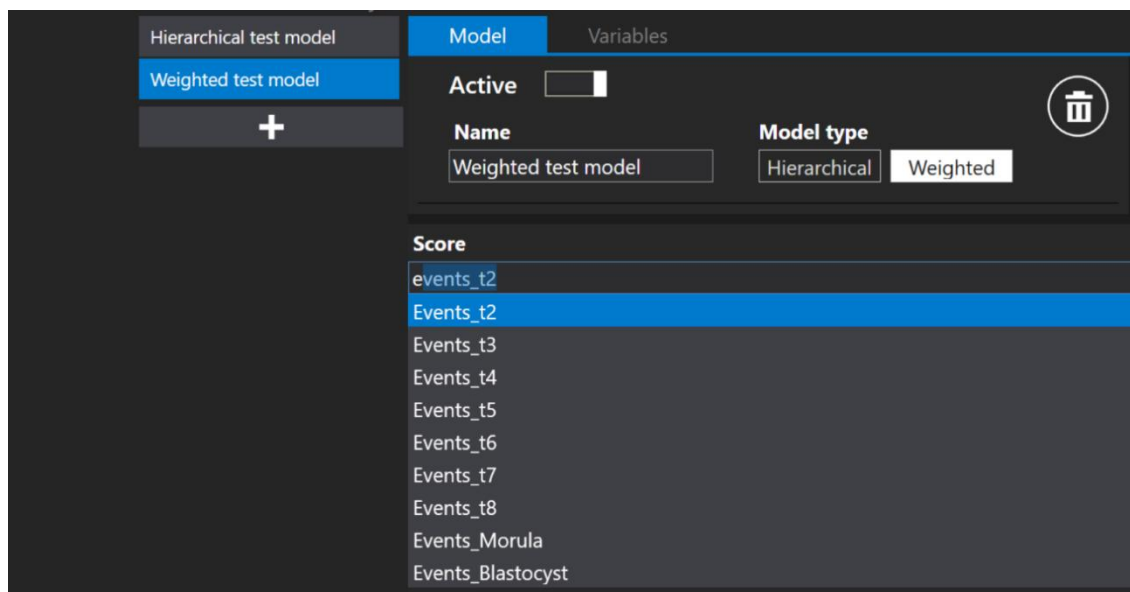


Afbeelding 7.173 Nieuwe score aanmaken

Dezelfde regels zijn van toepassing op het maken van een "Score"-formule als bij het maken van de "Variabelen"-formule. Lees voor meer informatie de sectie "Variabelen maken".

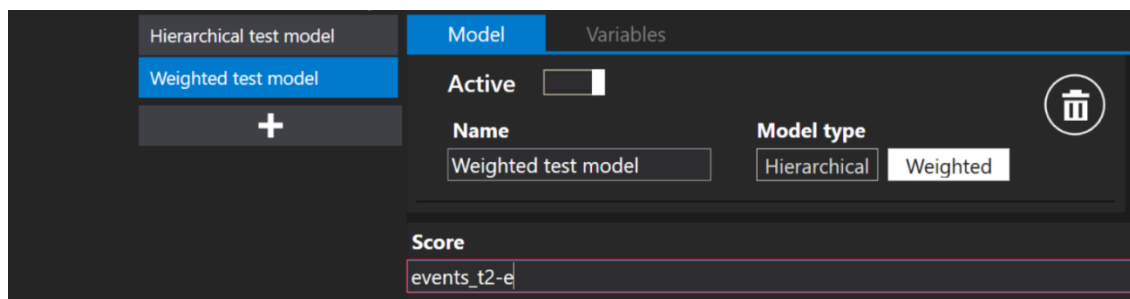

Afbeelding 7.174 Nieuwe score aanmaken zonder de spatietoets te gebruiken


Het rode vierkantje rond "Score" zal verdwijnen als de scoreformule correct is geschreven.

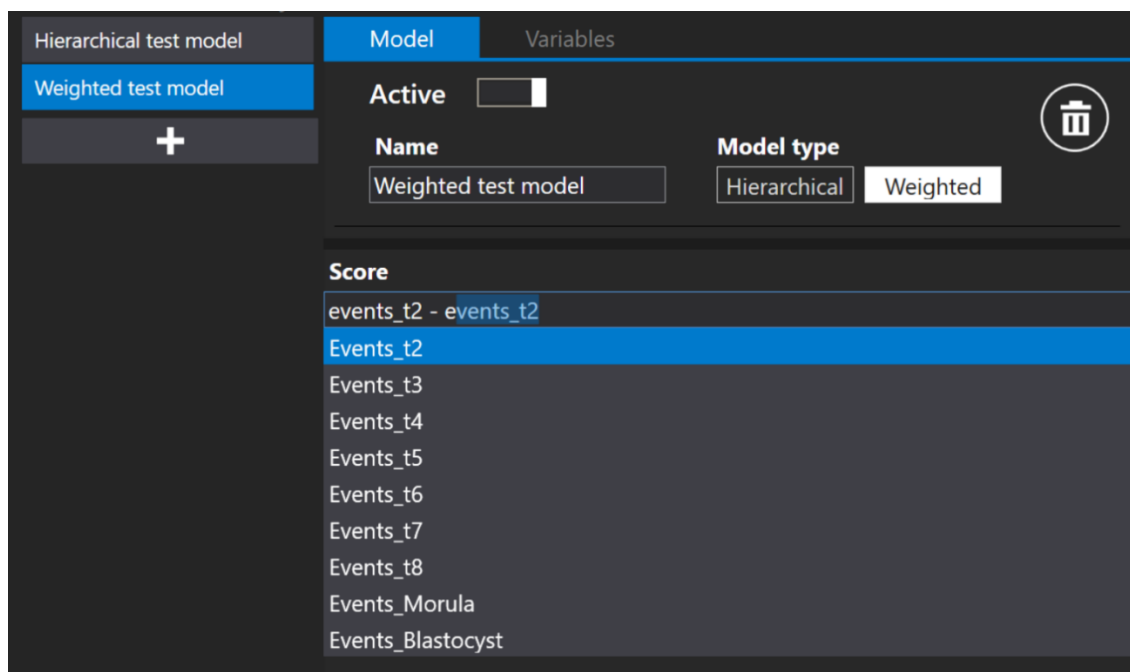

Afbeelding 7.175 Nieuwe score aanmaken met de "Spatie"-toets

7.6.4.3 De scoremodellen verwijderen

Het gemaakte embryoscoringmodel kan worden verwijderd door op de knop "Prullenbak" naast het "Modeltype" te drukken.

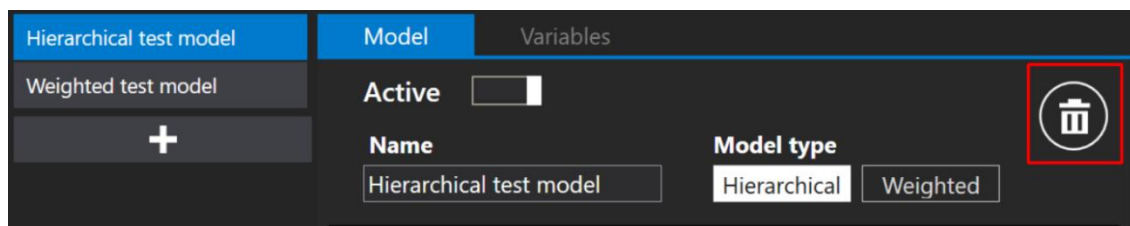

Afbeelding 7.176 Knop "Prullenbak" om het aangemaakte embryoscoringmodel te verwijderen

Het embryoscoringmodel kan niet worden verwijderd als het is toegewezen aan een specifieke time-lapse. Onder aan de weergave verschijnt het bericht "Scoremodel kan niet worden verwijderd".




Afbeelding 7.177 Foutmelding bij het verwijderen van het embryoscoremodel dat is toegewezen aan een time-lapse

👉 De "x"-knop onderaan het scherm keert terug naar de hoofdweergave "Scoremodellen".

👉 Als het submenu "Scoremodellen" wordt verlaten zonder de wijzigingen op te slaan, verschijnt er een dialoogvenster dat de gebruiker informeert over niet-opgeslagen wijzigingen.

7.6.5 Taal


In het submenu "Languages" kan de gebruiker kiezen tussen verschillende weergavetalen die worden ondersteund in de MIRI® TL Viewer Software.

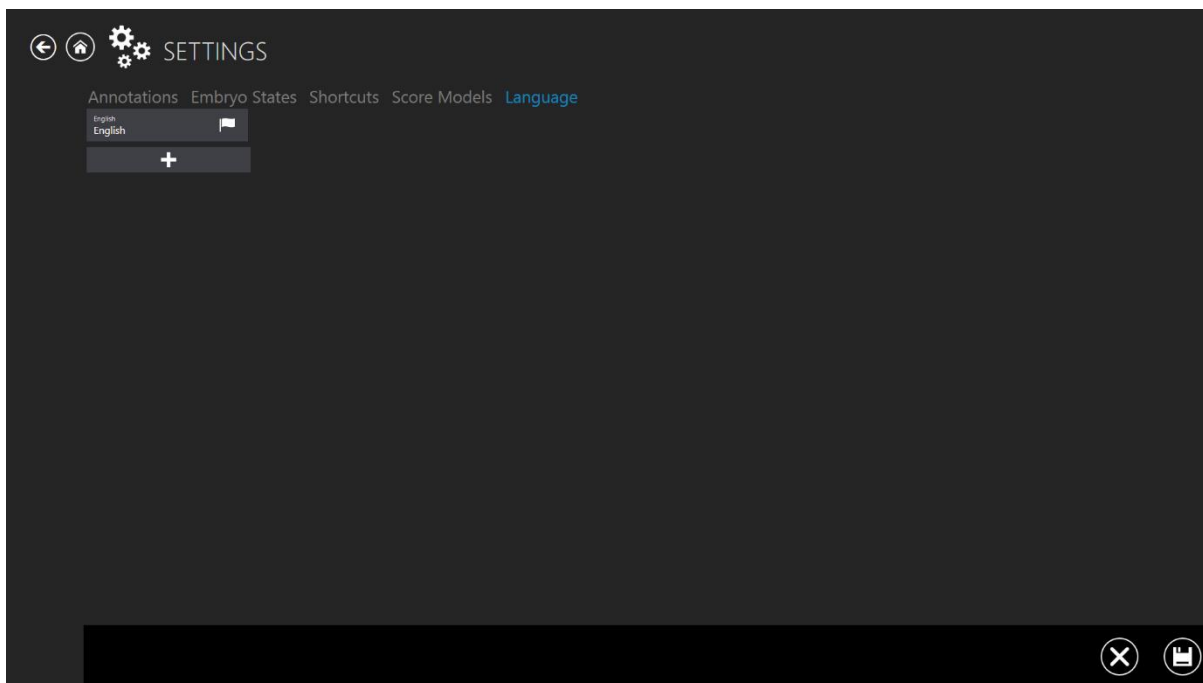


Afbeelding 7.178 Submenu Taal

 Een "Vlag" geeft de momenteel ingeschakelde taalloptie aan.

Druk op de knop "+" om een extra taalloptie toe te voegen. Er wordt een menu met beschikbare talen weergegeven. Kies de gewenste taalloptie en klik op de knop "✓" om de taalkeuze op te slaan.

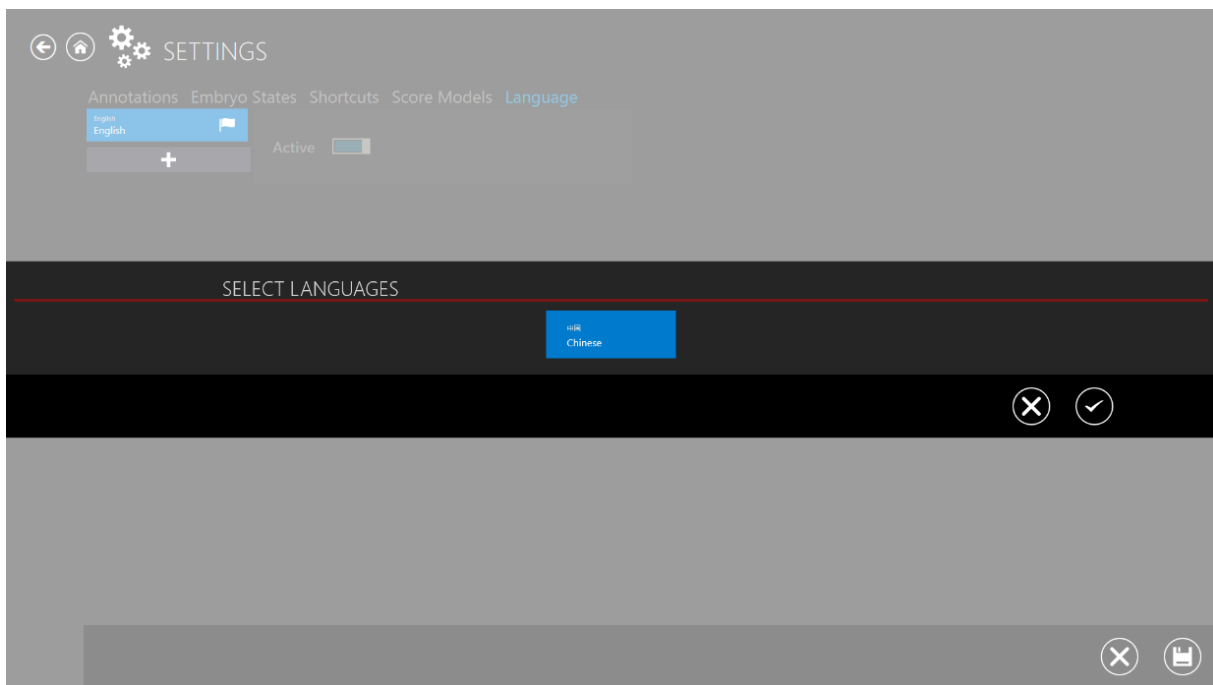


Afbeelding 7.179 Taalopties

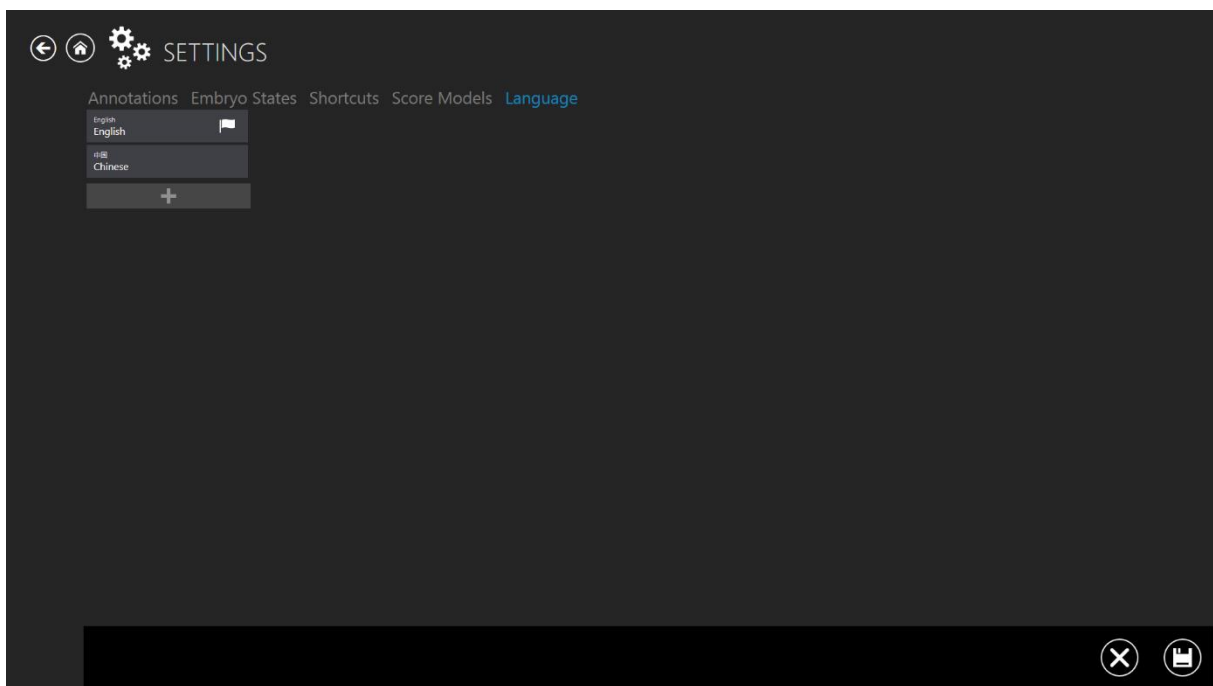

Afbeelding 7.180 Extra taal gekozen

 Alleen de Chinese taaloptie is beschikbaar in versie 1.22.2.0 van de softwareversie.


Om de toegevoegde taal te activeren, klikt u op de gewenste optie en drukt u op het vakje bij "Inactief". De nieuwe taal is ingeschakeld. Klik op de knop "Opslaan" in de rechterbenedenhoek om de weergavetaal te wijzigen.

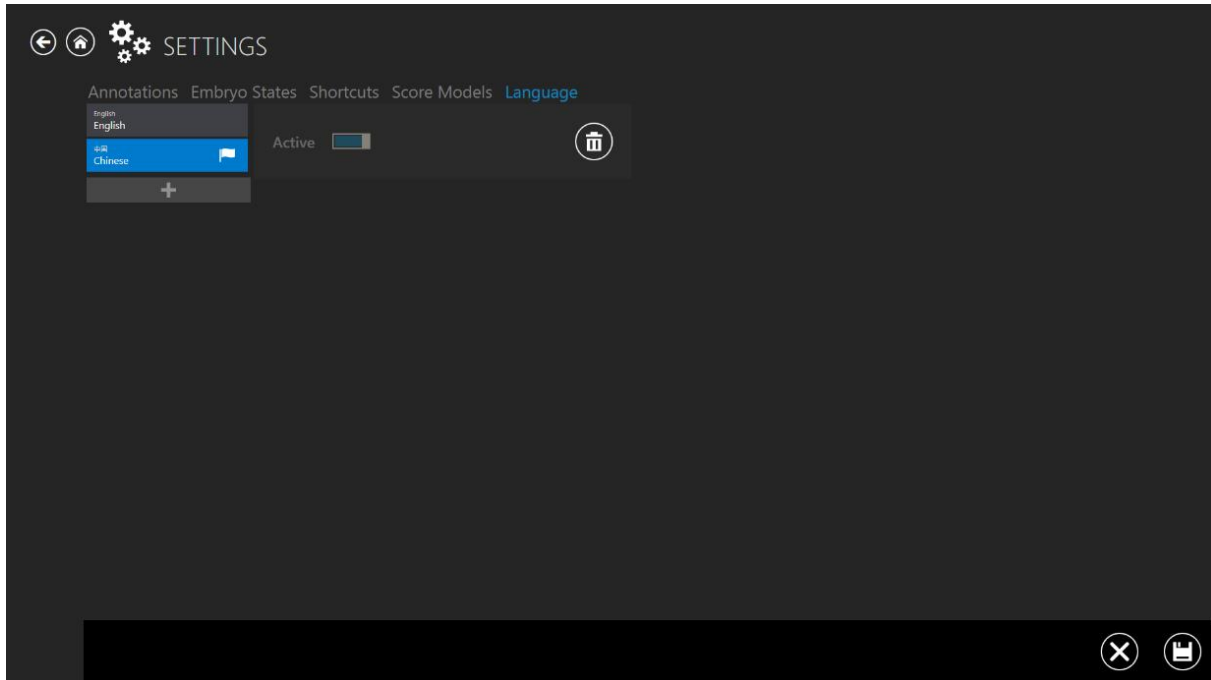


Afbeelding 7.181 Extra taal ingeschakeld

Na het opslaan van de nieuwe taaloctie verschijnt het menu in de taal van uw keuze. Daarnaast wordt een meertalig dialoogvenster beschikbaar in de "Hoofdweergave" voor een handigere plek om te kiezen tussen verschillende talen.

 Als het submenu "Talen" wordt verlaten zonder de wijzigingen op te slaan, verschijnt er een dialoogvenster dat de gebruiker informeert over niet-opgeslagen wijzigingen.

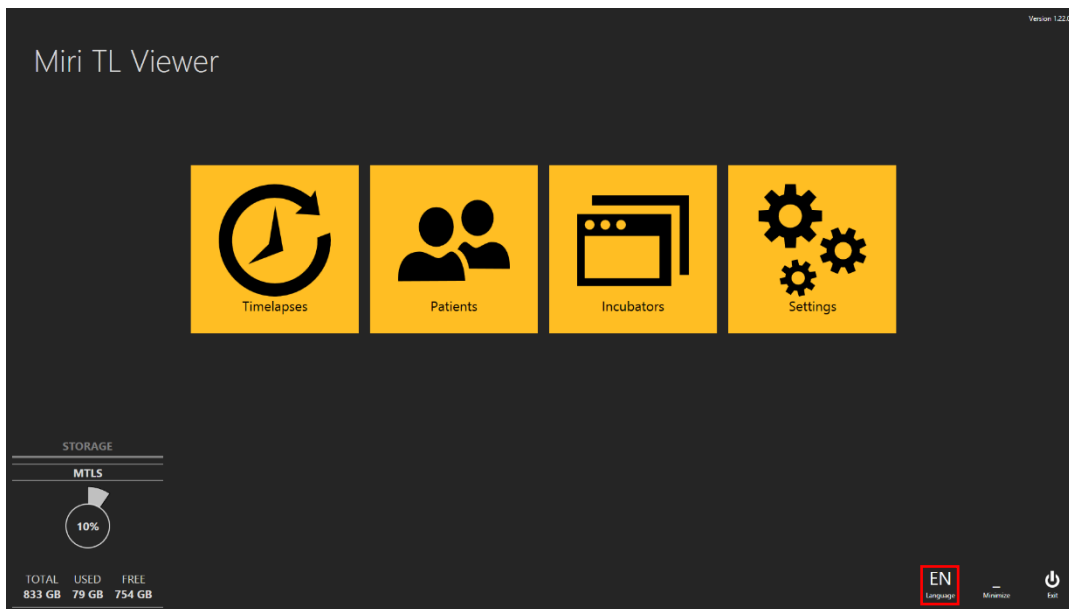

Afbeelding 7.182 Hoofdweergave met de meertalige optie

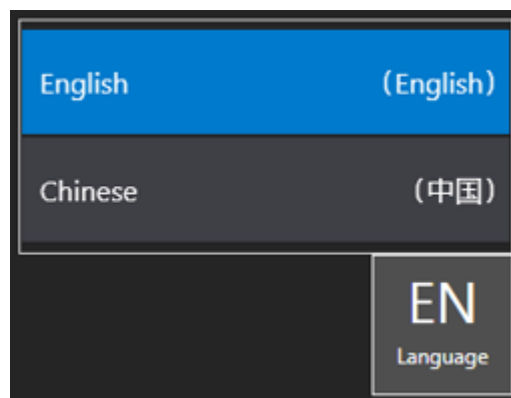

Afbeelding 7.183 Meertalig dialoogvenster

8 Technische assistentie

Neem voor meer informatie contact op met Esco Medical Technologies, UAB of de plaatselijke vertegenwoordiger.

9 Gegevensbeheer en back-up

9.1 Aanbevelingen

Om het risico op gegevensverlies als gevolg van hardwarefouten, bestands corruptie of ongeautoriseerde wijzigingen te beperken, moet de gebruikersinstelling de volgende onderhoudsprocedures voor gegevens implementeren.

1. **Back-up van gegevens**

Het systeem genereert automatisch een back-up van de patiënten- en incubatiedatabases op de lokale harde schijf.

Het systeem voert **geen** automatische back-ups uit van de SQLite-afbeeldingsdatabases.

Neem contact op met de servicedienst van Esco Medical voor gedetailleerde technische ondersteuning en aanbevelingen met betrekking tot opslag en back-up van gegevens.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikersinstelling om periodiek back-ups te maken naar een **veilige, externe netwerkllocatie** (bijv. de meegeleverde Synology DiskStation-netwerkmapi of de netwerkopslag van de instelling).

Esco Medical raadt aan om dagelijks of wekelijks back-ups te maken, afhankelijk van het volume van de klinische activiteiten.

2. **Handmatige export:**

Na voltooiing van een patiëntcyclus wordt klinici dringend geadviseerd om de door het MIRI® TL-systeem gegenereerde beeld- en/of videogegevens te exporteren en op te slaan op een veilige externe netwerkllocatie.

3. **Opslagverificatie:**

Controleer regelmatig de beschikbare opslagcapaciteit op het lokale station van de incubator en de primaire opslag om foutmeldingen vanwege een volle schijf ("Disk Full") te voorkomen, wat kan leiden tot het stoppen van de beeldregistratie of het niet kunnen aanmaken van nieuwe time-lapses.



Neem contact op met de servicedienst van Esco Medical voor technische ondersteuning bij het uitbreiden van de opslagcapaciteit.



Het MIRI® TL-systeem beschikt niet over automatische externe redundantie voor actieve time-lapse-beeldgegevens. In het geval van een kritieke hardwarefout van de interne opslag van de incubator voordat de gegevenssynchronisatie is voltooid, kan er gegevensverlies optreden. Het naleven van protocollen voor handmatige back-ups is essentieel om een hoge beschikbaarheid en klinische continuïteit te garanderen.

9.2 MIRI® TL API voor gegevensuitwisseling

De MIRI® TL Application Programming Interface (API), ontwikkeld door Esco Medical Technologies, is beschikbaar als een optionele softwarecomponent voor het MIRI® TL-systeem. Deze is bedoeld om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken tussen het MIRI® TL-systeem en software van derden.

De API is niet standaard geïnstalleerd; installatie en configuratie worden alleen uitgevoerd op afzonderlijk verzoek van de klant. Het gebruik van de API vereist dat de klant of wiens IT-

/softwareleverancier een toegewijde clienttoepassing ontwikkelt en onderhoudt die communiceert met de API binnen het gevalideerde netwerk van de kliniek.